



ESTACIÓN DE TALLADO / *GROSSING STATION*

ET-107-2



CARACTERÍSTICAS GENERALES / *GENERAL CHARACTERISTICS*

Estructura / *Structure*

- Construcción íntegramente en acero inoxidable 18/8.
- Espesores de chapa entre 1.5 y 2 mm.
- Laterales con ventana (vidrio de seguridad).
- Mampara frontal inclinada (vidrio de seguridad).
- Superficie de trabajo integrada, con reborde perimetral
- Alojamiento inferior aspirado para depósitos de formol.
- *Fully stainless steel construction on 18/8.*
- *Sheet thickness 1.5 - 2 mm.*
- *Lateral windows (safety glass).*
- *Security inclined front screen (safety glass).*
- *Integrated working area with anti-spills edge.*
- *Aspirated lower enclosure for formalin tanks*

Prestaciones / *Performances*

Cant. / *Qty*

Pantalla táctil de control
Control touchscreen

1

Alarma acústica para avisos del sistema
Acoustic alarm for system notifications

1

Interruptor de seguridad (seccionador de corriente)
Security power supply switch

1

Pulsador de emergencia (en caso de derrames de formol)
Emergency button (in case of formalin spills)

1

Mampara frontal con sistema eléctrico de guillotina
Security front screen with guillotine electric closing system

1

Detector de presencia
Presence detector

1

Iluminación LED
LED lighting

4

Luz halógena con brazo flexible
Halogen luminaire with flexible boom

2

Tomas eléctricas auxiliares
Additional electric sockets

8

Apoyapiés regulable
Adjustable footrest

2

Estante de apoyo
Shelf

2

Soporte magnético para instrumental
Magnetic board ofr instruments

2

Tabla de corte de polietileno
Polyethylene cutting board

2

Asiento ergonómico con altura ajustable
Height adjustable ergonomic seat

2

Campana superior de extracción
Superior extractor hood

1



Superficie de trabajo / <i>Working area</i>	Cant. / <i>Qty</i>
Área de tallado <i>Working area</i>	2
Bandeja perforada extraíble <i>Perforated removable tray</i>	4
Pila de lavado <i>Sink</i>	1
Grifo médico mono-mando (agua C/F) <i>Medical mixer tap (H/C water)</i>	1
Ducha mono-mando / Flexo con funda de PVC <i>Medical mixer shower / Hydraulic hose with PVC cover</i>	2
Grifo dispensador de formol <i>Formalin dispenser tap</i>	1
Pila de recogida de formol (con pre-filtro y tapa) <i>Formalin sink (with pre-filter and cover)</i>	1
Pedal dispensador automático de formol <i>Automatic formalin dispenser pedal</i>	1
Sistema de control de llenado de los depósitos de formol <i>Formalin tank filling level alarm system</i>	1
Cubo para residuos <i>Waste bucket</i>	1


Sistema de aspiración / <i>Aspiration system</i>	TOTAL
Triple zona de aspiración: frontal, superior e inferior <i>Aspiration from the lower, upper and back area</i>	✓
Motor electro-ventilador centrífugo <i>Electric centrifugal duct fan</i>	5
Filtros* <i>Filters*</i>	5
Control vida útil de los filtros (gestionado por pantalla táctil) <i>Filters useful life control system (operated by control touchscreen)</i>	✓
Primer aviso previo a cambio de filtros <i>First notification filters change</i>	800 h
Fin de vida útil de los filtros** <i>End of the filters service life**</i>	850 h
Capacidad máxima de aspiración <i>Maximum suction capacity</i>	2340 m ³ / h
Velocidad de aspiración ajustable <i>Adjustable suction speed</i>	0 - 100

*Filtros de óxido de aluminio con impregnación de permanganato potásico.


* *Aluminium oxide filters with potassium permanganate impregnation.*

**Para garantizar el cumplimiento de la normativa de seguridad en el trabajo, el equipo detendrá su funcionamiento hasta que se sustituyan los filtros agotados.

** *In order to ensure compliance with the labor risks prevention regulations, the equipment will be stopped until the exhausted filters have been replaced.*

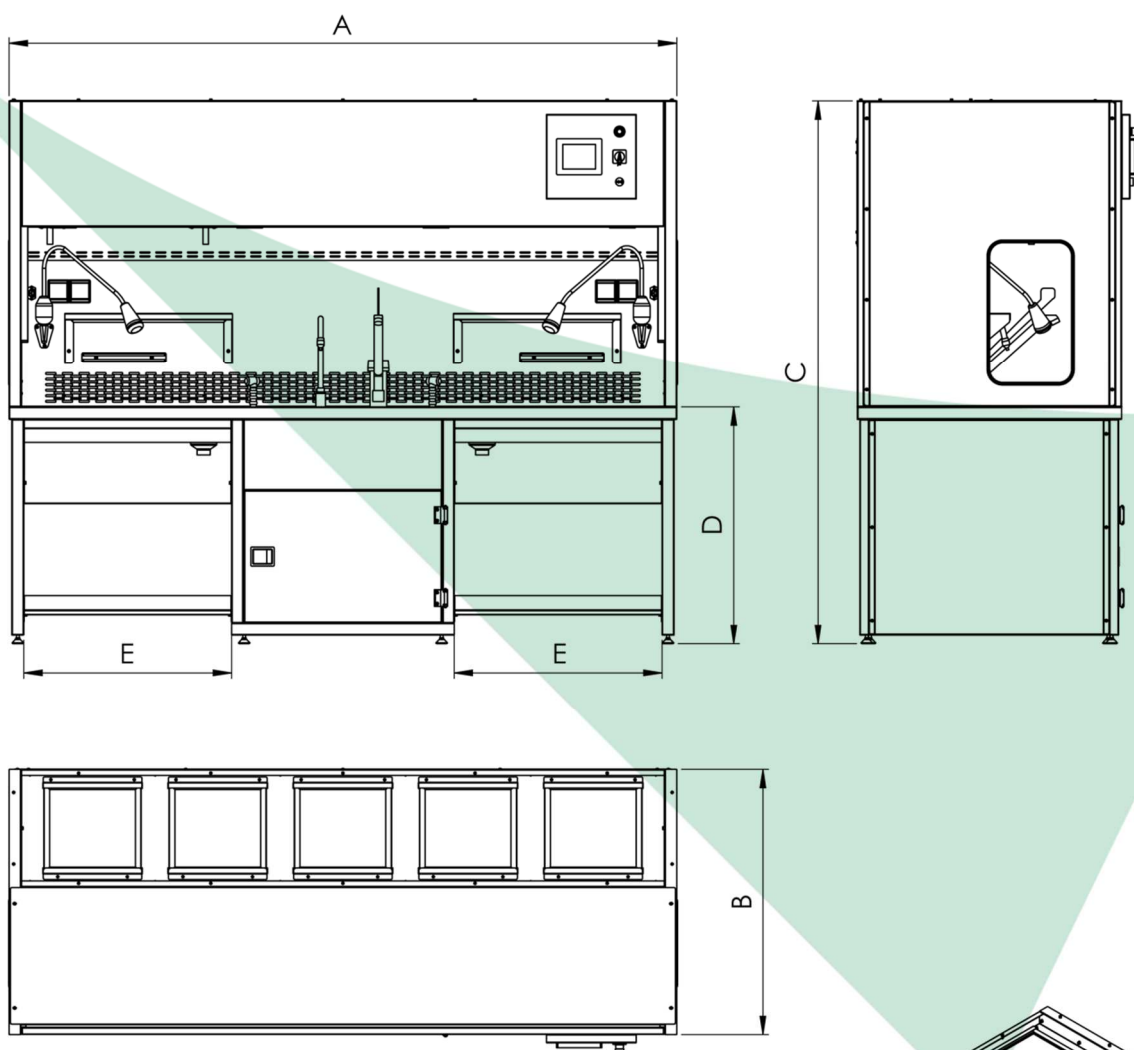DIMENSIONES / *DIMENSIONS*


	mm	in
A	2400	94.5
B	950	37.4
C	1950	76.8
D	850	33.5
E	747	29.4

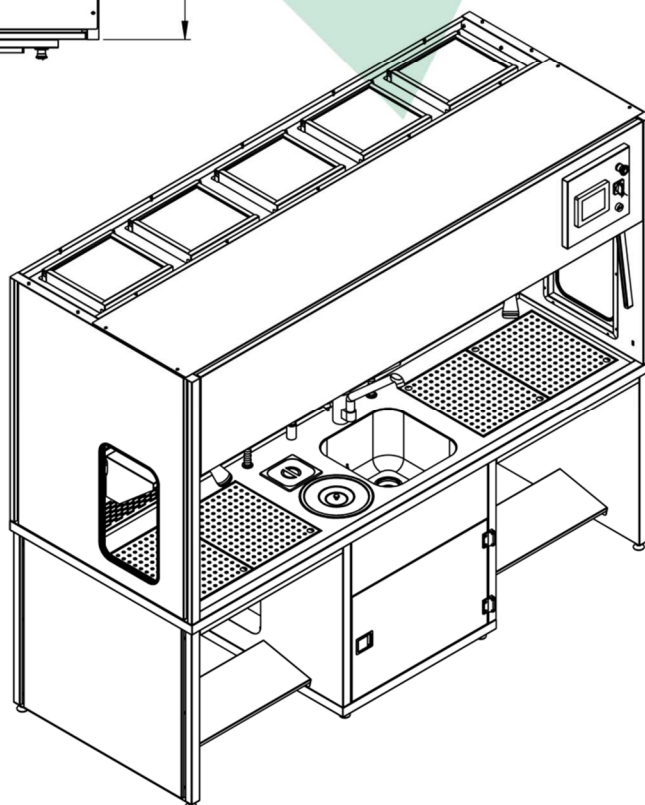


La campana de extracción puede adecuarse a las necesidades de cada espacio.

Imagen: Campana estándar con salida superior.

The extractor hood can be adapted to the requirement of the installation.

Image: Standard exhaust hood with upper extraction.

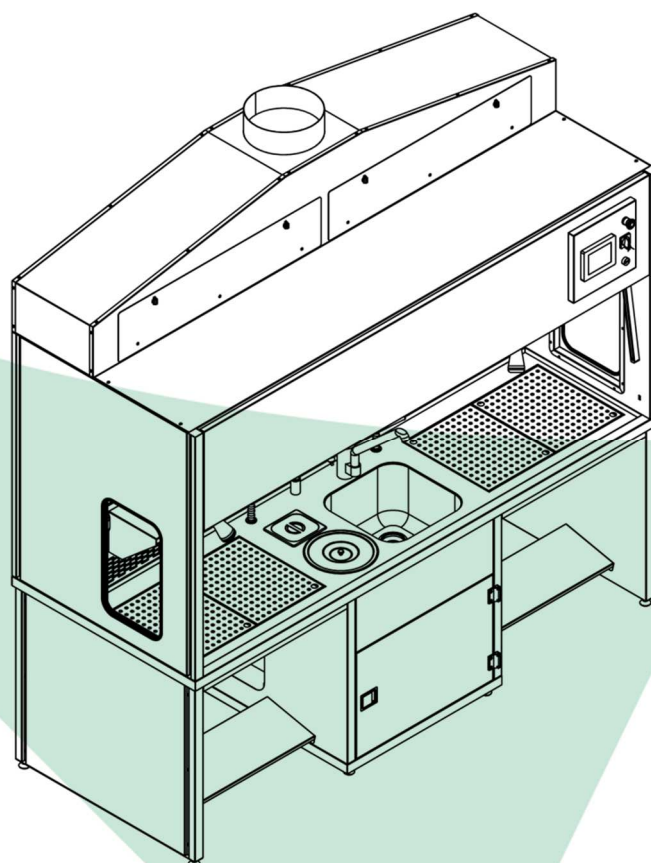

DATOS TÉCNICOS / *TECHNICAL DATA*

Voltaje / <i>Voltage</i>	120 V, 60 Hz	220 V, 50 Hz
Potencia <i>Power</i>	2,8 kW	2,8 kW
Intensidad <i>Intensity</i>	23,3 A	12,7 A
Interruptor automático <i>Circuit breaker</i>	32 A	16 A

ELEMENTOS OPCIONALES / *OPTIONAL ELEMENTS*

Sistema de auto-limpieza / *Self-cleaning system*



Cortina de agua para la auto-limpieza del área bajo la zona de corte.
/ *Water curtain for the self-cleaning under working area.*

Soportes para equipos informáticos / *Computer equipment supports*



Sistema de fotografía / *Photographic system*



Cámara digital compacta
/ *Compact digital camera*

Soporte flexible para cámara
/ *Flexible camera support*

Pantallas iluminación LED
/ *LED lighting screens*

Soportes orientables para pantallas LED /
/ *Swiveling brackets for LED lighting screens*

Tablet Android 10.1"
/ *Android Tablet 10.1"*

Base de policarbonato
/ *Polycarbonate support*

Sistema de macrofotografía / *Macrophotography system*



Cámara de inspección /
Inspection camera

Full HD 1080p

30x Optical Zoom

500 mm WD

Puntero láser /
Laser pointer

300 – 500 mm Distancia de
trabajo / *Working distance*

Dictáfono y accesorios / *Dictaphone and accessories*




Dictáfono
Dictaphone



Micrófono Zoom Compacto
Compact Zoom Microphone



Pedal
Footswitch

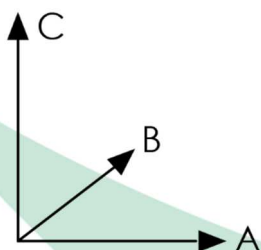EMBALAJE: PESO - MEDIDAS / *PACKING: WEIGHT - DIMENSIONS*


	mm	in
A	2650	104,3
B	1150	45,3
C	2200	86,6
PESO / <i>WEIGHT</i>	792 kg	1746 lb
Vol.	6,7 m ³	



Nota: Este documento es meramente informativo, no contractual. Cualquier funcionalidad, característica o especificación están sujetas a cambio sin previo aviso. *AnatHomic Solutions* se reserva el derecho a mejorar este documento o el producto descrito en el mismo, sin la obligación de comunicar las modificaciones realizadas.

Note: *This document is for information purposes only. Any functionality, feature or specification are subject to change without notice. AnatHomic Solutions reserves the right to improve this document or the product described without the obligation to communicate such changes.*