

MÁXIMA SEGURIDAD



DISPENSADOR DE FORMOL

Modelo DSF

Cod. DSF-005-00-00



AnatHomic Solutions
ANATOMÍA PATOLÓGICA

¿Por qué elegir nuestro Dispensador de Formol?

- ✓ Porque ofrece la máxima seguridad y confort al usuario: cuenta con una potente ventilación trasera y superior, y con ventilación en el cubículo de almacenamiento del formol.
- ✓ Porque es posible configurarlo acorde a las necesidades del usuario
- ✓ Porque su acabado brillante facilita una óptima higienización
- ✓ Porque las paredes están revestidas con material aislante para reducir el ruido al máximo
- ✓ Porque dispone de un contador de filtros que permite maximizar su aprovechamiento
- ✓ Porque es el único dispensador del mercado que utiliza filtros biodegradables y de muy fácil reemplazo
- ✓ Porque es el único dispensador del mercado que tiene componentes fabricados con material biodegradable
- ✓ Por su conveniente precio de recambio de filtros fabricados por AnatHomic Solutions





CARACTERÍSTICAS GENERALES

Construcción en acero inoxidable	AISI – 304
Espesores de chapa	1,5 - 2 mm
Dimensiones generales	700 x 700 x (h)1975 mm
Dimensiones internas	600 (ancho) x 500 (profundo) x 365 (altura de dispensación) mm
Conexiones:	
• Conexión eléctrica monofásica 230V 50Hz + tierra	
Potencia eléctrica	300 W
Panel de control	✓
Interruptor de seguridad (seccionado de corriente)	✓
Laterales con ventana (vidrio de seguridad)	Cristal laminar 3+3
Ventana frontal con maneta	Polycarbonato 8 mm
Grifo dispensador de formol	✓
Alojamiento inferior aspirado para el almacenamiento los depósitos formol:	
• 1 depósito de formol nuevo 10L	
• 1 depósito de formol usado 10L	
• Sensores de llenado y vaciado en los depósitos	
• Válvulas de conexión rápida + antigoteo	
	✓
Pedal automático dispensador de formol	✓
Capacidad total de las plataformas	30 – 40 Kg
Iluminación LED superior	2
Temperatura de funcionamiento	5°C – 45°C
Máquina para el uso de formaldehído CH ₂ O	

MECANISMO DE LLENADO


Este dispensador de formol destaca por su adaptabilidad a los diferentes tamaños de contenedores y por la posibilidad de dispensación tanto manual (utilizando el pedal) o la dispensación automática a indicar a través de la interfase electrónica (pantalla PLC).

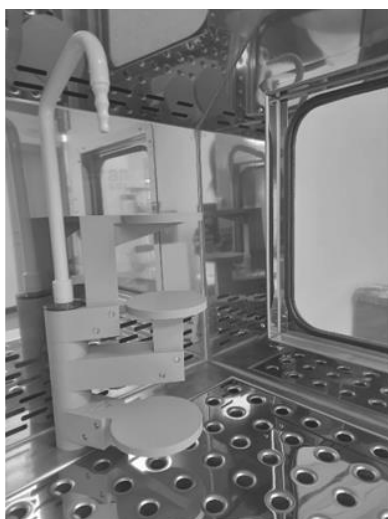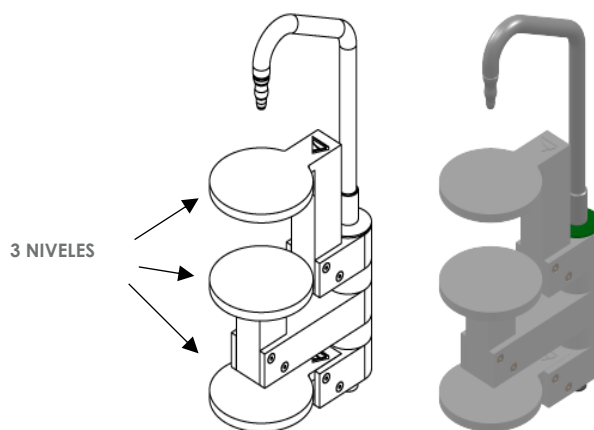

SISTEMA DE ASPIRACIÓN

Doble zona de aspiración: frontal y superior	✓
Motores electroventiladores centrífugos	1
Filtros de zeolita con impregnación de permanganato potásico	1
Control vida útil de los filtros	✓
Primer aviso previo a cambio de filtros – activación de alarma:	
• si el equipo tiene conexión al exterior	800 horas
• si el equipo no tiene conexión al exterior	400 horas
Fin de vida útil de los filtros:	
• si el equipo tiene conexión al exterior	850 horas
• si el equipo no tiene conexión al exterior	400 horas
Velocidad de aspiración ajustable 10% al 100%	Intervalos de ± 5 %
Capacidad máxima de aspiración	936 m ³ / h

DIAGRAMA DE FLUJO DE LA ASPIRACIÓN

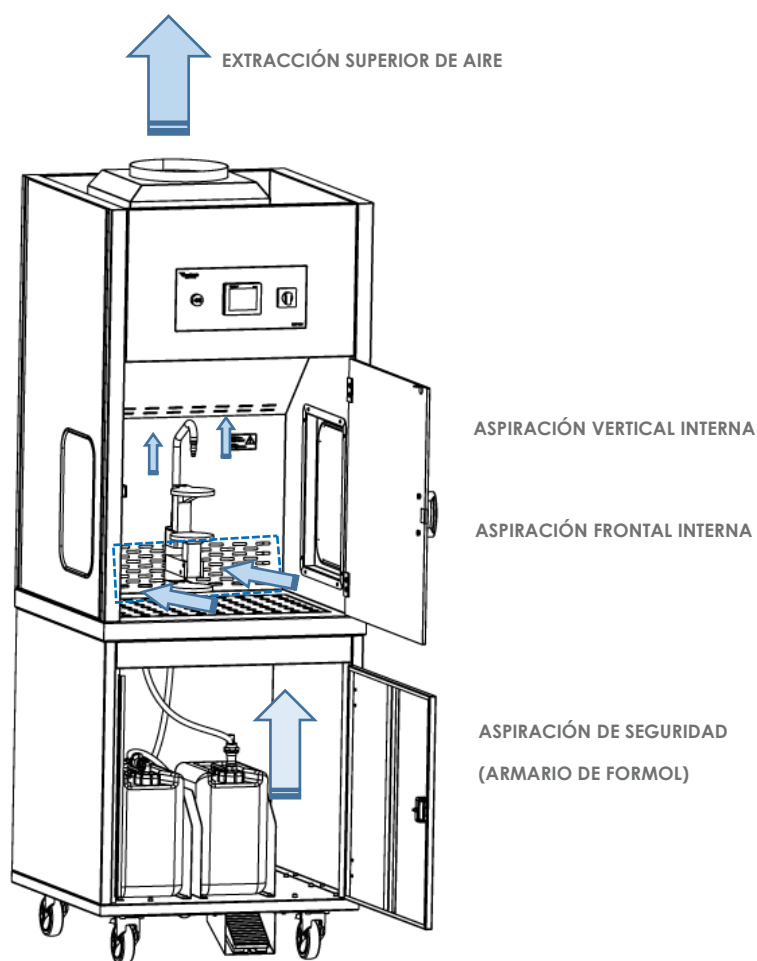


FILTROS BIODEGRADABLES CON PERMANGANATO POTÁSICO

Todas nuestras estaciones vienen equipadas con filtros biodegradables fabricados con olote de maíz y rellenos con zeolita impregnada en permanganato potásico para desinfectar las partículas exhaladas al medio ambiente. Estos filtros son de fabricación propia, lo que permite ofrecer los recambios más competitivos en cuanto a precio y la generación de ahorros en el corto plazo.



DIMENSIONES

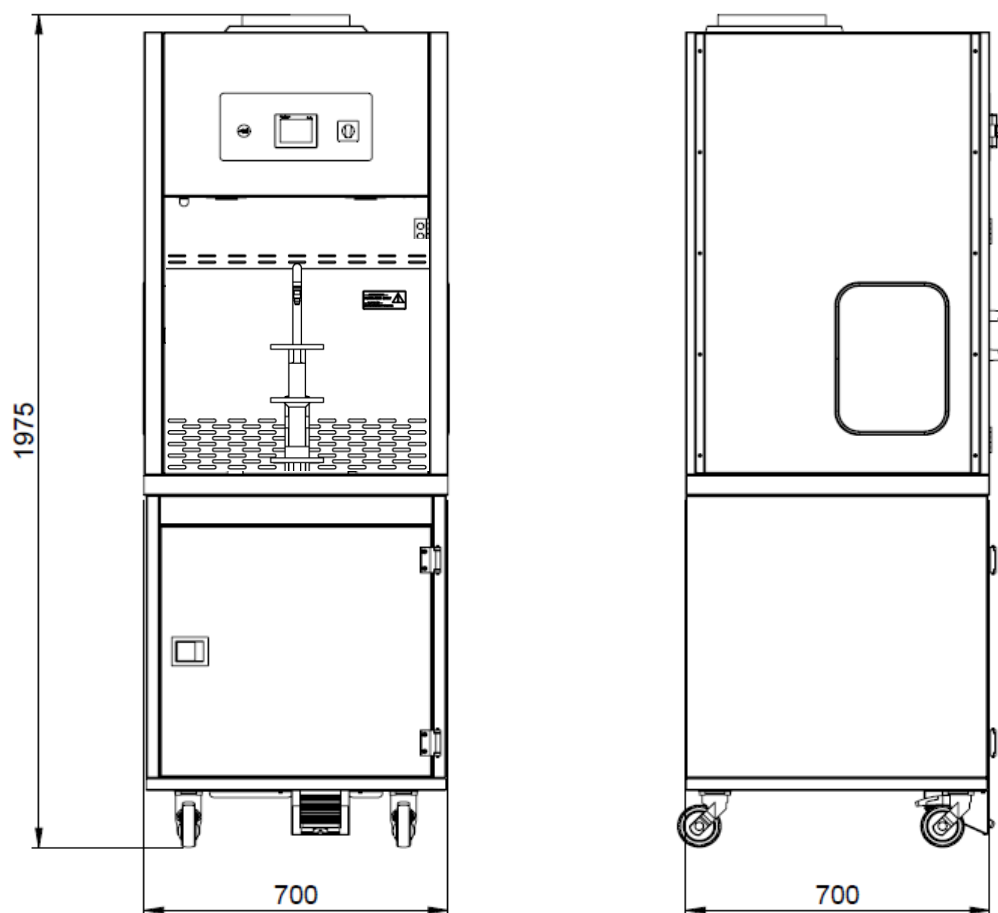

DISPENSADOR DE FORMOL
Modelo DSF-005

EMBALAJES

Embalaje fitosanitario + funda VCI



CERTIFICACIONES



UNE-EN ISO 9001:2015



UNE-EN ISO 13485:2018



UNE-EN ISO 14001:2015



Tu Seguridad es nuestra Motivación para Diseñar y Fabricar Equipos Innovadores que permitan trabajar en un entorno 100% Libre de Formol.

Esto es parte de nuestro catálogo, en continuo crecimiento con nuevos productos que cumplen altos estándares de calidad.



POLÍTICA DE GARANTÍA

- ✓ Garantizamos, contra todo defecto de fabricación, nuestros productos suministrados **durante 2 años**, a partir de la fecha documentada como de salida de fábrica.
- ✓ Esta garantía de 2 años se aplica siempre que los equipos se utilicen en condiciones normales, de acuerdo con el manual aplicable y las instrucciones de aplicación, limpieza, reparación, manejo de posibles defectos y su supervisión continua.
- ✓ Esta obligación de garantía consiste **EXCLUSIVAMENTE** en la sustitución del producto, o parte de este, reconocido como defectuoso, no incluyéndose los gastos de transporte, instalación, montaje o desmontaje, ni los daños y perjuicios que se hubiesen ocasionado.
- ✓ El producto o componente entregado en sustitución del defectuoso quedará garantizado en los mismos términos y condiciones aplicables al sustituido.
- ✓ El producto o componente sustituido debe ser devuelto a **AnatHomic Solutions, S.L.U.**, a portes pagados, en un plazo máximo de 15 días, desde la expedición de los productos o componentes sustituidos, pasado el cual **AnatHomic Solutions, S.L.U.** se reserva el derecho a facturar los productos o componentes sustituidos.
- ✓ Los productos no pueden ser modificados. Deben montarse como se indica en los planos del conjunto. La configuración no puede ser alterada.
- ✓ Las anomalías producidas por el transporte deben ser informadas "in situ" y firmadas por el transportista. De lo contrario, no podemos cumplir con la garantía.
- ✓ Toda nuestra gama de fabricados tiene una vida útil de entre 12 y 15 años, siempre que se sigan las instrucciones de uso y mantenimiento preventivos descritos en los manuales de cada equipo.
- ✓ Garantizamos la disponibilidad de recambios: accesorios, partes y piezas durante la vida útil del equipo, siempre que se sigan las instrucciones de uso y mantenimiento preventivos descritos en los manuales de cada equipo.
- ✓ Cualquier ampliación de garantía que pudiera requerir el proceso de venta público o privado, quedará sujeto a negociación y/o a la presentación de documentación específica a convenir entre **AnatHomic Solutions, S.L.U.** y el solicitante.

EXCLUSIONES

- ✓ La garantía quedará anulada si no se ha realizado el pago total de los productos garantizados.
- ✓ La garantía no cubre los daños ocasionados por negligencia en el transporte, almacenamiento o manipulación de los equipos, por operarios o procedimientos externos a **AnatHomic Solutions, S.L.U.**
- ✓ Asimismo, la garantía se anulará si no se realizan las operaciones de mantenimiento, supervisión, notificación oportuna de posibles defectos, limpieza y reparación especificadas en el manual de uso o instrucciones proporcionadas por **AnatHomic Solutions, S.L.U.**
- ✓ La garantía excluye las averías ocasionadas por un uso incorrecto o inadecuado del equipo, o por defectos ocasionados a causa de falta de mantenimiento o de formación del usuario.
- ✓ De la misma forma, se declina toda responsabilidad y garantía derivada de la instalación de los equipos, si no ha sido ejecutada por personal autorizado o siguiendo las instrucciones indicadas por **AnatHomic Solutions, S.L.U.**
- ✓ **AnatHomic Solutions, S.L.U.** declina toda responsabilidad en demoras justificadas por nuestros proveedores tales como: huelgas, incendios, catástrofes, etc., o modificaciones efectuadas una vez realizado el pedido.
- ✓ Se anula la garantía y la certificación CE de nuestros productos, en el caso de utilización de cualquier tipo de recambio, parte, pieza o consumible que no sea proveído y validado por **AnatHomic Solutions, S.L.U.**
- ✓ Se anula la garantía en el caso de realización de cualquier tipo de alteración o modificación técnica o de etiquetado de los equipos o sus partes o consumibles por cualquier agente ajeno a no autorizado por **AnatHomic Solutions, S.L.U.**



Scan our
vCard



C/del Ebre, 74 · 08223 Terrassa · Barcelona

T: +34 937 83 74 11 / +34 638 017 655

info@anathomicsolutions.com

www.anathomicsolutions.com

*Note: This document is for information purposes only. Any functionality, feature or specification are subject to change without notice **AnatHomic Solutions SLU** reserves the right to improve this document, or the product described without the obligation to communicate such changes.*

*Nota: Este documento tiene efectos meramente informativos. Cualquier funcionalidad, característica o especificación está sujeta a cambios sin previo aviso. **AnatHomic Solutions SLU** se reserva el derecho de mejorar este documento o el producto descrito, sin obligación de comunicar dichos cambios.*