

MESA DE ASPIRACIÓN

Nº de artículo: 90



- ⇒ Estructura de acero inoxidable AISI 304, con un espesor de 1.5 mm.
- ⇒ 2 bandejas perforadas extraíbles en la parte de la encimera de la mesa.
- ⇒ 1 cesta perforada de 100 mm de altura.
- ⇒ 2 cestas perforadas de 200 mm de altura.
- ⇒ Cajón con guías telescópicas en el que se alojaran las cestas perforadas.
- ⇒ Alarma acústica para avisos del sistema de la mesa.
- ⇒ Interruptor de seguridad de corriente.
- ⇒ Panel de control para las funciones de la mesa.
- ⇒ Velocidad de aspiración ajustable.
- ⇒ Con zonas de aspiración que desembocan en el conducto principal, pasando por el filtro y expulsando el aire limpio a la sala por la zona inferior del equipo. Todo ello impulsado por un electroventilador compacto de gran eficiencia.
- ⇒ Sistema de control de llenado del depósito para evitar derrames.
- ⇒ Filtros de óxido de aluminio con impregnación de permanganato potásico.
- ⇒ Sistema de control de vida útil de los filtros.
- ⇒ Primer aviso previo para el cambio de filtros de 800 h.
- ⇒ Aviso de fin de vida útil a las 850 h.
- ⇒ Potencia del motor de 0.38 kW.
- ⇒ Capacidad máxima de aspiración a 468 m³/h.
- ⇒ Bandejas perforadas: Largo=665 mm/ Ancho=429 mm.

REF: MR-002

HELIANTHUS MEDICAL, S.L

C/ TELECOMUNICACIONES 25—POL. IND. URTINSA II

28923 ALCORCÓN (MADRID)

TEL. 34 91 611 19 12

FAX. 34 91 619 15 19

WWW.HELIANTHUSMEDICAL.COM




Helianthus Medical



MESA DE ASPIRACIÓN

DIMENSIONS / DIMENSIONES

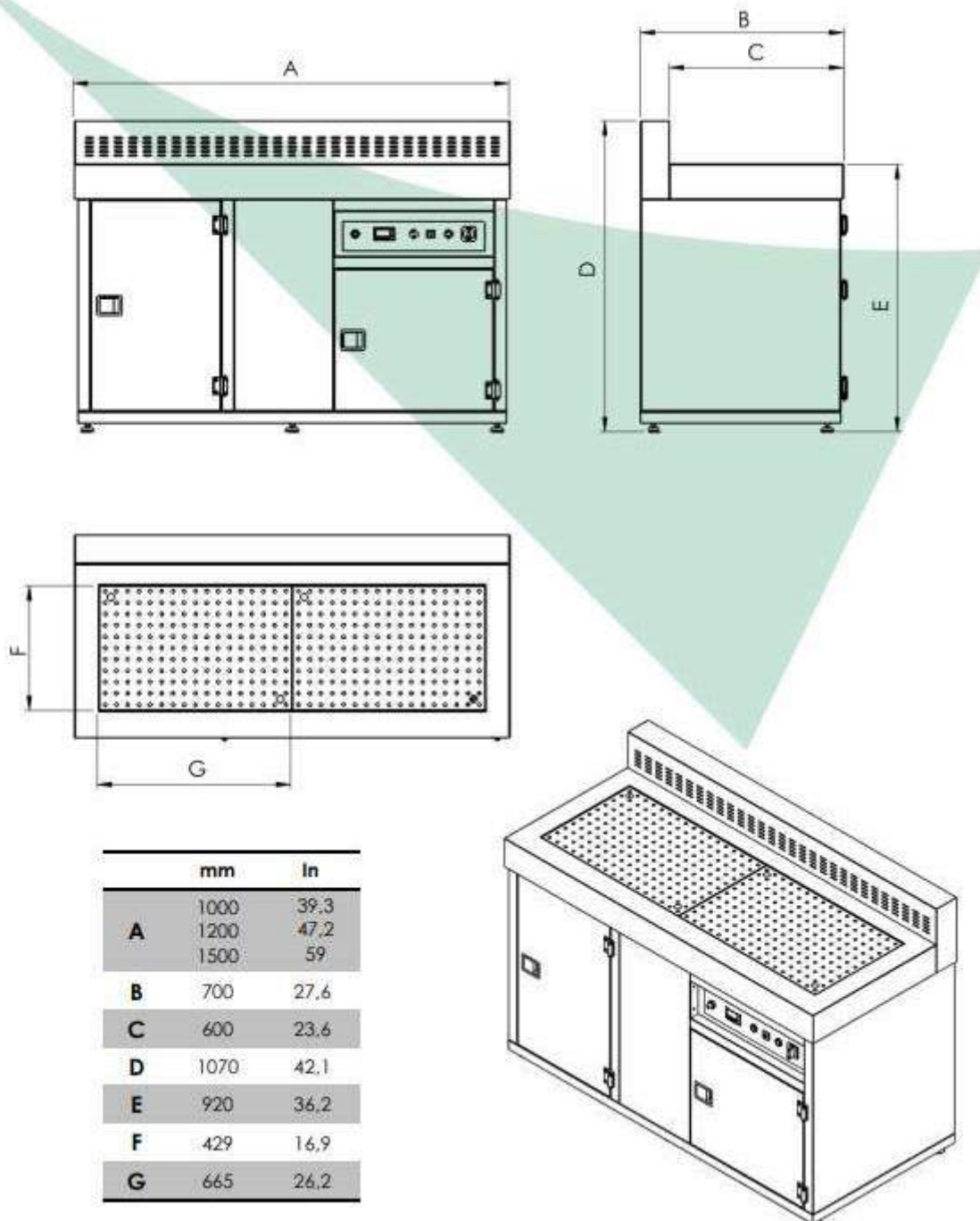

REF: MR-002

HELIANTHUS MEDICAL, S.L

C/ TELECOMUNICACIONES 25—POL. IND. URTINSA II

28923 ALCORCÓN (MADRID)

TEL. 34 91 611 19 12

FAX. 34 91 619 15 19

WWW.HELIANTHUSMEDICAL.COM



Helianthus Medical

