




Salduba

Mesa de paciente

N° de Artículo: 9

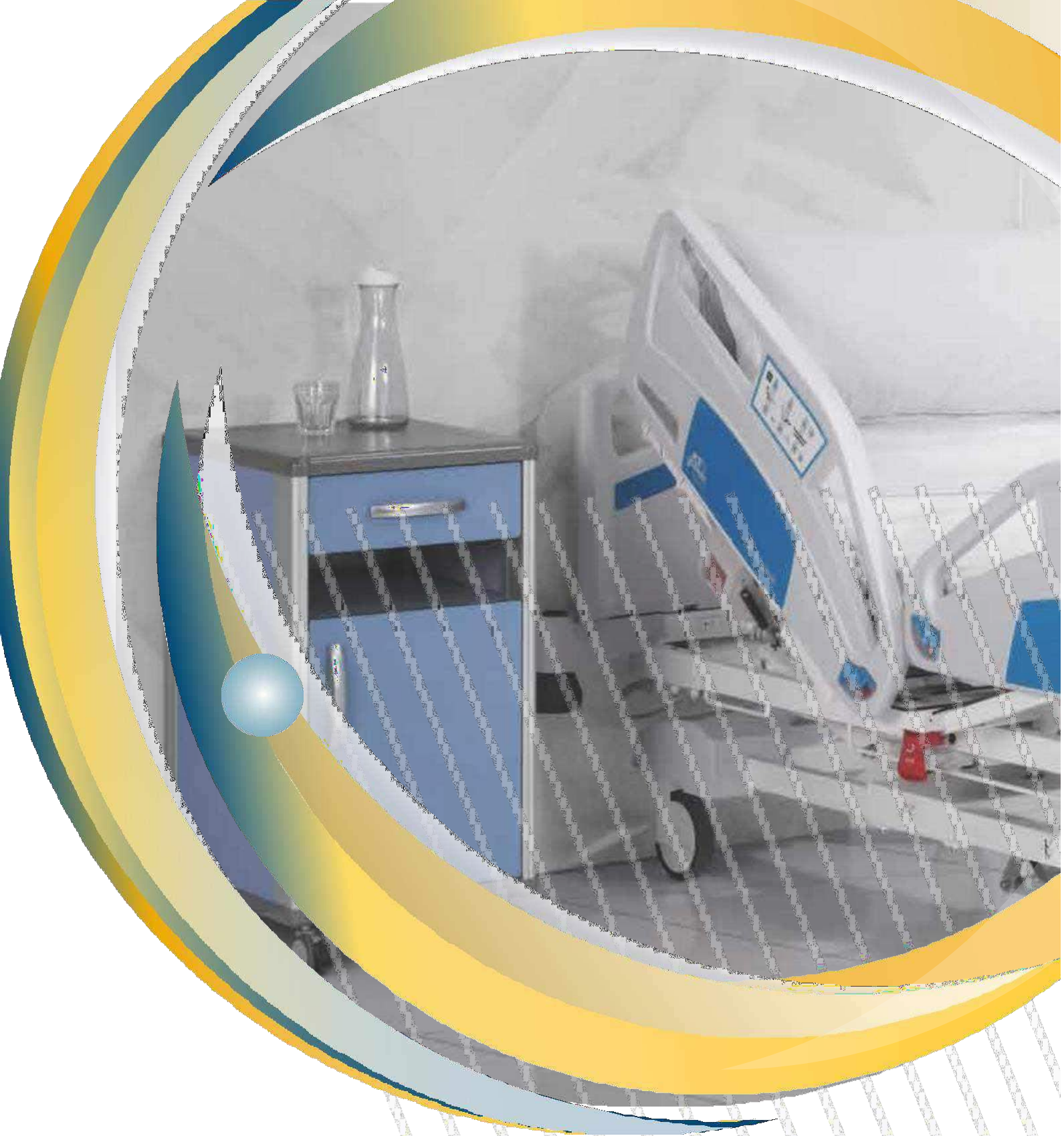

Salduba

Mesilla de noche con complemento



El modelo Salduba es una mesilla de noche para situar al lado de la cama de hospitalización.

Mesilla con estructura de aluminio anodizado, modular mediante paneles laterales con recubrimiento laminado, ensamblados sin encolado que le aportan una estética innovadora.

Mesilla con complemento incorporado, para ayudar en las tareas de comida o de lectura del usuario.

Contiene cajón monoblock de polipropileno, ligero y fácil de limpiar y mantener.



Mesilla Salduba

El modelo Salduba es una mesilla de noche para situar al lado de la cama en centros sanitarios, geriátricos o residenciales. Mesilla reversible para poder ser colocada a ambos lados de la cama.



Estructura y Acabados

Estructura en tableros laterales de aglomerado con recubrimiento melamínico. Cantos de **aluminio** que protegen la estructura.

Tapas superior e inferior en **ABS texturizado**, fácil de limpiar con rebaje para evitar la caída de líquidos.

Superficies de contacto con **cantos y bordes redondeados**, sin aristas ni superficies cortantes, permitiendo una fácil limpieza.

Mesilla de fácil limpieza, resistente a desinfectantes de uso hospitalarios.

Posibilidad de elección del color de los frontales y cuerpos.

Acabado superficial resistente a los golpes, a la luz, a la abrasión y al rayado, especialmente en las esquinas y en la parte inferior. No se altera en contacto con alcoholes, disolventes, detergentes y productos alimenticios.

Posibilidad de elección del color de los frontales y cuerpos para poder combinar con los otros elementos de la habitación.

Traslado

4 ruedas giratorias dobles de Ø 6'5 cm. con banda de rodadura de goma doble, con freno individual entodas ellas.

Las 2 ruedas ubicadas debajo del atril están ubicadas en el exterior del cuerpo principal de la mesilla para incrementar su estabilidad.

Composición

Compuesta de gaveta superior fabricada en ABS, extraíble con guías correderas y tope anticaídas.

Alojamiento intermedio, completamente abierto para depositar objetos de fácil alcance.

Armario inferior, con puerta ciega de abertura total. La puerta dispone de un freno que amortigua el cierre de esta, evitando golpes y deterioros de la mesilla.

Dispone de unos tiradores ergonómicos y de gran resistencia para poder abrir tanto el cajón como la puerta.

Rejilla de ventilación en la parte trasera.

Atril

Dotada de atril, fabricado en aglomerado con recubrimiento melamínico,.

Atril con sistema de elevación mediante palanca de gas que permite elevar o descender el complemento hasta la altura deseada.

Regulación de altura de 30 cm.

Manejo sencillo y seguro mediante asa y palanca pulsador.

Plegable hasta la vertical, lo que reduce el espacio de almacenamiento de la mesilla en su conjunto.

Dimensiones del tablero del atril 65 x 38 cm.

Características Técnicas:

Dimensiones totales (Ancho x Profundidad x Alto)	57 x 50 x 90 cm.
Altura completa	124,8 / 95 cm
Dimensiones del mueble (Ancho x Profundidad x Alto)	45 x 40 x 70 cm
Carga soportada (mesilla / atril)	30 / 15 kg.

* Las medidas de la mesilla y la información técnica pueden variar debido a las distintas configuraciones y opciones que se pueden elegir.

Adaptabilidad con el entorno destinado

Cada centro es único en diseño y necesidades, por ello para cumplir con todos ellos, se dispone de una amplia gama de acabados para la mesilla Salduba, para adaptarse a la estética del centro.

Personalización del producto


Es posible personalizar los colores de los tableros de la mesilla en función del área del hospital al que vayan a ir destinadas realizando un estudio para englobarla perfectamente en el entorno de las diferentes habitaciones de las instalaciones.



Acabados estándar ABS:




Gris RAL 7005

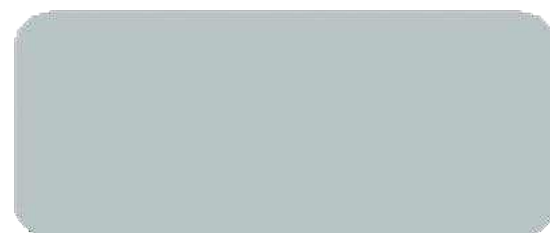

Gris NCS-S 2005




Azul RAL 5014

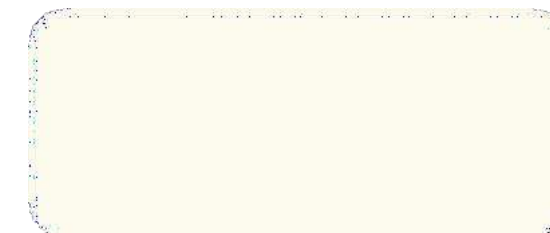

Blanco W911



Gris U708

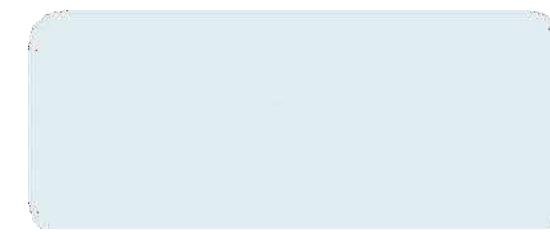

Azul U533



Azul U525

Para más acabados de melamina, consultar la página oficial de **Egger**: https://www.egger.com/shop/es_ES/interior/decors?page=1&text=
Es importante recordar que los colores visibles en la pantalla del ordenador o en modo impresión pueden diferir de la realidad.



Los Ángeles nº 5. Pol. Ind. Centrovía,
50198 La Muela (Zaragoza, España)

www.pardo.es

Tel: 976 300 033 - Fax: 976 320 647