

COLCHON ANTIESCARAS


N° de artículo: 4



ALT-9008—ALERTA RUBY— un sistema alternativo de colchón de alivio de presión con triple células colocadas celda-sobre-celda, una sección base estática y una altura en uso de 8" para la prevención y el tratamiento eficaz de pacientes con un riesgo muy alto de desarrollar una úlcera por presión en entornos hospitalarios, de enfermería y hogares de cuidado.

Con configuraciones y funcionalidades fáciles de usar, Alerta Ruby permite al proveedor de cuidados configurar rápidamente el sistema de colchón y hacer que funcione a la presión óptima para un usuario específico con facilidad.

Su amplia gama de características hace que Alerta Ruby sea una solución altamente versátil y rentable que ha sido fabricada para cumplir con las más estrictas normas de calidad y uso. Motor con alarmas de avería.

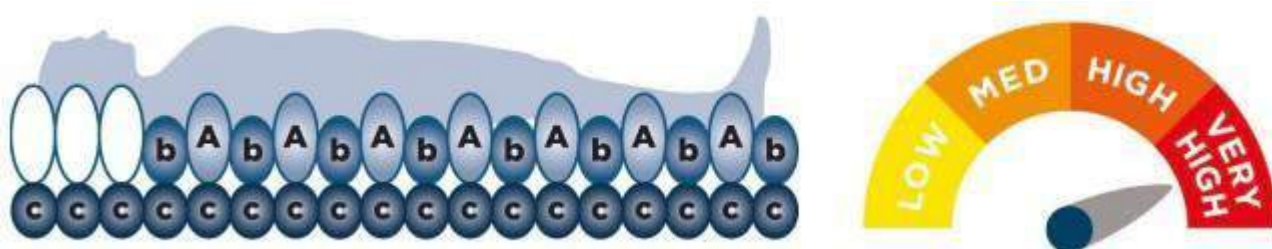

HELIANTHUS MEDICAL, S.L

C/ TELECOMUNICACIONES 25—POL. IND. URTINSA II
28923 ALCORCÓN (MADRID)
TEL. 34 91 611 19 12
FAX. 34 91 619 15 19
WWW.HELIANTHUSMEDICAL.COM



Helianthus Medical



ESPECIFICACIONES TECNICAS

- ⇒ Dimensiones del colchón : 200x85x20 cm
- ⇒ Peso del colchón: 10 kg.
- ⇒ Mando de control: 17x12x9 cm.
- ⇒ Caja de control externa poco voluminosa para liberar espacio a los pies de la cama
- ⇒ Estructura de las células: triple celda-sobre-celda.
- ⇒ **Celdas independientes extraíbles.**
- ⇒ CPR: palanca de liberación rápida.
- ⇒ Sistema de desinflado eléctrico.
- ⇒ Con hasta un total de 36 celdas.
- ⇒ Posicionamientos hasta 4 niveles.
- ⇒ Hasta 10 horas de uso sin conexión eléctrica.
- ⇒ Tratamiento de úlceras hasta categoría IV
- ⇒ Dimensiones de la bomba: 29x12x10 cm.
- ⇒ Peso de la bomba: 4kg
- ⇒ Carga máxima: 250 kg.
- ⇒ Compresor alternante, baja presión contante y modo pulsación presión máxima. En modo de baja presión alternante, proporcionara un ciclo de alternancia de 1 de cada 4 celdas durante 10 min.
- ⇒ Tiempo de ciclo: 10,15,20,25 minutos.
- ⇒ Salida de aire: 10 litros/minuto.
- ⇒ Rango de presión: 30-80 mmHg
- ⇒ Alimentación: AC220-240V, 50Hz
- ⇒ Consumo: 7W.
- ⇒ Inflado rápido.
- ⇒ Equipado con soportes colgantes.
- ⇒ Ajuste de la presión en tiempo real, controlado por el sensor interno que adapta la presión de los cojines internos instantáneamente según el tamaño, la forma, el peso y la posición del paciente.
- ⇒ Zona con presión ultra-baja para lograr una protección optima en la vulnerable área de los talones, con un apoyo reforzado de la parte baja de la pierna.
- ⇒ Nivel sonoro de la bomba 15 db.
- ⇒ Funda revestida en poliuretano sobre poliéster, baja fricción, elástico en dos direcciones, transpirable, bacteriostático y antimicrobiano, lavable y limpiable con soluciones con base de cloro, con una concentración de hasta 1000 ppm.
- ⇒ Poliuretano multi-estiramiento.
- ⇒ Vapor permeable
- ⇒ Resistente al agua.
- ⇒ Lavable en maquina.
- ⇒ Antimicrobiano.
- ⇒ **Rango de inflado de 2 min.**

Celdas independientes extraíbles



Celdas micro-perforadas



Bolsa de almacenamiento



HELIANTHUS MEDICAL, S.L

C/ TELECOMUNICACIONES 25—POL. IND. URTINSA II
28923 ALCORCÓN (MADRID)
TEL. 34 91 611 19 12
FAX. 34 91 619 15 19
WWW.HELIANTHUSMEDICAL.COM



Helianthus Medical





Nylon TPU coated cells



Independently removable cells



Removable heel cells



Branded cells



Pillow function



CPR release



Anchoring straps



Zipped storage bag



Multi-stretch, waterproof & vapour permeable PU cover



Micro-perforated cells



Antimicrobial, machine washable



360 Degree zipper



Robust pump connection



Transport mode



Remote control

CONTROL PANEL

Digital LED display for ease use

Visual and audible warning of air loss, power failure and alternate failure

Remote control communication



Digital patient weight input

Multiple cycle time control for efficiency




Ultra-Silent™ pump operation to avoid disturbance

Static/alternating modes

Seat inflation for additional surface support to facilitate the sitting position.

Control panel lock to prevent unauthorised or accidental tampering (hold for 2 sec)

Power on

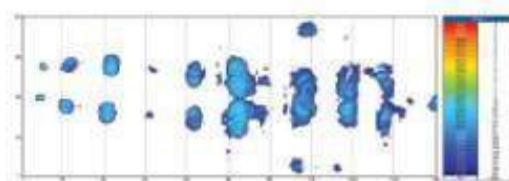

Clinical pressure mapping evaluation



HELIANTHUS MEDICAL, S.L

C/ TELECOMUNICACIONES 25—POL. IND. URTINSA II

28923 ALCORCÓN (MADRID)

TEL. 34 91 611 19 12

FAX. 34 91 619 15 19

WWW.HELIANTHUSMEDICAL.COM



Helianthus Medical

