

Breezy 250





Breezy 250

Robusta...

Moderna...

Con la más amplia gama
de modelos y opciones...

Y el mejor servicio



Breezy 250 con accesorios
Configuración no Standard



Robustez

El novedoso diseño de esta silla combinado con el tubo de 25 mm de diámetro proporcionan a la Breezy 250 una gran robustez y resistencia. **La cruceta es tubular**, sin tornillos ni anclajes. De esta forma se aprovecha mejor la fuerza de propulsión ganando en eficacia y rigidez

Diseño

Estética muy moderna y original, con detalles de color en la estructura y acabados muy cuidados que la hacen única.



Breezy 250R con ruedas traseras de 12", asiento y respaldo anatómico, reposacabezas de skay y reposapiés elevables

La gama más completa

Con una amplia gama de modelos y accesorios disponibles para adaptar la silla a la necesidades de distintos tipos de usuarios.

Y con el mejor servicio

100% Made in Spain...

- Rápido servicio post-venta: total disponibilidad de recambios y piezas
- Plazo de entrega inmediato (24 horas)
- **5 años de garantía en la estructura y cruceta**



Breezy 250

Detalles que marcan la diferencia

En el diseño de la Breezy 250 se han cuidado al máximo todos los detalles para ofrecer una estética propia hasta ahora únicamente de sillas de gama alta.

Detalles como el estilizado diseño de la pantalla, la tapicería o los acabados en color hacen de la Breezy 250 una silla única en su gama.



Novedoso diseño de todos sus componentes y modernos toques de color muy distintivos



Distintos tipos de tapicerías



Desenclavador ergonómico del reposapiés, muy accesible

Adaptable

Distancia entre ruedas

Cambiando la posición de la pletina del eje conseguimos modificar la distancia entre las ruedas delanteras y las traseras. Así se alarga o acorta la longitud de la silla para conseguir un radio de giro más reducido, o una silla más activa o más estable.




Eje atrasado
Silla más estable

Eje adelantado
Silla más activa

3 Alturas de asiento disponibles

Breezy 250 permite además seleccionar 3 diferentes alturas de asiento al suelo, combinando los distintos tamaños de ruedas disponibles: 50.5 , 48 ó 45,5 cm.

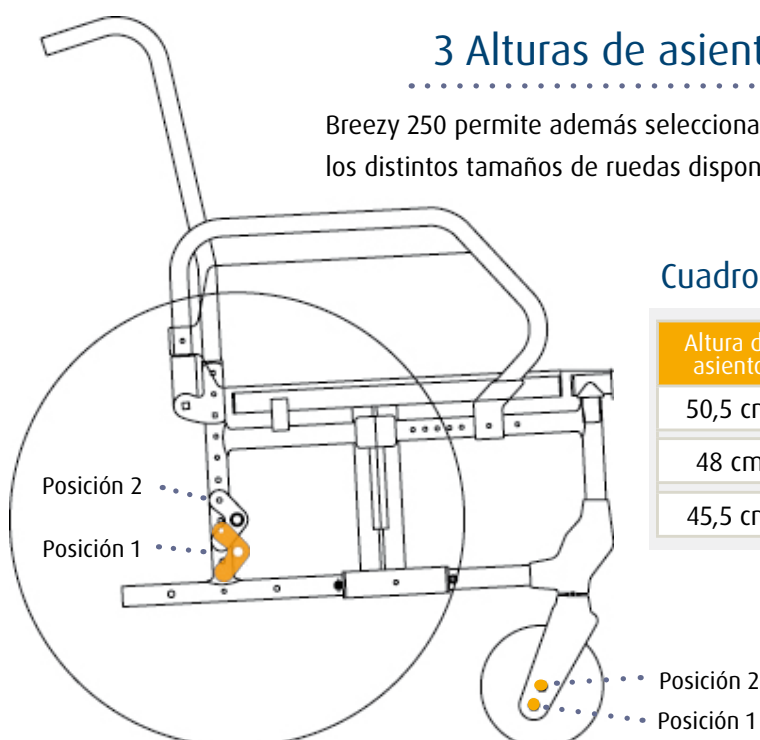

Cuadro de alturas de asiento

Altura de asiento	Rueda trasera	Posición r. trasera	Rueda delantera	Posición r. delantera
50,5 cm	24"	1	8"	1
48 cm	22"	1	6"	1
45,5 cm	22"	2	6"	2

Breezy 2

Dimensiones muy compactas



Longitud total reducida

El diseño especial de la parte frontal y la posición de la rueda trasera permiten obtener unas dimensiones realmente muy compactas. Al retirar los reposapiés se consigue una longitud total de sólo 76,5 cm!! Esto es especialmente útil para acceder con la silla por ejemplo a los ascensores.

Configurable

Con 3 modelos según el tipo de respaldo, 4 colores diferentes y toda una gama de accesorios para adaptar mejor la silla a las necesidades particulares de cada usuario.



Modelo Breezy 250

Respaldo Standard



Modelo Breezy 250R

Respaldo Reclinable



Modelo Breezy 250P

Respaldo Partido

Gama de colores

Con 4 colores disponibles para cada uno de los modelos.



Cromado



Azul



Dorado



Rojo Verano

Y numerosas opciones disponibles

- Reposabrazos regulables en altura
- Tapicería transpirable Vented
- Reposapiés cortos
- Plataformas de aluminio ajustables en ángulo
- Reposapiés elevables
- Plataforma única
- Reposacabezas
- Frenos de tambor
- Soporte de gotero
- Soporte de bastones
- Alargador de freno
- Sistema doble amputado
- Ruedas antivuelco
- Ruedas de tránsito
- Porta bombonas
- Mesa
- Cinturones
- Mochila...

Modelo Breezy 250

Respaldo Standard



Configuración Standard

Configuración Standard

Silla de acero plegable con respaldo Standard
Tapicería de nylon
Reposabrazos abatibles hacia atrás y desmontables
Reposapiés standard a 70°, desmontables y giratorios
Distancia entre ruedas delanteras y traseras ajustable
Altura de asiento al suelo regulable
Colores: cromado, azul, dorado y rojo verano.



Modelo Breezy 250 con configuración opcional
(Ruedas traseras de 12" macizas)

Modelo Breezy 250R

Respaldo Reclinable



Configuración Standard con
reposacabezas de tela (opcional)

Configuración Standard

Silla de acero plegable con respaldo reclinable en diferentes posiciones

Tapicería de nylon

Reposabrazos abatibles hacia atrás y desmontables

Reposapiés standard a 70°, desmontables y giratorios

Distancia entre ruedas delanteras y traseras ajustable

Altura de asiento al suelo regulable

Colores: cromado, azul, dorado y rojo verano.



Modelo Breezy 250R con configuración opcional y accesorios

Ruedas traseras de 12" macizas

Asiento Anatómico

Respaldo Anatómico

Reposacabezas de skay

Reposapiés elevables

Modelo Breezy 250P

Respaldo Partido



Configuración Standard

Configuración Standard

Silla de acero plegable con respaldo partido para guardarla y transportarla más fácilmente

Su sistema para abatir el respaldo es muy robusto y cómodo, sin holguras

Tapicería de nylon

Reposabrazos abatibles hacia atrás y desmontables

Reposapiés standard a 70°, desmontables y giratorios

Distancia entre ruedas delanteras y traseras ajustable

Altura de asiento al suelo regulable

Colores: cromado, azul, dorado y rojo verano.



Breezy 250P plegada



Modelo Breezy 250P con configuración opcional

Ruedas traseras de 12" macizas

Opciones y accesorios

Reposapiés



Reposapiés elevables



Reposapiés cortos



Plataformas de aluminio regulables en ángulo



Plataforma única

Tapicerías

Tapicería de nylon soldado



Tapicería transpirable vented



Reposabrazos



Reposabrazos largo



Reposabrazos regulables en altura

Anatómicos y cinturones



Modelo Breezy 250R con respaldo reclinable y conjunto de anatómicos



Asiento anatómico sin inodoro

Respaldo anatómico

Cuña abductora

Asiento anatómico con inodoro



Cinturón

Reposacabezas



Reposacabezas anatómico en respaldo anatómico



Reposacabezas de skay en respaldo anatómico



Reposacabezas anatómico en respaldo de tela



Reposacabezas de skay en respaldo de tela

Opciones y accesorios

Ruedas



Ruedas delanteras de 8"x2" neumáticas



Ruedas delanteras de 8"x2" macizas



Ruedas delanteras de 6" macizas



Rueda trasera con radios de 24" (macizas o neumáticas) o de 22" neumáticas



Rueda trasera Sport neumática de 24"



Ruedas traseras de 12" (neumáticas o macizas)



Eje de desmontaje rápido para ruedas traseras

Frenos



Alargador de freno

Frenos de tambor para rueda de 24" y 12"

Varios



Mochila



Portadocumentos



2 tipos de soporte de gotero



Soporte de bastones



. Porta bombonas de oxígeno



Sistema doble amputado



Ruedas de tránsito



Mesa



Ruedas antivuelco



Breezy 250


Breezy 250:




37 /40 /43 /46 /49 /52 cm




42 cm

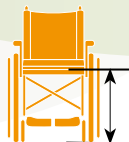


50,5 cm
48 ó 45,5 cm (con 22" y 6")

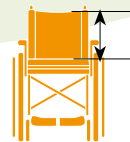

42 cm
82 cm (Breezy 250R)

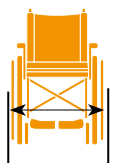

AA + 19 cm (24")
AA + 14 cm (12")

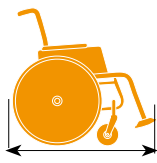


103 cm (con reposapiés)
76,5 cm (sin reposapiés)



Ruedas 12"

95 cm (con reposapiés)
68,5 cm (sin reposapiés)

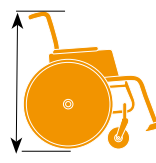

94 cm
128 cm (Breezy 250R con reposacabezas)

Especificaciones técnicas

Anchura de asiento:	37 /40 /43 /46/49 /52 cm	Longitud total modelo reclinable Breezy 250R:	113 cm (87,5 cm sin repp)
Profundidad de asiento:	42 cm	Altura total:	94 cm (128 cm en modelo reclinable B250R con cabecero)
Altura de asiento:	50,5 cm (48 ó 45,5 cm con ruedas de 22 y 6")	Ángulo de asiento:	3°
Altura de respaldo:	42 cm (82 cm en modelo reclinable Breezy 250R)	Ángulo de respaldo:	8°
Anchura total:	Ancho de asiento + 19 cm (ruedas 24")	Color de armazón:	Cromado, azul, dorado y rojo verano
	Ancho de asiento + 14 cm (ruedas 12")	Peso máximo de usuario:	125 kg
Longitud total con ruedas de 24":	103 cm (76,5 cm sin reposapiés)	Peso máx.:	Desde 16.5 kg (silla completa)*
Longitud total con ruedas de 12":	95 cm (68,5 cm sin reposapiés)	Anchura plegada:	31 cm

*Modelo Breezy 250 Configuración standard, talla 40

Tolerancia de Fábrica: +/- 1 cm

Para ampliar información sobre opciones y disponibilidad por favor consulte la hoja de pedido.

Nuestros productos están en constante proceso de mejora, por lo que Sunrise Medical se reserva el derecho de cambiar el diseño de los mismos y las especificaciones indicadas sin previo aviso



Sunrise Medical S.L.
Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga
Vizcaya, España

Tel: 902 14 24 34
Fax: 94 648 15 75

www.SunriseMedical.es