

Savoy QA3 Camilla eléctrica de corta estancia



Diseñado para una máxima facilidad de uso combinado con la comodidad superior para el paciente

La camilla Savoy QA3 de cuatro planos con accionamiento eléctrico es ideal para el transporte del paciente, su examinación e intubación. Su construcción ligera y compacta, su sistema de dirección avanzado y sus manijas ergonómicamente posicionadas la hacen sumamente maniobrable y fácilmente guiada por una persona. Savoy QA3 cuenta con una plataforma de pacientes más amplia, colchón de cuidado de presión y carriles plegables exclusivos para la seguridad del paciente que se almacenan bajo el colchón dejando un espacio de transferencia de prácticamente cero. La capacidad de baja altura excepcional permite un fácil montaje y desmontaje, particularmente útil para los pacientes de edad avanzada, mientras que la distancia mejorada del suelo permite un mejor acceso para las movilizaciones de los pacientes.

Características

- Rieles de seguridad operados verticalmente se almacenan debajo del colchón dejando una brecha de transferencia de prácticamente cero. El contrapeso de los resortes permite una facilidad de operación sin esfuerzo.
- Polo fijo de transfusión provee un mecanismo innovador de bloqueo de seguridad de liberación rápida y se integra en cualquier extremo de la cabeza o pie de los rieles de seguridad del paciente para facilitar el acceso y almacenamiento.
- Mecanismo de elevación hidráulico tiene una capacidad de baja altura excepcional ajustada por medio de pedales que operan de forma independiente ubicados a ambos lados de la camilla.
- Las ruedas están construidas con neumáticos de poliuretano para ofrecer baja resistencia a la rodadura y alta maniobrabilidad. (4 ruedas equipadas estándar 150mm, 200 mm con freno centralizado y protectores en dos colores)
- La quinta rueda es un mecanismo único para asegura una alta maniobrabilidad por lo que la camilla se puede dirigir fácilmente por una persona.
- El cilindro de O2 permite la carga lateral para la accesibilidad, adecuado para una amplia gama de opciones de cilindro incluyendo F, E, o D. 2 y 5 litros
- El respaldo asistido por gas tiene un diseño único, control de precisión y un sistema de elevación fácil para mejorar la comodidad del paciente y el usuario.
- Inclinação Trendelenburg permite alcanzar Trendelenburg rápidamente, extremadamente suave y con control, incluso cuando la camilla está a su menor altura. Inclinação 14°.
- Cuatro manijas posicionadas ergonómicamente proporcionan una maniobrabilidad suprema ya sea con el paciente acostado o sentado.

- El colchón de cuidado de presión es fabricado con espuma que se siente como gel sensible a la temperatura que se amolda a la forma del cuerpo del paciente, aliviando la presión mediante la distribución del peso lo más uniformemente posible. Desarrollado con las propiedades flexibles de lycra, este material exterior es anti-microbacterial, resistente al agua, permeable al vapor, ignífuga M2 y libre de látex. Medida 140 mm

- Bandejas utilitarias para el paciente

- Rotación de amortiguadores en los extremos de la cabeza y los pies.

Propiedades anti-bacterianas y superficies lisas moldeada

Características de Emergencia Adicionales

- 4 huecos para colocar portasueros y dos fijos en las barandillas

- Plataforma translúcida de rayos X: plataforma translúcida de radio integral adecuada para planchas digitales o tradicionales

- Frenado avanzado: plataforma excepcionalmente estable, avanzado sistema de frenado de una sola barra que permite a las cuatro ruedas frenan simultáneamente desde ambos lados de la carretilla

- Control de infecciones: superficies moldeadas lisas y cubiertas acrílicas encierran la mecánica de la carretilla para minimizar la acumulación de suciedad. Las propiedades antibacterianas y su diseño innovador aseguran que el producto sea fácil de limpiar.

- Resistente a productos de desinfección con protección IPX4

- Capacidad máxima de carga 320 kg.

- Porta enseres bajo camilla
- Angulo de cabecero de paciente 0-90°
- Regulación de la camilla en altura 480 mm x 960 mm
- Superficie del lecho 750 mm x 2150 mm, con barandilla levantada 850 mm x 1000 mm.
- Cabecero a piecero 2275 mm
- Barandillas abatibles bajo lecho con accionamiento en cabecero y piecero, longitud 165 cm y altura de 38 cm, con sistema de bloqueo y liberación con una mano. Sistema antiatrapamiento de dedos.
- Botones de control en barandilla del cabezal y piecero
- Mesita para comer integrado en piecero



Desplazamiento sin esfuerzo hasta pendientes de 10º

Accionamiento motorizado incorporado.

No es necesario empujar ni tirar de la camilla: con la nueva función DRIVE motorizada incorporada la cual está vinculada a la quinta rueda de la camilla, ofrece un desplazamiento controlado y sin esfuerzo hasta pendientes de 10º



Batería de larga duración— 22 km con una sola carga

Función DRIVE alimentada por una batería recargable avanzada de hidruro metálico de níquel.



Indicador de carga de batería de alta precisión: carga rápida.

Asas de conducción

Diseño innovador sensible al tacto, simplemente presiona contra las asas amarillas emergentes o fijas y la camilla se moverá hacia delante; tira hacia atrás y la camilla retrocederá; suéltalas y se detendrá.



HELIANTHUS MEDICAL, S.L

C/ TELECOMUNICACIONES 25—POL. IND. URTINSA II

28923 ALCORCÓN (MADRID)


TEL. 34 91 611 19 12

FAX. 34 91 619 15 19

WWW.HELIANTHUSMEDICAL.COM



Tratamiento para RCP

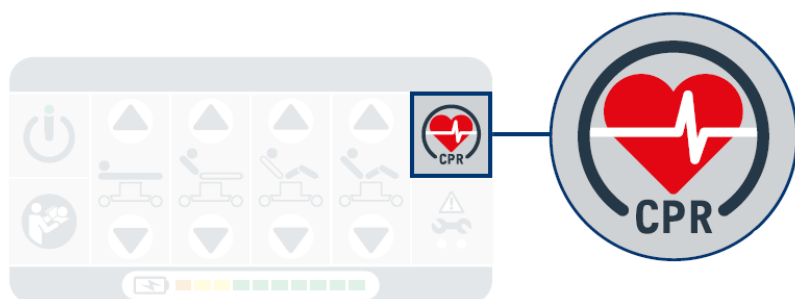

**Camilla construida totalmente
en acero con recubrimiento en epoxy**



A elegir entre colchón de gel o viscoelástico



HELIANTHUS MEDICAL, S.L

C/ TELECOMUNICACIONES 25—POL. IND. URTINSA II
28923 ALCORCÓN (MADRID)

TEL. 34 91 611 19 12

FAX. 34 91 619 15 19

WWW.HELIANTHUSMEDICAL.COM

