

Grúa móvil de transferencia Viking™ M

La elevación total



La grúa móvil para pacientes Viking M satisface las demandas más exigentes de movilización de pacientes y, además, facilita las maniobras incluso en espacios reducidos. Aunque es muy ligera, esta grúa de aluminio resistente tiene una capacidad de elevación de 205 kg.

Prestaciones y beneficios:

La unidad de control informativa muestra **el número de ciclos de elevación, el nivel de la batería, la sobrecarga de elevación y el indicador de reparaciones.**

El **sistema de cambio rápido** opcional permite a los cuidadores cambiar con facilidad y rapidez una percha o instalar una báscula.

Los reposabrazos opcionales ayudan **a los pacientes a apoyarse durante la deambulación** y facilitan a los cuidadores la maniobra de la elevación.

Los **tres ajustes variables de la altura** se adaptan a una gran diversidad de situaciones de elevación.


El mando de control, de **diseño intuitivo y ergonómico**, incorpora indicadores de nivel bajo de la batería y de aviso en cuanto se supera la carga de trabajo segura.

Ofrecemos una **amplia gama de accesorios**, entre los que se incluyen arneses, perchas y básculas.

Grúa móvil de transferencia Viking M



Mando de control

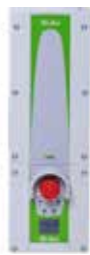

Batería integrada y unidad de control

Especificaciones técnicas

Carga máxima	205 kg
Peso	33 kg
Altura	1340 - 2020 mm
Clase de protección	IPX4
Clase de protección del mando de control	IPX4
Opciones de percha estándar	Universal 450 Slingbar 450 mm
opcional	Mini Slingbar 220 Universal Slingbar 350 Universal TwinBar 670 barras transversales
Base altura	105 mm
longitud	1230 mm
ancho	690 - 1110 mm
expansión	eléctrica
Ruedas delanteras	75 mm de doble banda
traseras	75 mm de doble banda
Material	aluminio
Elevación de emergencia	eléctrica
Descenso de emergencia	manual y eléctrica

Velocidad de elevación (sin carga)	36 mm/s
Intervalo de elevación	1270 mm
Altura de elevación máxima	1790 mm
Nivel de ruido	46 dbA
Batería	plomo ácido
Cargador	incorporado
Unidad de control	
alarma sonora de batería baja	cuando queda menos del 25 %
información sobre reparaciones	se muestra
contador de elevaciones	se muestra
indicador de sobrecargas	se muestra*
indicador del nivel de la batería	se muestra*
Mando de control	alámbrico
Código de producto	2040045

*También se muestra en el mando de control.

Hill-Rom es una empresa líder mundial en tecnología médica con más de 10.000 empleados en todo el mundo. Colaboramos con proveedores de servicios sanitarios de más de 100 países centrandos nuestros esfuerzos en proporcionar soluciones de atención al paciente que permitan mejorar los resultados clínicos y económicos en cinco áreas fundamentales: **fomento de la movilidad, cuidado y prevención de heridas, trabajo clínico, seguridad y eficacia quirúrgicas, y salud respiratoria**. Los empleados, programas y productos de Hill-Rom de todo el mundo tienen un objetivo: **mejorar los resultados clínicos de pacientes y profesionales sanitarios**.

No todos los productos y opciones están disponibles en todos los países. Para obtener más información sobre nuestros productos y servicios, póngase en contacto con su representante local de Hill-Rom o visite nuestra página web:

www.hill-rom.com

Este documento está dirigido exclusivamente a profesionales de la salud. Los equipos médicos que se muestran en el presente folleto están diseñados para su uso con pacientes en las unidades de los centros sanitarios.

Los equipos médicos son productos sanitarios regulados que cuentan, de acuerdo con esta normativa, con la marca CE. Hill-Rom le recomienda la lectura detenida de las instrucciones detalladas de seguridad así como de correcta utilización que figuran en los documentos incluidos junto con los equipos médicos. El personal de los centros sanitarios es responsable del uso y mantenimiento adecuados de estos equipos médicos.

Hill-Rom se reserva el derecho a efectuar modificaciones sin previo aviso en el diseño, las especificaciones y los modelos. Hill-Rom ofrece únicamente una garantía expresa por escrito en relación con la venta o el alquiler de sus productos.

Fabricante:
Liko AB, Nedre vägen 100, SE-975 92 Luleå, Suecia

©2016 Hill-Rom Services, Inc. RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS.
N.º de documento: 5E5183307-01, 07 septiembre 2016

Enhancing outcomes for
patients and their caregivers:

Hill-Rom