



kinetec

Hill-Rom®



Cadres de Traction / Suspension Traction Frames

Création d'un Nouveau Cadre - New Traction Frames

Le système de Traction Kinetec est modulable et adaptable à tous types de lits, afin de respecter les réglementations de sécurité relatives aux Dispositifs Médicaux de Classe 1, nous avons mis en place une procédure pour la création d'un nouveau cadre qui commence par la prise de mesures du lit, l'idéal étant que nous puissions avoir un lit à disposition dans nos locaux.

The Kinetec Traction system is flexible and adaptable to all types of beds, in order to respect the regulation of safety relating to the Medical Devices of Class 1, we set up a procedure of creation for new frames which starts with the measurements of the bed, the ideal procedure is to have a bed at disposal in our manufacturing plant.

Pour toute demande de réalisation spéciale, merci de nous retourner le formulaire ci-dessous.

Dans tous les cas mentionner la marque et le type de lit.

Important : Vérifier si toutes les portes du service et ascenseur sont égales ou supérieures à 2m (si inférieures, nous communiquer la hauteur des portes)

Si possible photos du lit avec détails des points de fixation du cadre.

For special requests, please provide us with the below form and details.

Please mention the brand and the type of bed on every request.

Important: Please make sure all doors and elevators entrances are 2 meters high (79"). (Mention if they are lower or equal).

If possible pictures of the bed with details of the fixation points of the frames.

Pour un cadre avec portique - For a frame with Porch

Type de lit - Bed Type : _____

A • Entraxe des trous support portique pied de lit. _____

Distance between centres of the holes of the porch support on the foot end. _____

B • Entraxe des trous support portique tête de lit. _____

Distance between centres of the holes of the porch support on the head end. _____

C • Hauteur du lit en position basse (aux trous support portique). _____

Height of the bed in low position (from porch support holes). _____

D • Détails des trous de support portique. _____

Details of the holes of porch support. _____

E • Longueur du lit (entraxe des trous de support portique). _____

Length of the bed (Distance between centres of the holes of the porch support). _____

F • Si lit électrique, mentionner la position de la borne de terre du lit. _____

If this is an electric bed, please mention the position of the ground connector of the bed. _____

Pour la réalisation d'un dossier technique - For a frame with a removable foot end

Type de lit - Bed Type : _____

G • Entraxe des longerons du lit. _____

Distance between the parallel outer poles of the bed. _____



H • Dimensions intérieures des longerons du lit. _____

The inside dimensions of the parallel outer poles of the bed. _____

I • Hauteur du sol au bord supérieur des longerons du lit (lit position basse). _____

Height of the bed in low position

(from the superior side of the parallel outer parallel outer poles of the bed). _____

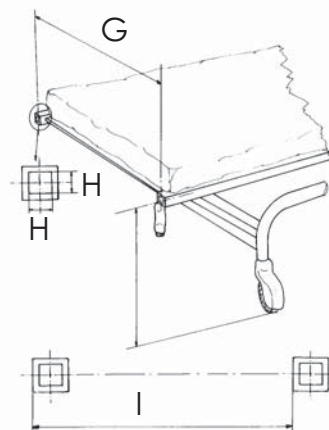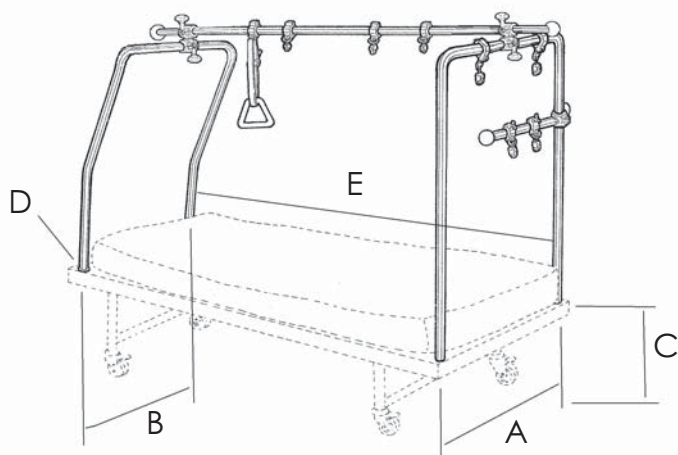

kinetec

Kinetec SAS
Zone Industrielle de Tournes
Rue Maurice Périn
F-08090 Tournes
France



+33 (0)3 24 29 85 05



+33 (0)3 24 33 51 05



contact@kinetec.fr



www.kinetec.fr

SommaireContents

DescriptionDescription 3-4

Les pièces du SystèmeParts of the System 5-8

Accessoires de TractionTraction Accessories 10

Attelles de traction / SuspensionTraction / Suspension Splints 12-14


Les montages sur différents litsAssemblies on various beds

Montage de Base sur lit AdulteUniversal Fixation Frame on Adult bed 15

Montage parcellaire sur lit AdultePartial Assembling on Adult Bed 16

Montage de base sur lit PédiatriqueUniversal Fixation Frame on Paediatric bed 17

Les Kits de tractionTraction Sets

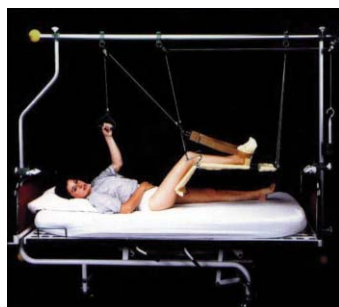

Parce que nous cherchons toujours à améliorer nos produits, Kinetec se réserve le droit d'y apporter des modifications techniques sans préavis.
Because we are constantly looking for ways to improve our machines, Kinetec reserves the right to make technical modifications without notice.



Dispositif Médical de Classe 1.
Medical Term Class 1.

kinetec

Kinetec SAS
Zone Industrielle de Tournes
Rue Maurice Périn
F-08090 Tournes
France



+33 (0)3 24 29 85 05



+33 (0)3 24 33 51 05



contact@kinetec.fr



www.kinetec.fr

Description

Le Système de **TRACTION KINETEC** est un matériel conçu et expérimenté en milieu hospitalier dans le but de permettre tous montages de :

**TRACTION,
SUSPENSION,
MOBILISATION,
POSTURE,**

autour de n'importe quel lit d'hospitalisation d'adulte ou d'enfant.

Le Système de **TRACTION KINETEC** se compose :

- de **TUBES OCTOGONAUX** en **ALUMINIUM ANODISE** de 34mm sur plat, à haute résistance, de présentation satinée et luxueuse,
- de **MACHOIRES CRANTEES** offrant **SEIZE POSITIONS** autour de l'axe du tube et assurant une prise indérégable,
- d'une **INTERFACE DE FIXATION** permettant l'ancrage, en tête, pied ou en transversale du lit,
- de **PORTE-POULIES** assurant le libre jeu de la poulie dans tous les axes, éliminant ainsi toute force de friction ou déraillement de la corde de traction,
- d'**ACCESSOIRES DE TRACTION** permettant un positionnement précis du membre à mobiliser.



Le Système de **TRACTION KINETEC** peut résoudre tous les problèmes de pratique quotidienne que posent :

- l'Orthopédie,
- la Rééducation au lit et dans la chambre du malade,
- la Rhumatologie et la médecine de Réhabilitation
- la Neurologie,

mais aussi l'Assistance aux alités et Handicapés physiques dans les différents services :

- Médecine,
- Urgence,
- Chronique,
- Convalescents
- Gériatrie
- Soins intensif.

Construit à partir d'un matériau qui allie la résistance et la légèreté, le Système de Traction Kinetec est d'un emploi facile pour tout le personnel soignant.



KINETEC garantit son Système de Traction, 2 ans contre tous vices de fabrication, à partir de la date d'achat par le consommateur.



Dispositif médical conforme aux exigences essentielles de la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux de classe I.



Description

The **KINETEC TRACTION** System is a product developed and tested in order to enable any set up for:
**TRACTION,
SUSPENSION,
MOBILISATION,
POSTURE,**

adaptable on all adult or child hospitalization bed.

The KINETEC TRACTION System is composed of:

- **OCTAGONAL TUBES** of **ANODISED ALUMINIUM** of 34mm, high-strength, of glossed and luxurious presentation,
- **NOTCHED HOLDING CLAMPS** offering **SIXTEEN POSITIONS** around the tube axis and assuring against dislocation
- a **FIXING INTERFACE** allowing anchoring, at the head, foot or in transversal of the bed,
- **CARRY-PULLEYS** ensuring free plan of the pulley in all axes, thus supressing force from friction or derailment of the traction cord,
- **TRACTION ACCESSORIES** allowing a precise positioning of the mobilized limbs.



The **KINETEC TRACTION** System solves the daily needs in:

- Orthopaedics,
- Rehabilitation with the bed and in the room of the patient,
- Rhumatology and the medicine of Rehabilitation,
- NEUROLOGY,
- Emergency wards,

but also Assistance for bedridden and physically handicapped patients in the various services:

- Medecines,
- Emergency,
- Chronicles,
- Convalescents,
- Geriatrics,
- Intensive care.


Designed from a material which combines resistance and lightness, the KINETEC TRACTION System is easy to use for all medical staff.

KINETEC guarantees its Traction System 2 years against all defects of manufacture, starting from the date of purchase by the consumer.



Medical device conforms to the essential requirements of the directive 93/42/CEE relating to the medical devices of class I.

Les Pièces du Système - Parts of the System

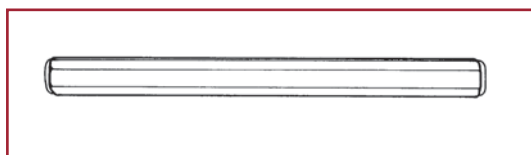


Barres - Bars

B 240	4655000071	Barre renforcée de 240cm <i>Reinforced Bar 240cm (94")</i>
B210	4655000055	Barre renforcée de 210cm <i>Reinforced Bar 210cm (83")</i>
BT H	46550001110	Barre renforcée télescopique <i>Telescopic Reinforced Bar</i>
B140	4655004445	Barre de 140cm <i>Bar 140cm (55")</i>
B120	4655003512	Barre de 120cm <i>Bar 120cm (47")</i>
B110	4655004015	Barre de 110cm <i>Bar 110cm (43")</i>
B100	4655003687	Barre de 100cm <i>Bar 100cm (39")</i>
B95	4655000039	Barre de 95cm <i>Bar 95cm (37")</i>
B80	4655000021	Barre de 80cm <i>Bar 80cm (31")</i>
B40	4655002845	Barre de 40cm <i>Bar 40cm (15")</i>




Tube à Mâchoire Fixe - Fixed Clamp Bar

B200M Equi	4655003611	Tube renforcée de 200cm <i>Reinforced Bar 200cm (78")</i>
T180	4655002978	Tube renforcée de 180cm <i>Reinforced Bar 180cm (71")</i>
T120	4655000782	Tube de 120cm <i>Bar 120cm (47")</i>
T70 Equi*	4655003207	Tube de 70cm <i>Bar 70cm (28")</i>
T40 Equi*	4655003067	Tube de 40cm <i>Bar 40cm (16")</i>
T25 Equi*	4655003083	Tube de 25cm <i>Bar 25cm (10")</i>
T13 Equi*	4655003075	Tube de 13cm <i>Bar 13cm (5")</i>

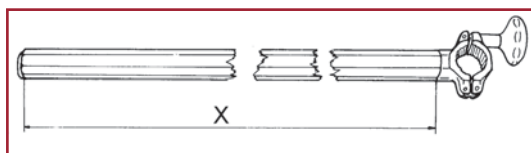


Tube Droit à Mâchoire Pivotante - Straight Bar With Swivel Clamp Bar

TP140	4655001475	Bar de 140cm <i>Bar 140cm (55")</i>
TP160	4655000857	Bar de 160cm <i>Bar 160cm (63")</i>

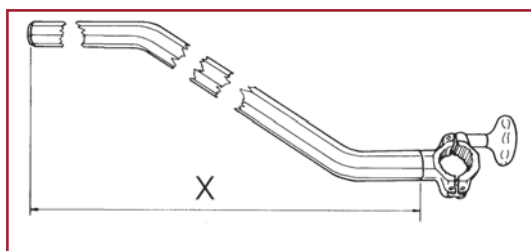


Tube en "Col de Cygne" à Mâchoire Pivotante Offset Bar With Swivel Clamp Bar

TCY14	4655001483	Tube de 140cm <i>Bar 140cm (55")</i>
TCY16	4655000790	Tube de 160cm <i>Bar 160cm (63")</i>

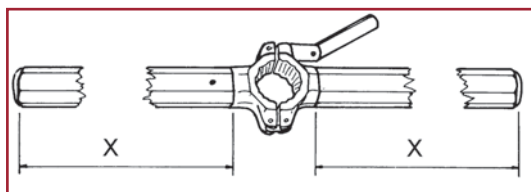

Tube à Mâchoire Centrale - Center Clamp Bar

TM70 Equi*	4655003158	Bar de 2x35cm <i>Bar 2x35cm (14")</i>
TM140	4655001467	Bar de 2x70cm <i>Bar 2x70cm (28")</i>

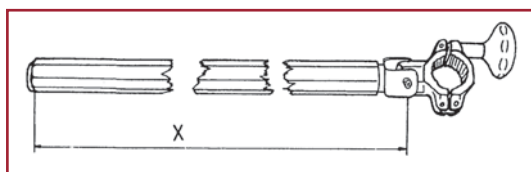

Barre Renforcée à Mâchoire Articulée - Reinforced bar with Articulated Clamp

BM240M	4655000089	Bar de 240cm <i>Bar 240cm (94")</i>
BM210M	4655000063	Bar de 210cm <i>Bar 210cm (83")</i>


* Sur un lit électrique, utiliser uniquement les éléments Kinetec désignés "Equi", permettant la continuité de terre.

* On a electrical bed, please use only the Kinetec components describe as "Equi" (Medical Equipment Potential Equalization) allowing the grounding continuity.

Les Pièces du Système - Parts of the System

Tube Droit à 2 Mâchoires (1 fixe et 1 pivotante) Straight Bar with 2 Clamps (1 swivel and 1 fixe)


TD2M* 4655000823 Tube réalisé sur mesure,
toutes dimensions possible
Bar can be customized,
Realization in all dimensions

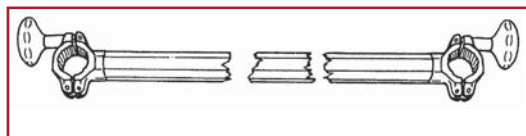

Tube en "Col de Cygne" à 2 Mâchoires (1 fixe et 1 pivotante)

Offset Bar with 2 Clamps (1 swivel and 1 fixe)

TCY2M* 4655000807 Tube réalisé sur mesure,
toutes dimensions possible
Bar can be customized,
Realization in all dimensions

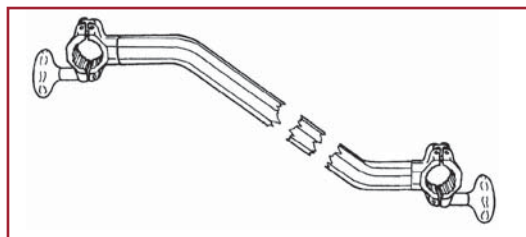


Portique - Porch

PR01* 4655000633 Portique Fixe, réalisé sur mesure,
toutes dimensions possible
Fixed Porch Bar, can be customized,
Realization in all dimensions
PR02* 4655000641 Portique Articulé, réalisé sur mesure,
toutes dimensions possible
Movable Porch Bar, can be customized,
Realization in all dimensions



Barre Cintrée - Shaped Bar


BC120 4655000097 Barre Cintrée de 120cm
" L " Shaped Bar 120cm (47")

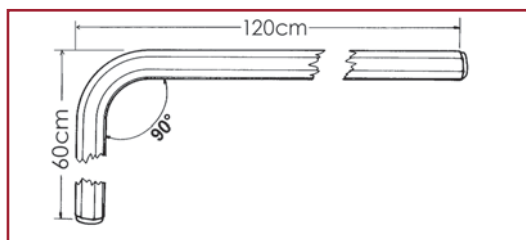

Barre en "U" - "U" Shaped Bar


BU77 4655000120 Barre de X=77, Y=80cm
Bar X=77, Y=80cm(X=30, Y=32")
BU85 4655003588 Barre de X=77, Y=85cm
Bar X=77, Y=85cm(X=30, Y=34")
BU109 4655000138 Barre de X=109, Y=120cm
Bar X=109, Y=120cm(X=43, Y=47")

Les Barres en "U" ont une gravure de réglage de 5cm en 5cm.
Adjustment prints every 5cm (2").

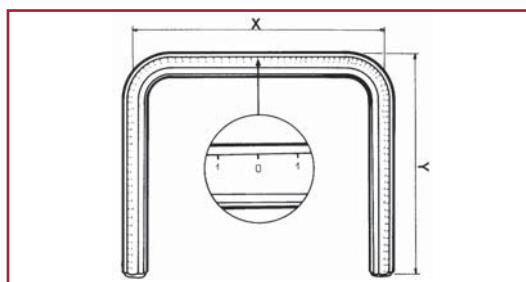

Sphère de Protection - Wall Protection Cushion

SP01 4635001304 Sphère de protection
Wall Protection Cushion

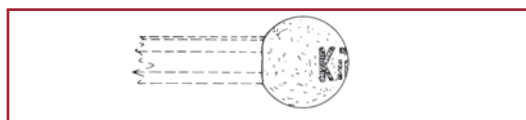

Butée de Protection - Rollertype Wall Protection


BP94 4655000104 Butée de Protection
Rollertype Wall Protection



* Pour commander : veuillez nous retourner la feuille de mesures, voir au début du catalogue.


* To order: please fill in data from as in the first page of the catalogue and return.

Les Pièces du Système - Parts of the System

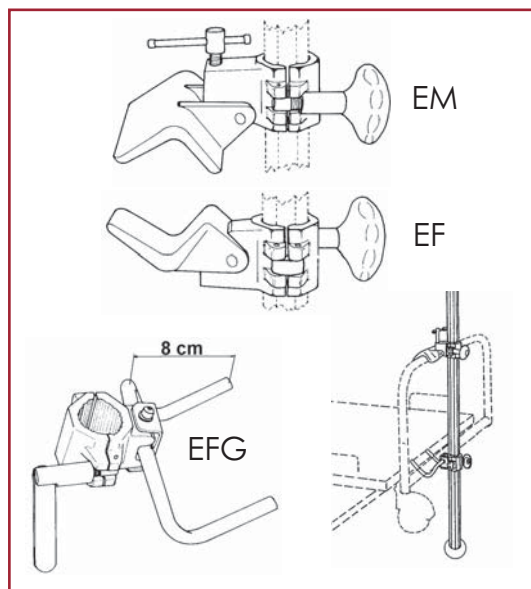


Etau - Panel Clamp

EM	4655000344	Etau Mobile Upper Clamp (movable)
EF	4655000328	Etau Fixe Lower Clamp (fixed)
EFG	4655000336	Etau Fixe à Griffes (8cm) Lower Clamp with special jaws of 8cm (3")

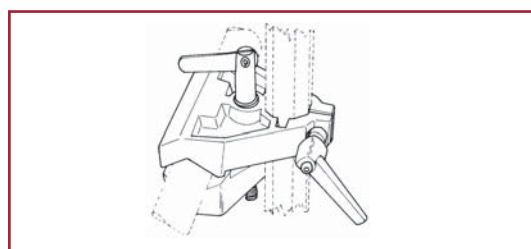

Presse Universelle - Universal Clamp

PU03	4655000683	Presse universelle pour tube rond Universal Clamp for round tube
------	------------	---

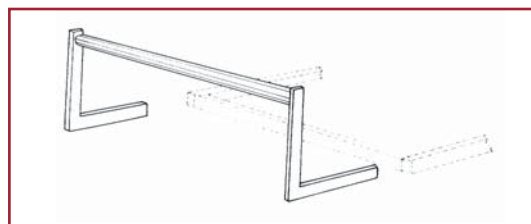

Dosseret Technique - Removable Foot End

DC27*	4655000229	Dosseret, réalisé sur mesure, toutes dimensions possible Removable Foot End, can be customized, Realization in all dimensions
-------	------------	--



Double Mâchoire - Double Clamp

DME Equi**	4655003059	Fixe Fixed
DMEP Equi**	4655003398	Pivotante Swivelled



Etrier de Traction - Handgrip

P753	4655000948	Etrier de Traction Handgrip
------	------------	--------------------------------

Poids maximum de traction : = 75Kg

Maximum traction weight : = 75Kg

* Pour commander : veuillez nous retourner la feuille de mesures, voir au début du catalogue.

* To order: please fill in data from as in the first page of the catalogue and return.

** Sur un lit électrique, utiliser uniquement les éléments Kinetec désignés "Equi", permettant la continuité de terre.

** On a electrical bed, please use only the Kinetec components describe as "Equi" (Medical Equipment Potential Equalization) allowing the grounding continuity.

Les Pièces du Système - Parts of the System


Poulie sur colonne- Pulley on Column

GRC011	4655000394	Poulie Simple sur Colonne Simple Pulley on Column
GRC012	4655000401	Poulie Double sur Colonne Double Pulley on Column



Mâchoire à Griffes - Clamp with Large Claws

MG01	4655000493	Mâchoire à Griffes Clamp with large claws
------	------------	--

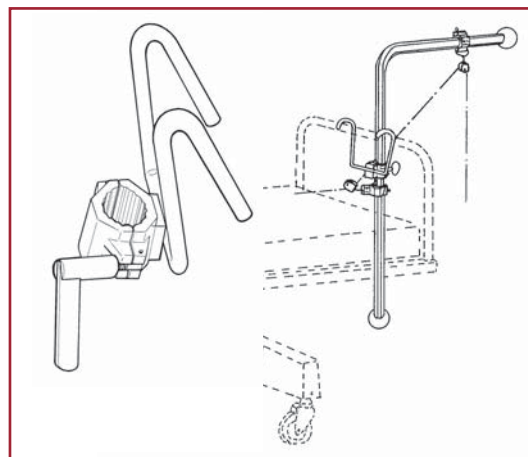

Porte Serum - I.V. Holder

TPS01 Equi*	4655003091	Tige Porte Serum I.V. Holder Shaft
-------------	------------	---------------------------------------




* Sur un lit électrique, utiliser uniquement les éléments Kinetec désignés " Equi ", permettant la continuité de terre.

* On a electrical bed, please use only the Kinetec components describe as "Equi" (Medical Equipment Potential Equalization) allowing the grounding continuity.

4655004669 - T COURBE 98-65

Barre courbe
Curved bar

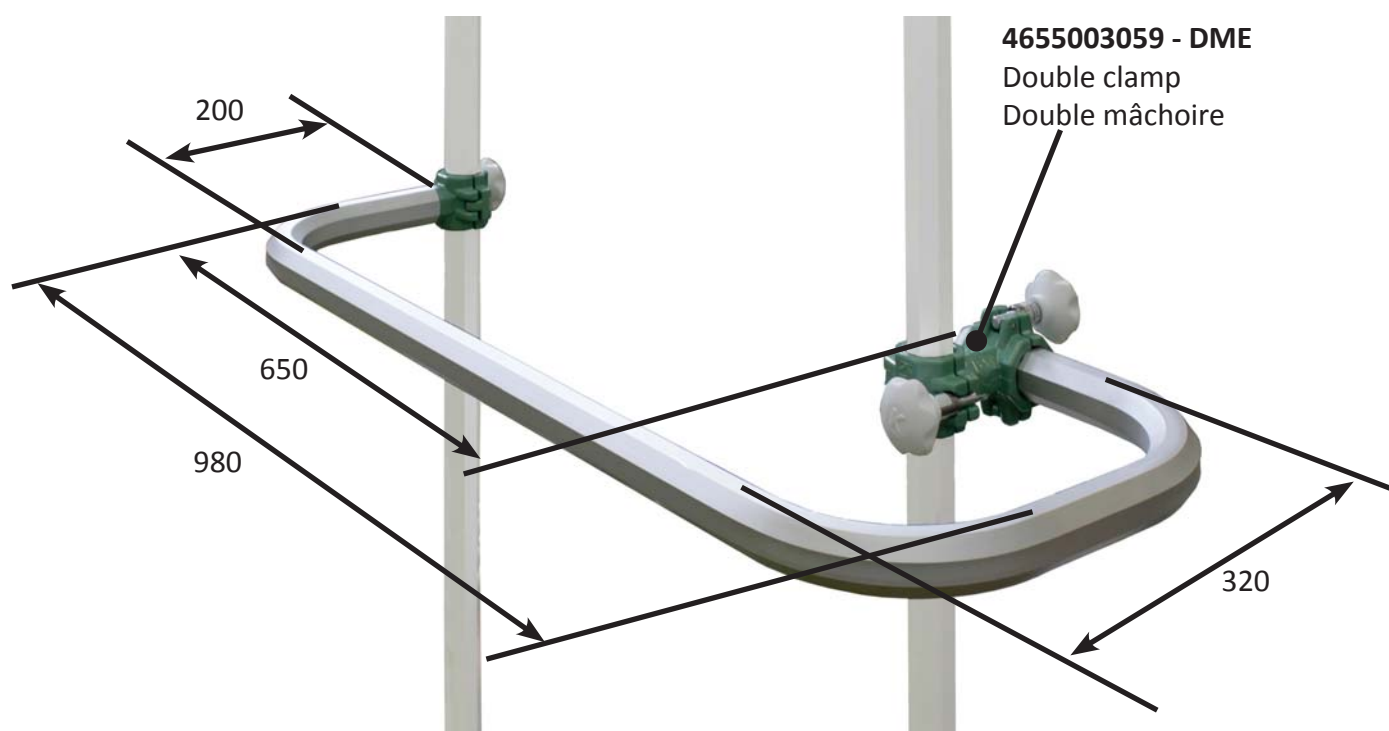

Construit à partir d'un matériau qui allie la résistance et la légèreté, le Système de Traction Kinetec est d'un emploi facile pour tout le personnel soignant.

KINETEC garantit son Système de Traction, 2 ans contre tous vices de fabrication, à partir de la date d'achat par le consommateur.

CE Dispositif médical conforme aux exigences essentielles de la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux de classe I.

Demandez notre catalogue complet d'accessoires et de kits de traction (poids, corde, attelle de positionnement, etc...)


Designed from a material which combines resistance and lightness, the KINETEC TRACTION System is easy to use for all medical staff.

KINETEC guarantees its Traction System 2 years against all defects of manufacture, starting from the date of purchase by the consumer.

CE Medical device conforms to the essential requirements of the directive 93/42/CEE relating to the medical devices of class I.

Ask for our complete catalogue of accessories and traction kits (weights, cord, positioning splints, and more...)

Poulie Double sur Colonne Double pulley on Column

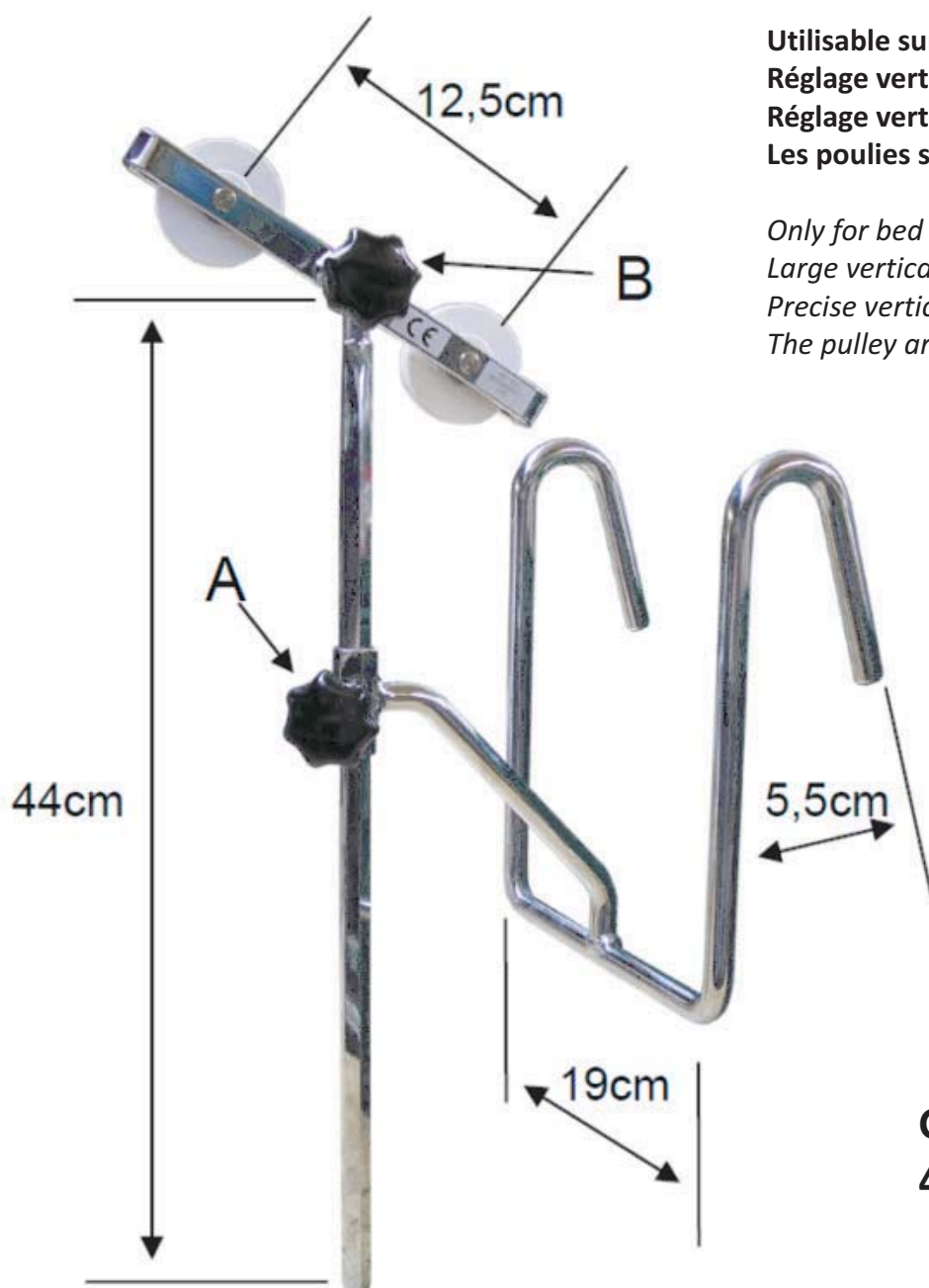

Utilisable sur lit équipé de panneau de pied de lit.
Réglage vertical large (A).
Réglage vertical précis (B).
Les poulies sont de type fermées.


*Only for bed equipped with foot board.
Large vertical adjustment (A).
Precise vertical adjustment (B).
The pulley are closed.*

GRC012
4655000401

Demandez notre catalogue complet d'accessoires et de kits de traction (poids, corde, attelle de positionnement, etc...)


Ask for our complete catalogue of accessories and traction kits (weights, cord, positioning splints, and more...)

Les Pièces du Système - Parts of the System

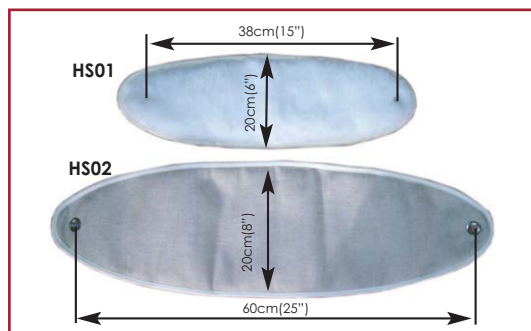


Hamac de Suspension - Hammock

HS01	4650000042	Petit Modèle Small hammock
HS02	4650000050	Grand Modèle Large hammock

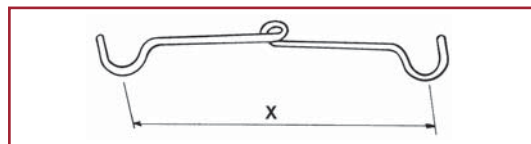

Fléau de Suspension - Spreader Bar


FS01	4655000360	Pour Hamac Petit Modèle, x=18cm For Small Hammock, x=18cm (7")
FS02	4655000378	Pour Hamac Grand Modèle, x=26cm For Large Hammock, x=26cm (10")

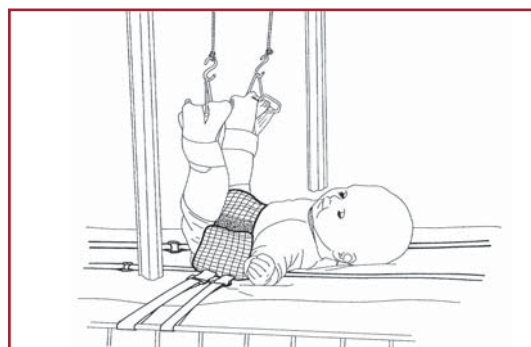

Corset de Maintien - Corset


Ce dispositif permet le maintien d'un enfant de moins de 10 ans pendant sa mise en traction.
This disposal allows the maintain of the child during the traction.

CS1	4650000018	Petit Modèle (de 0 à 2 ans) Small Model (from 0 to 2 years)
CS2	4650000026	Moyen Modèle (de 2 à 3 ans) Medium Model (from 2 to 3 years)
CS3	4650000034	Grand Modèle (de 3 à 10 ans) Large Model (from 3 to 10 years)

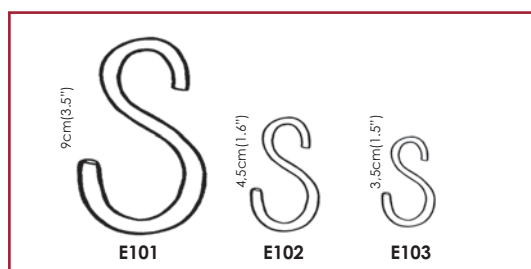

Esses - S-Hooks

E101	4655000295	Grand Modèle - 9cm (jeu de 10) Large - 3.5" (set of 10)
E102	4655000302	Moyen Modèle - 4,5cm (jeu de 10) Medium - 1.6" (set of 10)
E103	4655000310	Petit Modèle - 3.5cm (jeu de 10) Small - 1.5" (set of 10)

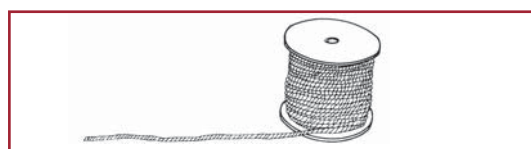

Corde de Traction - Traction Cord

CT100	4655000211	Bobine de 100m Bobbin of 100m (400")
-------	------------	---

Poulie - Pulley



PPO
4655000617

Porte Poulie Ouverte, le montage peut être modifié à tout moment sans démonter la totalité du circuit.

Matière : Aluminium, Acier, Polypropylène.

Open Pulley, position of pulley can be changed without dismantling the frame.

Material: Aluminium, Steel, Polypropylene



PPF
4655000625


Porte Poulie Fermée, système adapté pour les enfants ou les comateux.

Matière : Aluminium, Acier, Polypropylène.

Closed Pulley, specially desogned for childrens, or restless comapatients.

Material: Aluminium, Steel, Polypropylene

Poids maximum de traction :
Maximum traction weight :

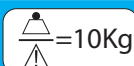

POFM
4655004255

Poulie ouverte fixe sur mâchoire, le montage peut être modifié à tout moment sans démonter la totalité du circuit, la poulie est fixe.

Matière : Aluminium, Acier, Polypropylène.

Fixed open pulley on clamp, position of pulley can be changed without dismantling the frame, the pulley is fixed.

Material: Aluminium, Steel, Polypropylene

Demandez notre catalogue complet d'accessoires et de kits de traction (poids, corde, attelle de positionnement, etc...)

Ask for our complete catalogue of accessories and traction kits (weights, cord, positioning splints, and more...)

Poids - Weights




CP051	4655000188	Colonne porte poids (Acier)	Weight Carrier (Steel)
P1.000	4655000534	Poids de 1.000g (Fonte)	Weight 1.000g (2.2 pounds) (Casting)
P500	4655000526	Poids de 500g (Fonte)	Weight 500g (1.1 pounds) (Casting)
P250	4655000518	Poids de 250g (Fonte)	Weight 250g (0.55 pounds) (Casting)
P5.000	4655000542	Série de poids sur colonne, 5kg Composée de : 1CP051, 2 P250, 3 P500, 3 P1.000	Set of weights 5kg (11 pounds) Composed of: 1CP051, 2 P250, 3 P500, 3 P1.000
P10.000	4655000550	Série de poids sur colonne, 10kg Composée de : 1CP051, 4 P250, 6 P500, 6 P1.000	Set of weights 10kg (22 pounds) Composed of: 1CP051, 4 P250, 6 P500, 6 P1.000


Demandez notre catalogue complet d'accessoires et de kits de traction (poids, corde, attelle de positionnement, etc...)

Ask for our complete catalogue of accessories and traction kits (weights, cord, positioning splints, and more...)


Etrier de Kirschner - Grand modèle • 4665002728 Kirschner Pin holder - Large

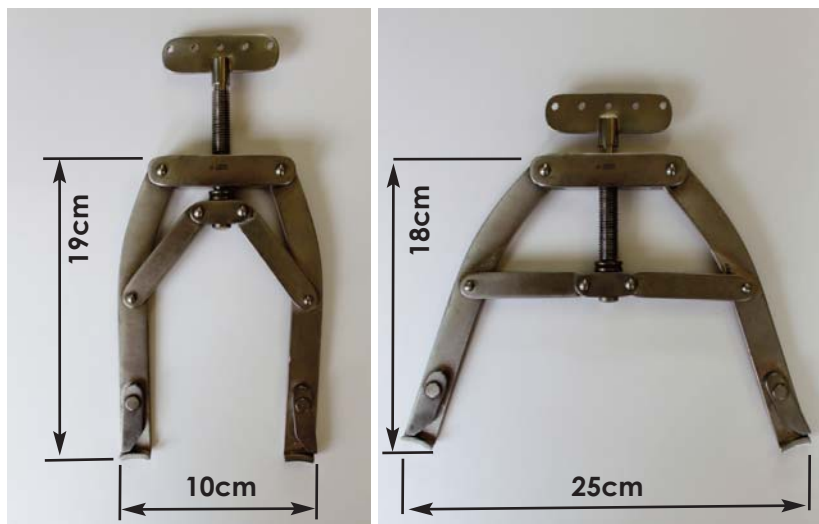

Etrier de Kirschner - Petit modèle • 4665005516 Kirschner Pin holder - Small

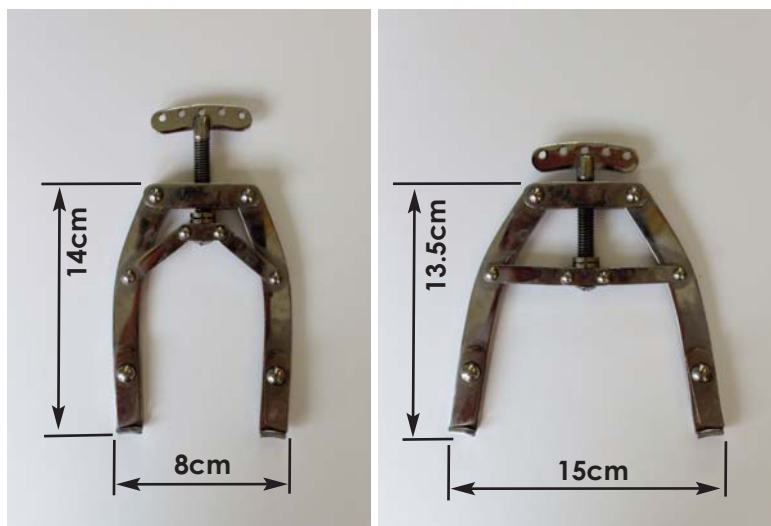

Exemples d'utilisation Examples of set up

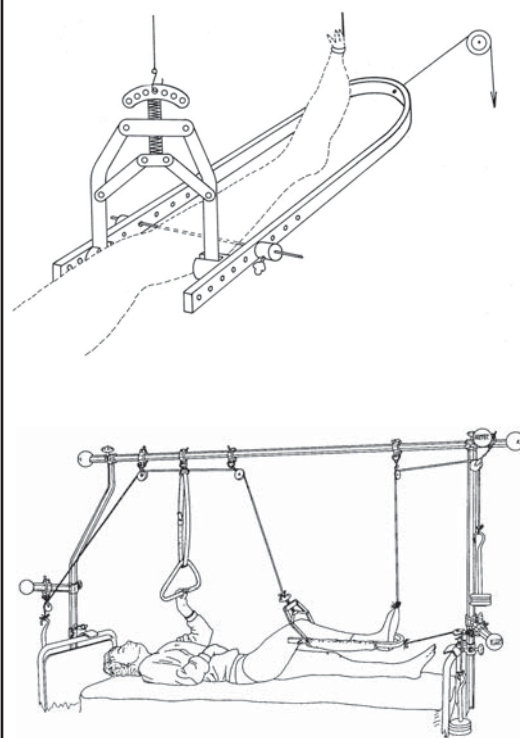

Demandez notre catalogue complet d'accessoires et de kits de traction (poids, corde, attelle de positionnement, etc...)

Ask for our complete catalogue of accessories and traction kits (weights, cord, positioning splints, and more...)

Les Pièces du Système - Parts of the System


Hamac Plevien - Pelvic Sling

Le hamac de suspension pelvienne permet une immobilisation ou stabilisation du rachis.

The pelvic sling allows an immobilisation or a stabilisation of the rachis.

HSP01	4655000451	Hamac de suspension Pelvienne Complet Complete Pelvic Sling
HSP11	4650000068	Manchon de Rechange Exchange pads

Voir chapitre " Kit de traction " pour le kit complet avec poids et accessoires.
See "Traction Sets" Chapter for the complete set with weights and accessories.



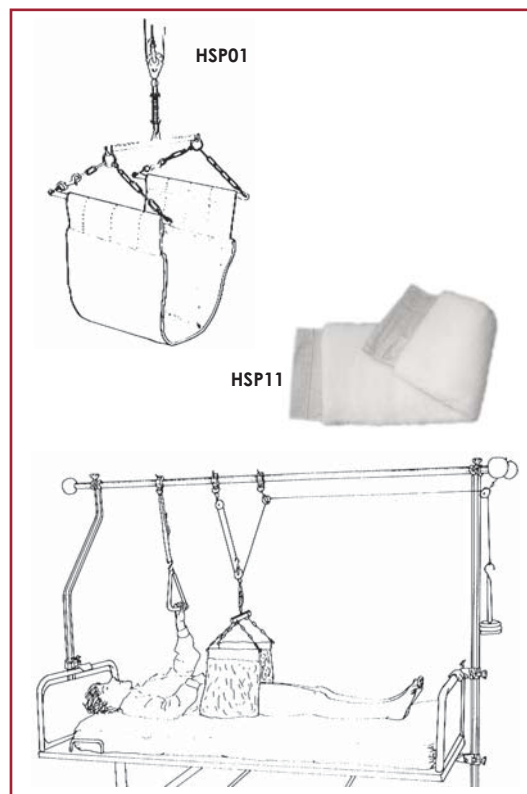


Attelle en " U " - " U " Splint


L'attelle en " U " permet une traction ou une suspension du membre inférieur. Longueur standard de l'attelle 56cm, avec une largeur de 20cm. Chaque élément peut être vendu séparément.

The " U " Splint allows traction or suspension of the inferior limb. Standard length: 56cm (22"), width: 20cm (8"). Each part can be sold separately.

1050	4660000058	Attelle complète avec manchon Complete Splint with pads
1052	4650000232	Manchon de rechange Exchange pads
A	4671000485	Etrier de suspension " U " Splint
B	4671000493	Serre Broche (ø 2,4mm maxi) Pin clamp (ø2.4mm maxi)
C	4625000233	Vis violon Screw
D	4671000500	Support Etrier Staple

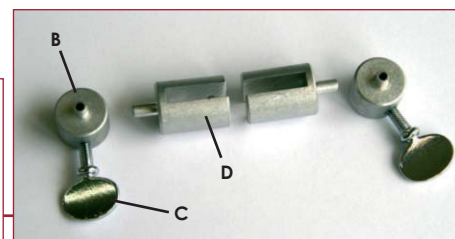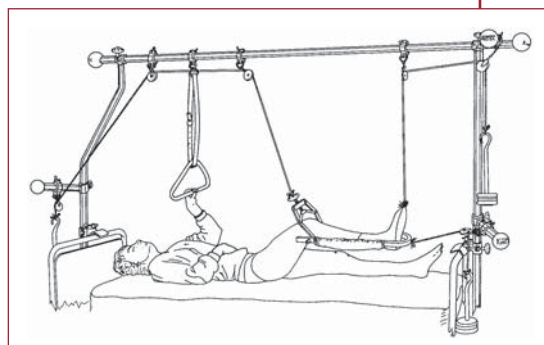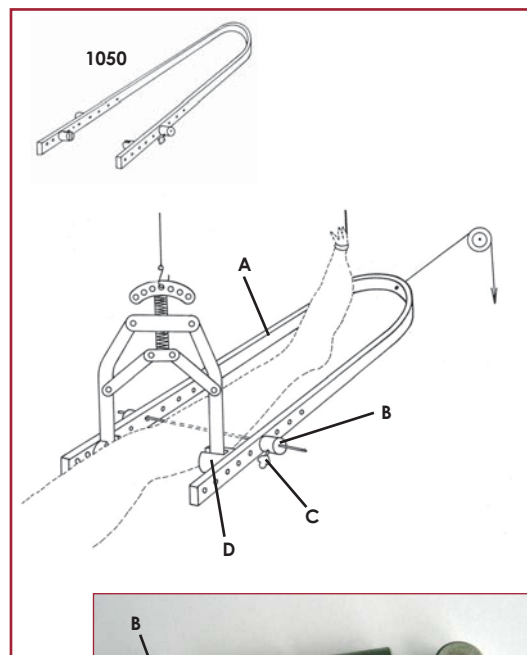

Les Pièces du Système - Parts of the System

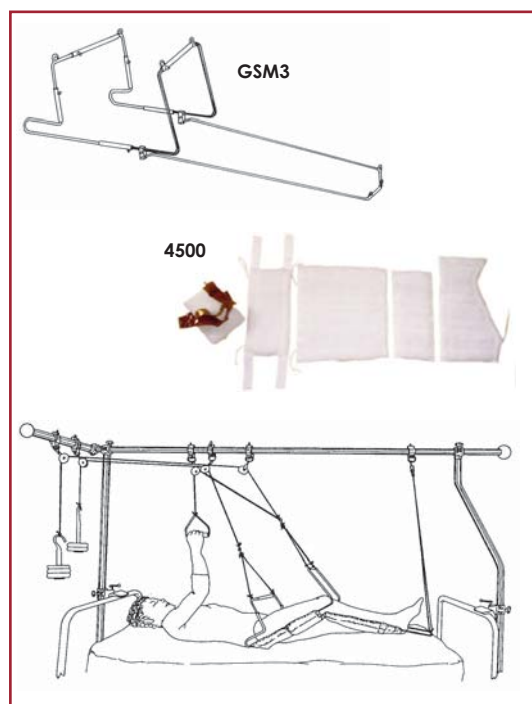


Attelle Articulée - Articulated Splint

L'attelle articulée GSM3 permet la suspension complète du membre inférieur et sa mobilisation. Réglable en longueur et largeur, adaptable pour un membre gauche et droit.

The GSM3 Articulated Splint allows the complete suspension of the inferior limb and its mobilisation. Adjustable in length and width, adaptable for left or right leg.

GSM3	4660000157	Attelle complète avec manchon Complete Splint with pads
4500	4650000357	Manchon de Rechange Exchange pads

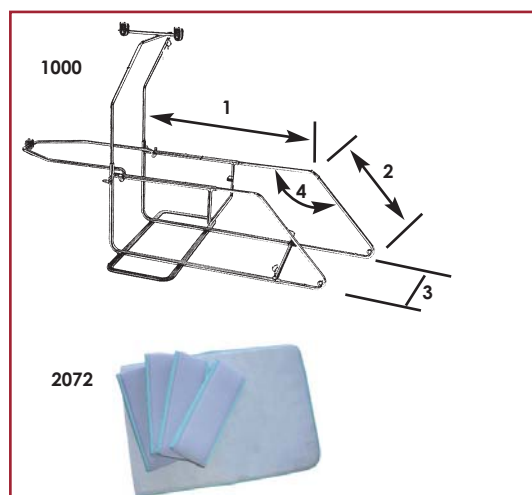

Attelle Autonome - Independent Splint


L'attelle autonome 1000 ou attelle de "Boppe" permet une mise en place rapide de la traction du membre inférieur car ne nécessite pas l'utilisation d'un cadre complet, nous recommandons cette attelle pour de courte durée d'immobilisation (2 à 3 jours).

The Independent Splint or "Boppe" Splint allows a quick set up of the inferior limb traction because it does not require a complete frame; we recommend this splint only for a short immobilisation period (2 to 3 days).

Dimensions - Sizes

1 • Tibia - Tibia	45cm (17.7")
2 • Cuisse - Thigh	30cm (11.8")
3 • Largeur - Width	24cm (9.4")
4 • Angle - Angle	45°

1000	4660000248	Attelle complète avec manchon Complete Splint with pads
2072	4650000274	Manchon de Rechange Exchange pads

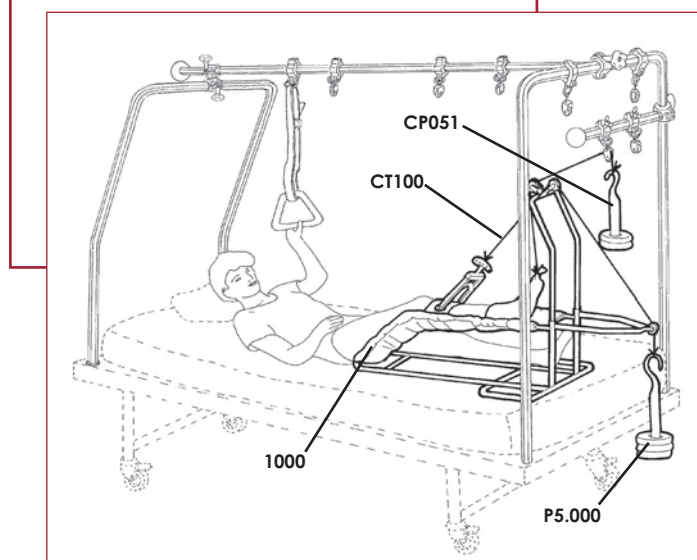

Kit de Traction - Traction Set

Kit 5 • 4655002556

Kit 5	4655002556	Kit complet	Complete set
		Le kit est composé de :	The set consists of these parts:
1000	4660000248	Attelle d'immobilisation du genou (x1)	Knee immobilisation splint (x1)
CT 100	4655000211	Corde de traction (x1)	Traction cord (x1)
P 5.000	4655000542	Ensemble de poids de 5Kg (x1)	Set of weights 5Kgs (11 pounds)
CP 051	4655000188	Colonne porte poids (x1)	Weight carrier (x1)

Les Pièces du Système - Parts of the System

Attelle d'immobilisation - Immobilisation Splint

L'attelle 2060-2064 ou attelle de "Boehler" est une attelle de traction du membre inférieur permettant une grande stabilité et rigueur de positionnement du membre aussi bien dans l'axe du corps que avec une abduction de hanche. Etant suspendue au cadre complet elle facilite les soins de siège et le changement de la literie car rien ne touche le matelas. Livré avec une tube plié à mâchoire fixe de 70 cm.

Nous recommandons ces attelles pour de longue durée d'immobilisation.

Existe en version adulte (2060) et enfant (2064).

Dimensions des l'attelles

	2060 (Adulte)	2064 (Pédiatrique)
1 • Tibia	35 à 53cm	20 à 40cm
2 • Cuisse	26 à 45 cm	18 à 30cm
3 • Largeur	16 à 30cm	11 à 18cm

The splint 2060-2064 or the "Boehler" splint are traction splints of the lower limb allowing a big stability and a precise positioning of the member in the axis of the body as well as an hip abduction.

The complete suspension to the frame facilitates and ease bedding changes as none of the parts are in contact with the mattress. Delivered with a folded tube with a fixed clamp of 70cm (28").

We recommend those splints for a long term immobilisation period.

Available in Paediatric version (2064) and Adult version (2060).


Sizes splints

	2060 (Adult)	2064 (Paediatric)
1 • Tibia	35 to 53cm (14" to 21")	20 to 40cm (8" to 16")
2 • Thigh	26 to 45 cm (10" to 18")	18 to 30cm (7" to 12")
3 • Width	16 to 30cm (6" to 12")	11 to 18cm (4" to 7")

2060 Equi*	4660000280	Attelle Adulte complète avec manchon Complete Adult Splint with pads
2064 Equi*	4660000291	Attelle Pédiatrique complète avec manchon Complete Paediatric Splint with pads
2072	4650000274	Manchon de Rechange pour 2060 et 2064 Exchange pads for 2060 and 2064

Voir chapitre " Kit de traction " pour le kit complet avec poids et accessoires.

See "Traction Sets" Chapter for the complete set with weights and accessories.

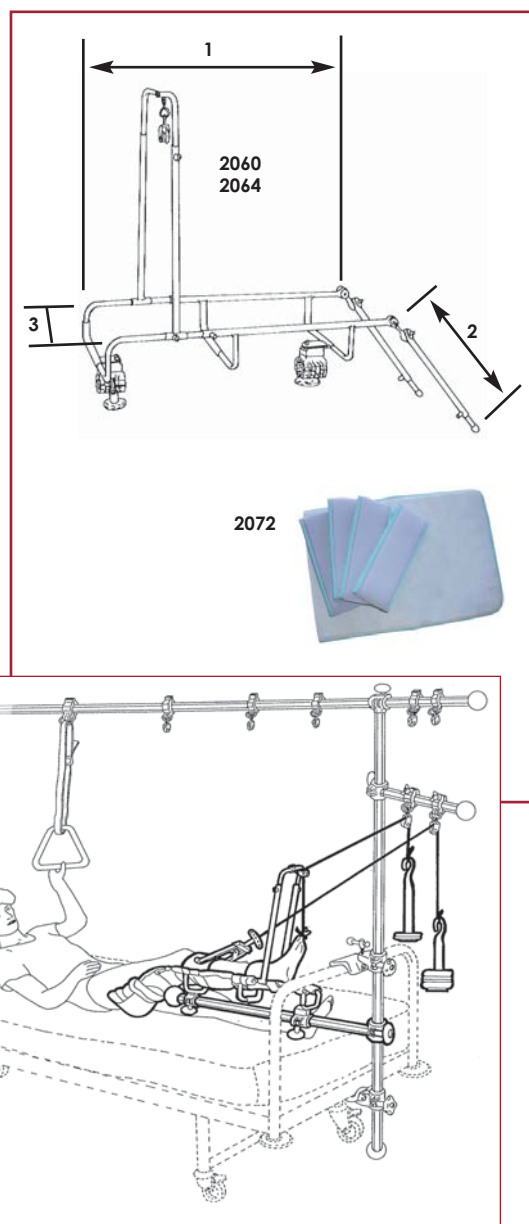


* Sur un lit électrique, utiliser uniquement les éléments Kinetec désignés " Equi ", permettant la continuité de terre.

* On a electrical bed, please use only the Kinetec components describe as "Equi" (Medical Equipment Potential Equalization) allowing the grounding continuity.

Les Montages sur différents lits - Assemblies on various beds

Montage de base sur lit adulte - Universal fixation frame on adult bed

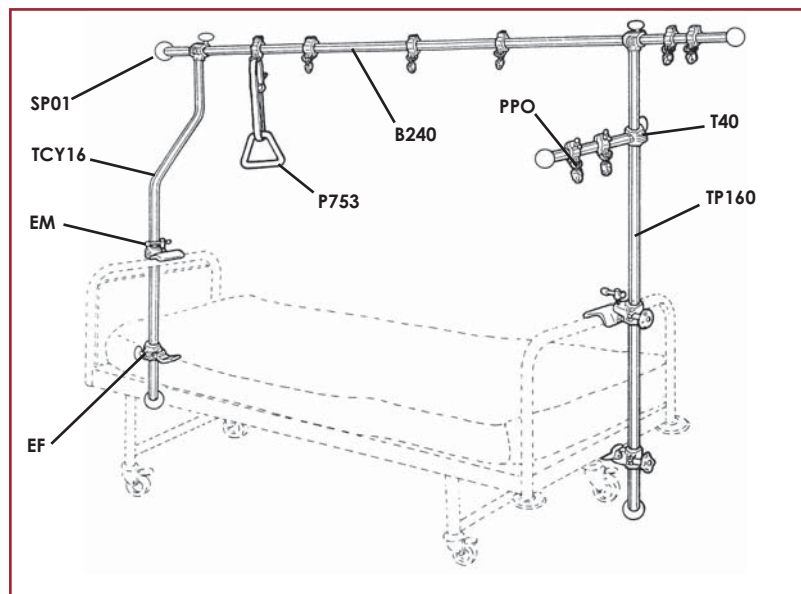


Utilisable sur lit équipé de cintres métalliques en tête et en pied, avec sommier fixe.

Only for bed equipped with steel porch, with fixed frame.

T1 • 4655002564

T1	4655002564	Montage complet	Complete set
		Le cadre est composé de :	The frame consists of these parts:
EM	4655000344	Etau mobile (x2)	Upper clamp (movable) (x2)
EF	4655000328	Etau fixe (x2)	Lower clamp (fixed) (x2)
TCY16	4655000790	Tube en « Col de cygne » à mâchoire pivotante de 160cm (x1)	Swivel clamp offset bar of 160cm (63") (x1)
TP 160	4655000857	Tube droit à mâchoire pivotante de 160cm (x1)	Swivel clamp bar of 160cm (63") (x1)
B240	4655000071	Barre octogonale de 240cm (x1)	Plain bar of 240cm (94") (x1)
T40	4655003067	Tube à mâchoire fixe de 40cm (x1)	Fixed clamp bar of 40cm (16") (x1)
P753	4655000948	Etrier de traction (x1)	Handgrip (x1)
PPO	4655000617	Porte poulie ouverte (x7)	Opened pulley (x7)
SP01	4635001304	Sphère de protection (x5)	Wall protection cushion (x5)

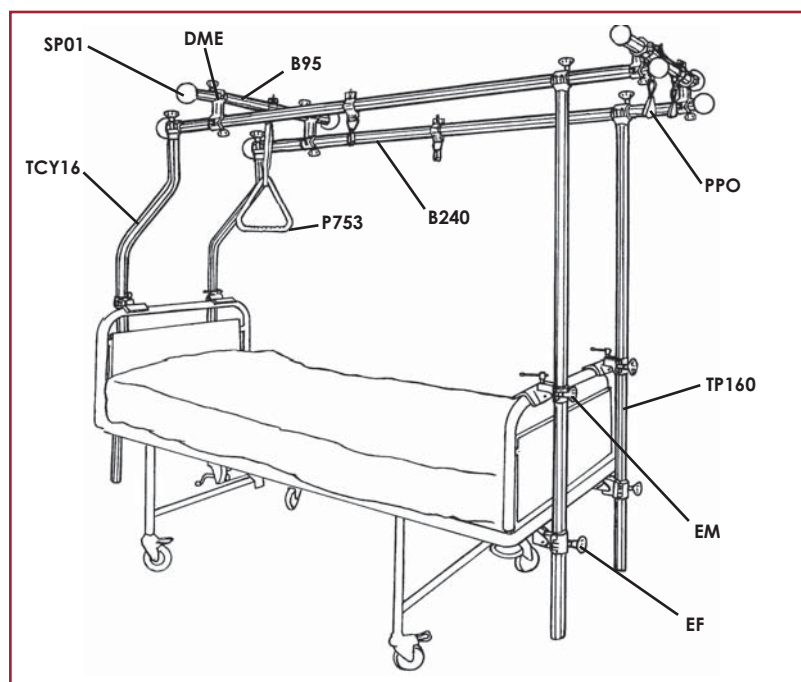

Balkan • 4655001772

BALKAN	4655001772	Montage complet Balkan	Complete set Balkan
		Le cadre est composé de :	The frame consists of these parts:
EM	4655000344	Etau mobile (x4)	Upper clamp (x4)
EF	4655000328	Etau fixe (x4)	Lower clamp (x4)
TCY16	4655000790	Tube en « col de cygne » de 160cm à mâchoire (x2)	Swivel clamp offset bar of 160cm (63") (x2)
TP160	4655000857	Tube droit de 160cm à mâchoire pivotante (x2)	Straight bar with swivel clamp 16cm (63") (x2)
B240	4655000071	Barre octogonale de 240cm (x2)	Plain bar of 240cm (94") (x2)
DME	4655000261	Double mâchoire (x4)	Double fixed clamp (x4)
B95	4655000039	Barre octogonale de 95cm (x2)	Octagonal bar of 95cm (37") (x2)
P 753	4655000948	Etrier de traction (x1)	Handgrip (x1)
SP 01	4635001304	Sphère de protection (x8)	Wall protection cushion (x8)
PPO	4655000617	Porte poulie ouverte (x4)	Open pulley with clamp (x4)


Les Montages sur différents lits - Assemblies on various beds

Montage parcellaire sur lit adulte - Partial assembling on adult bed

Utilisable sur lit équipé de cintres métalliques en tête et en pied, avec sommier fixe.


Only for bed equipped with steel porch, with fixed frame.

MP1 • 4655001821

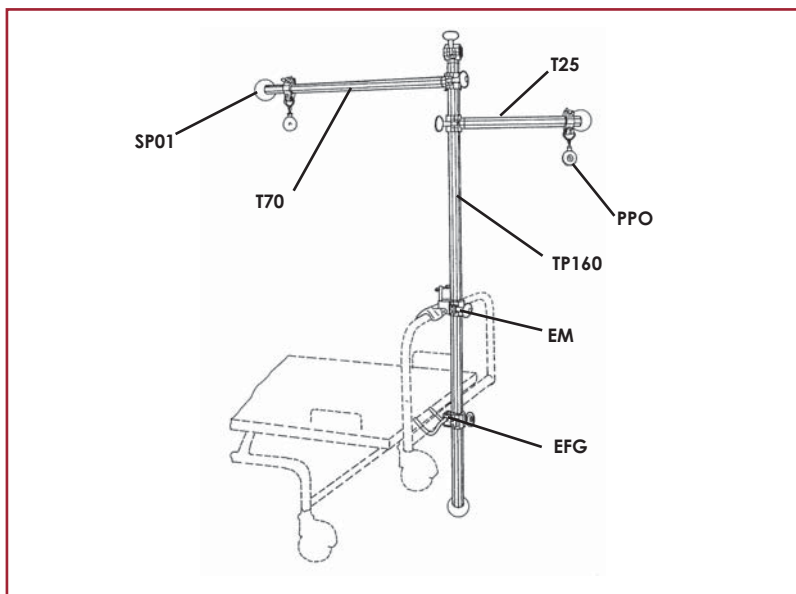

MP1	4655001821	Montage parcellaire tête de lit	Assembling in head bed
		Le cadre est composé de :	The frame consists of these parts:
EM	4655000344	Etau mobile (x1)	Upper clamp (x1)
EFG	4655000336	Etau fixe à griffe (x1)	Lower clamp with special laws (x1)
TP160	4655000857	Tube droit de 160cm à mâchoire pivotante (x1)	Straight bar with swivel clamp 16cm (63'') (x1)
T70 Equi	4655003207	Tube droit à mâchoire de 70cm (x1)	Fixed clamp bar of 70cm (28'') (x1)
T25 Equi	4655003083	Tube droit à mâchoire de 25cm (x1)	Fixed clamp bar of 25cm (10'') (x1)
SP 01	4635001304	Sphère de protection (x3)	Wall protection cushion (x3)
PPO	4655000617	Porte poulie ouverte (x2)	Open pulley with clamp (x2)


MP3 • 4655002647

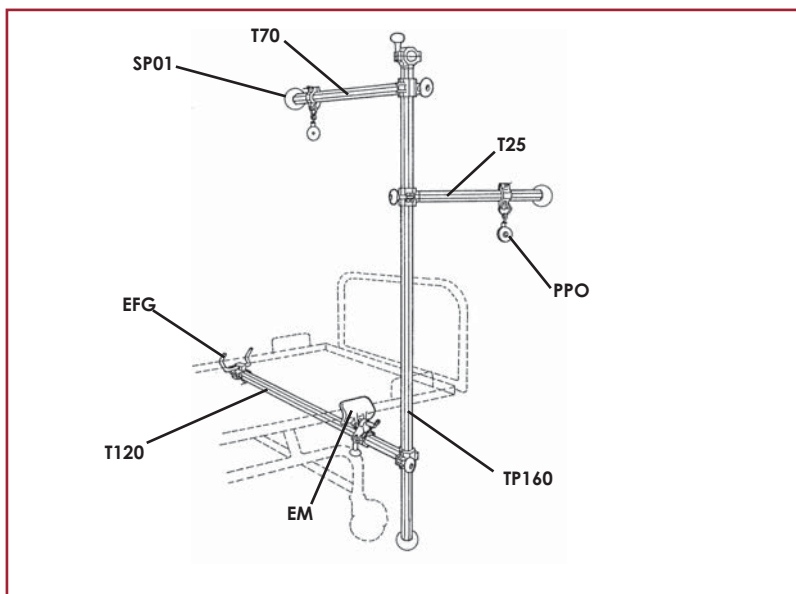

MP3	4655002647	Montage parcellaire transversal au lit	Assembling in transversal of the bed
		Le cadre est composé de :	The frame consists of these parts:
EM	4655000344	Etau mobile (x1)	Upper clamp (x1)
EFG	4655000336	Etau fixe à griffe (x1)	Lower clamp with special laws (x1)
T120	4655000782	Tube droit à mâchoire de 120cm (x1)	Fixed clamp bar of 120cm (47'') (x1)
TP160	4655000857	Tube droit de 160cm à mâchoire pivotante (x1)	Straight bar with swivel clamp 16cm (63'') (x1)
T70 Equi	4655003207	Tube droit à mâchoire de 70cm (x1)	Fixed clamp bar of 70cm (28'') (x1)
T25 Equi	4655003083	Tube droit à mâchoire de 25cm (x1)	Fixed clamp bar of 25cm (10'') (x1)
SP 01	4635001304	Sphère de protection (x3)	Wall protection cushion (x3)
PPO	4655000617	Porte poulie ouverte (x2)	Open pulley with clamp (x2)

Les Montages sur différents lits - Assemblies on various beds


Montage de base sur lit pédiatrique - Universal fixation frame on paediatric bed

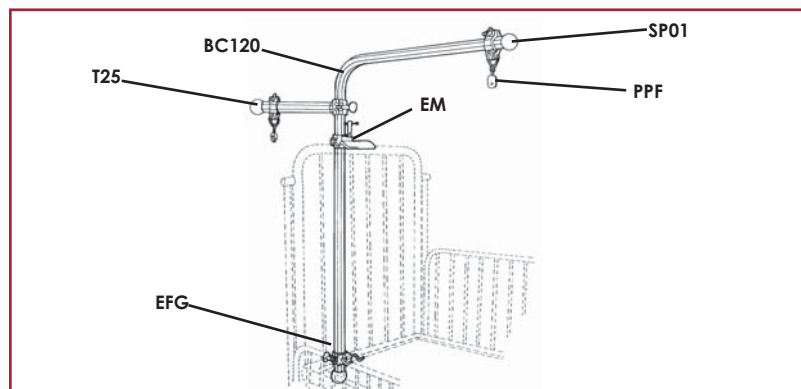

Potence pour traction au zénith des fractures fémorales de l'enfant.
For traction of femoral fractures in children.

CP2 • 4655001756

CP2	4655001756	Montage complet	Complete set
		Le cadre est composé de :	The frame consists of these parts:
EM	4655000344	Etau mobile (x1)	Upper clamp (movable) (x1)
EFG	4655000336	Etau fixe à griffe (x1)	Lower clamp with special laws (x1)
BC 120	4655000097	Barre coude de 120cm (x1)	"L" Shaped bar 120cm (47") (x1)
T25 Equi	4655003083	Tube droit à mâchoire de 25cm (x1)	Fixed clamp bar of 25cm (10") (x1)
PPF	4655000425	Porte poulie fermée (x2)	Closed pulley (x2)
SP01	4635001304	Sphère de protection (x3)	Wall protection cushion (x3)

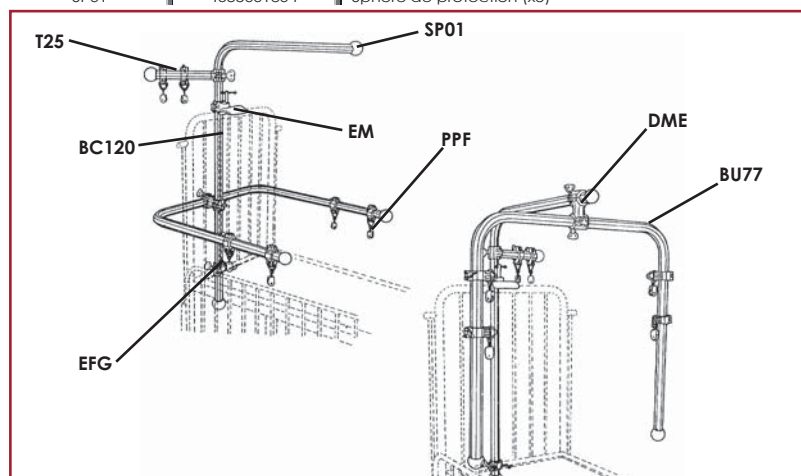

Potence bilatérale pour abduction-dérotation des luxations congénitales de hanche.
Bilateral pulling force for abduction-derotation of congenital dislocation of the hip.

CP3 • 4655001839

CP3	4655001839	Montage complet	Complete set
		Le cadre est composé de :	The frame consists of these parts:
EM	4655000344	Etau mobile (x1)	Upper clamp (movable) (x1)
EFG	4655000336	Etau fixe à griffe (x1)	Lower clamp with special laws (x1)
BC 120	4655000097	Barre coude de 120cm (x1)	"L" Shaped bar 120cm (47") (x1)
DME	4655000261	Double mâchoire (x1)	Double fixed clamp (x1)
BU77	4655000120	Barre en « U » de 77x80cm (x1)	"U" shaped bar 77x80cm (30x32") (x1)
T25 Equi	4655003083	Tube droit à mâchoire de 25cm (x1)	Fixed clamp bar of 25cm (10") (x1)
PPF	4655000425	Porte poulie fermée (x6)	Closed pulley (x6)
SP01	4635001304	Sphère de protection (x5)	Wall protection cushion (x5)



Potence bilatérale pour abduction-dérotation des luxations congénitales de hanche.
Bilateral pulling force for abduction-derotation of congenital dislocation of the hip.

T-Maximo • 4655004057


T-Maximo	4655004057	Montage complet	Complete set
		Le cadre est composé de :	The frame consists of these parts:
EF Stiegel	4655003570	Etau fixe spécial Stiegelmeier (x1)	Stiegelmeier lower clamp (x1)
EM Stiegel	4655003562	Etau mobile spécial Stiegelmeier (x1)	Stiegelmeier upper clamp (x1)
DME	4655000261	Double mâchoires (x1)	Double clamp (x1)
BC 120	4655000097	Barre cintrée de 120cm (x1)	"L" shaped bar of 120cm (47") (x1)
BU 85	4655003588	Barre en « U » (x1)	"U" shaped bar (x1)
T 40 Equi	4655003067	Tube à mâchoire fixe de 40cm (x2)	Fixed clamp bar of 40cm (16") (x2)
SP 01	4635001304	Sphère de protection (x5)	Wall protection cushion (x5)
PPO	4655000617	Porte poulie ouverte (x5)	Open pulley with clamp (x5)

Kit 1 - A Equi • 4655003108

Kit 1 - E Equi • 4655003116

Traction / Suspension du membre inférieur

Traction / Suspension of inferior limb

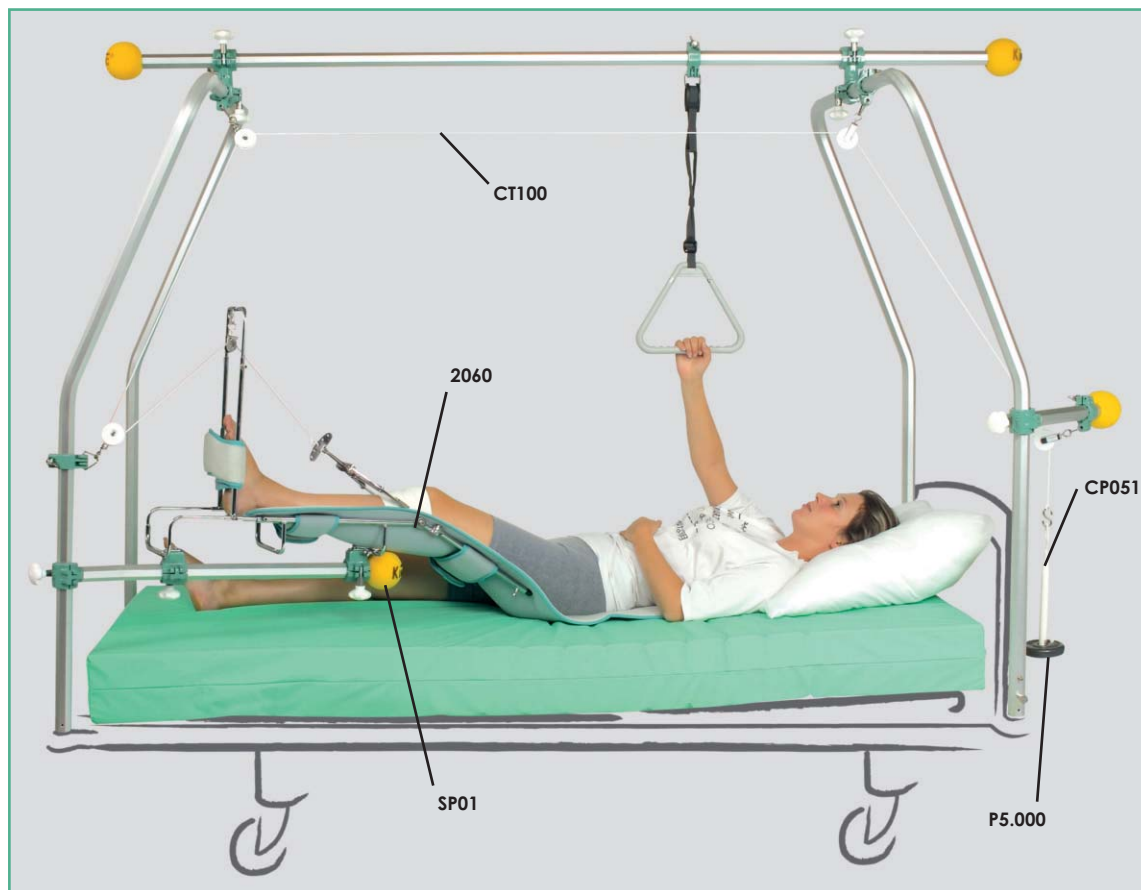

Exemple de montage.
Example of setup.

Kit 1 A Equi	4655003108	Kit complet pour Adulte	Complete set for Adult
		Le kit est composé de :	The set consists of these parts:
2060 Equi	4660000280	Attelle d'immobilisation du genou (x1)	Knee immobilisation splint (x1)
CT 100	4655000211	Corde de traction (x1)	Traction cord (x1)
P 5.000	4655000542	Ensemble de poids de 5Kg (x1)	Set of weights 5Kgs (11 pounds)
CP 051	4655000188	Colonne porte poids (x1)	Weight carrier (x1)
SP 01	4635001304	Sphère de protection (x1)	Wall protection cushion (x1)
Kit 1 E Equi	4655003116	Kit complet pour Enfant	Complete set for Children
		Le kit est composé de :	The set consists of these parts:
2064 Equi	4660000291	Attelle d'immobilisation du genou (x1)	Knee immobilisation splint (x1)
CT 100	4655000211	Corde de traction (x1)	Traction cord (x1)
P 5.000	4655000542	Ensemble de poids de 5Kg (x1)	Set of weights 5Kgs (11 pounds)
CP 051	4655000188	Colonne porte poids (x1)	Weight carrier (x1)
SP 01	4635001304	Sphère de protection (x1)	Wall protection cushion (x1)

Construit à partir d'un matériau qui allie la résistance et la légèreté, le Système de Traction Kinetec est d'un emploi facile pour tout le personnel soignant.

Designed from a material which combines resistance and lightness, the KINETEC TRACTION System is easy to use for all medical staff.

KINETEC garantit son Système de Traction, 2 ans contre tous vices de fabrication, à partir de la date d'achat par le consommateur.

KINETEC guarantees its Traction System 2 years against all defects of manufacture, starting from the date of purchase by the consumer.

CE Dispositif médical conforme aux exigences essentielles de la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux de classe I.


CE Medical device conforms to the essential requirements of the directive 93/42/CEE relating to the medical devices of class I.

Demandez notre catalogue complet d'accessoires et de kits de traction (poids, corde, attelle de positionnement, etc...)

Ask for our complete catalogue of accessories and traction kits (weights, cord, positioning splints, and more...)

Kit 6 Equi • 4655003596


Traction / Suspension du membre inférieur
Traction / Suspension of inferior limb

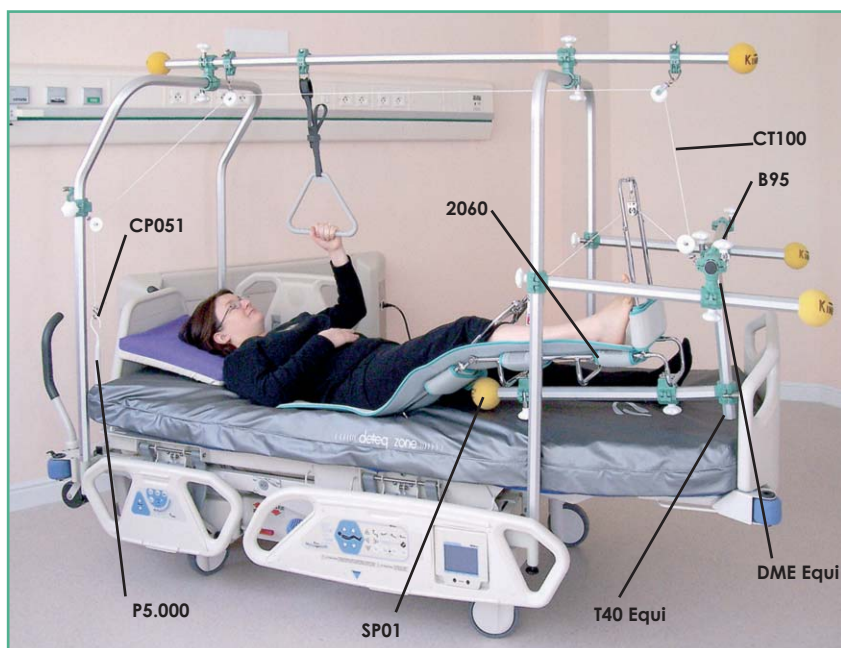

Avec positionnement d'une attelle 2060 pour une Abduction de hanche à 0° (sur cadre avec portique).

With positioning of a splint 2060 for an Abduction of hip with 0° (on frame with porch)

Exemple de montage sur lit TotalCare.
Example of setup on TotalCare bed.

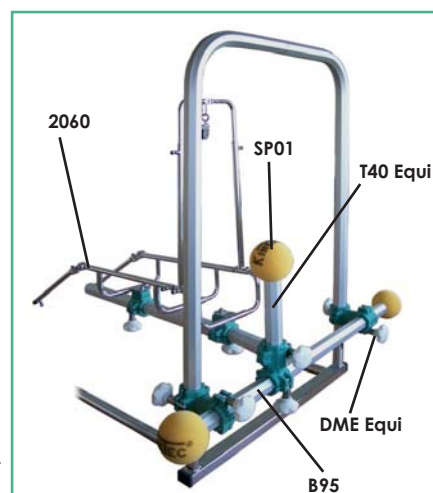

Exemple de montage sur cadre de démonstration.
Example of setup on demo traction frames.

Kit 6 Equi	4655003596	Kit complet	Complete set
		Le kit est composé de :	The set consists of these parts:
2060 Equi	4660000280	Attelle d'immobilisation du genou (x1)	Knee immobilisation splint (x1)
DME Equi	4655003059	Double mâchoire (x2)	Double clamp (x2)
T 40 Equi	4655003067	Tube à mâchoire fixe de 40cm (x1)	Fixed clamp bar of 40cm (16") (x1)
B95	4655000039	Barre de 95cm (x1)	Bar 95cm (37") (x1)
CT 100	4655000211	Corde de traction (x1)	Traction cord (x1)
P 5.000	4655000542	Ensemble de poids de 5Kg (x1)	Set of weights 5Kgs (11 pounds)
CP 051	4655000188	Colonne porte poids (x1)	Weight carrier (x1)
SP 01	4635001304	Sphère de protection (x1)	Wall protection cushion (x1)

Construit à partir d'un matériau qui allie la résistance et la légèreté, le Système de Traction Kinetec est d'un emploi facile pour tout le personnel soignant.

Designed from a material which combines resistance and lightness, the KINETEC TRACTION System is easy to use for all medical staff.

KINETEC garantit son Système de Traction, 2 ans contre tous vices de fabrication, à partir de la date d'achat par le consommateur.

KINETEC guarantees its Traction System 2 years against all defects of manufacture, starting from the date of purchase by the consumer.

CE Dispositif médical conforme aux exigences essentielles de la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux de classe I.


CE Medical device conforms to the essential requirements of the directive 93/42/CEE relating to the medical devices of class I.

Demandez notre catalogue complet d'accessoires et de kits de traction (poids, corde, attelle de positionnement, etc...)

Ask for our complete catalogue of accessories and traction kits (weights, cord, positioning splints, and more...)

Kit 3 • 4655002530

Suspension pelvienne
Pelvic suspension

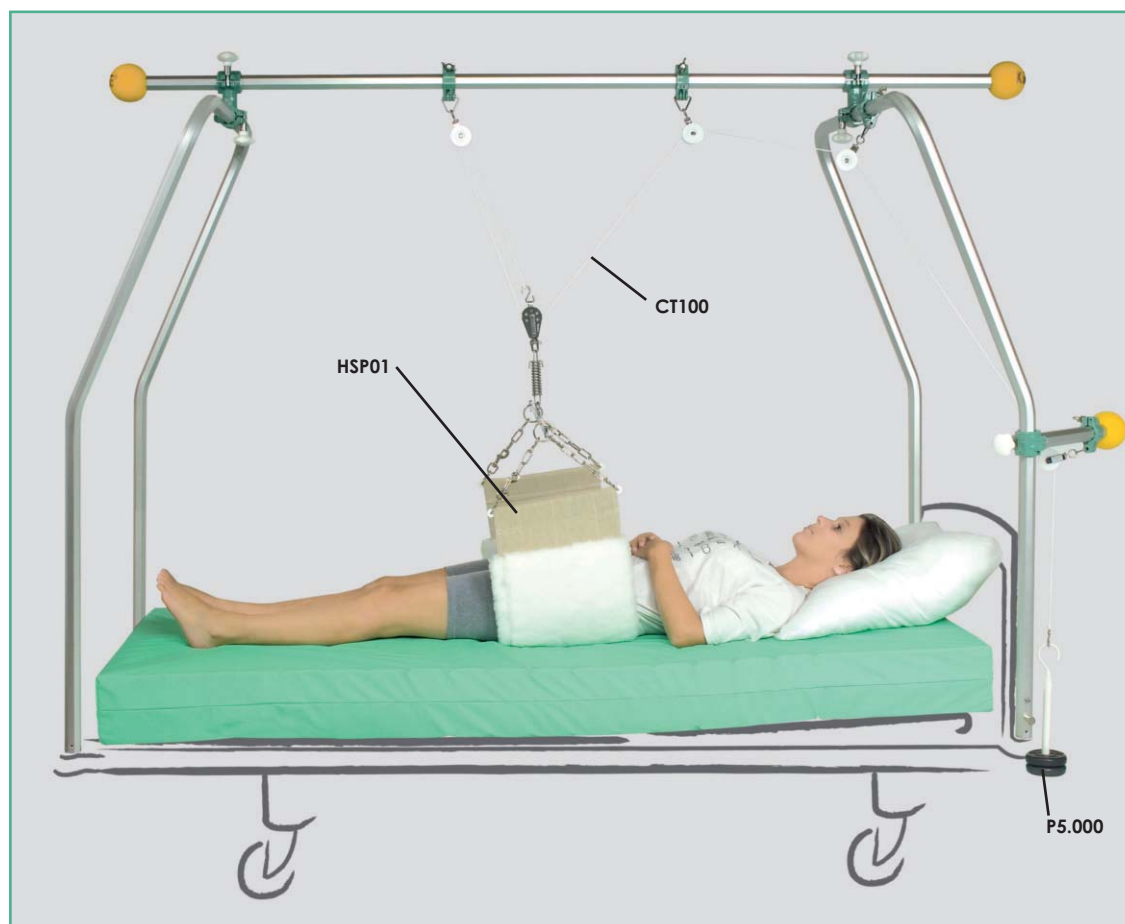

Exemple de montage.
Example of setup.

Kit 3	4655002530	Kit complet	Complete set
		Le kit est composé de :	The set consists of these parts:
HSP01	4655000451	Hamac de suspension pelvienne (x1)	Compleat pelvic sling (x1)
HSP11	4650000065	Manchon de rechange (option)	Exchange pads (optional)
CT 100	4655000211	Corde de traction (x1)	Traction cord (x1)
P 5.000	4655000542	Ensemble de poids de 5Kg (x1)	Set of weights 5Kgs (11 pounds)

Construit à partir d'un matériau qui allie la résistance et la légèreté, le Système de Traction Kinetec est d'un emploi facile pour tout le personnel soignant.

KINETEC garantit son Système de Traction, 2 ans contre tous vices de fabrication, à partir de la date d'achat par le consommateur.



Dispositif médical conforme aux exigences essentielles de la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux de classe I.

Demandez notre catalogue complet d'accessoires et de kits de traction (poids, corde, attelle de positionnement, etc...)

Designed from a material which combines resistance and lightness, the KINETEC TRACTION System is easy to use for all medical staff.

KINETEC guarantees its Traction System 2 years against all defects of manufacture, starting from the date of purchase by the consumer.




Medical device conforms to the essential requirements of the directive 93/42/CEE relating to the medical devices of class I.

Ask for our complete catalogue of accessories and traction kits (weights, cord, positioning splints, and more...)

Kit 2 Equi • 4655003124

Traction / Suspension du membre supérieur
Traction / Suspension of superior limb

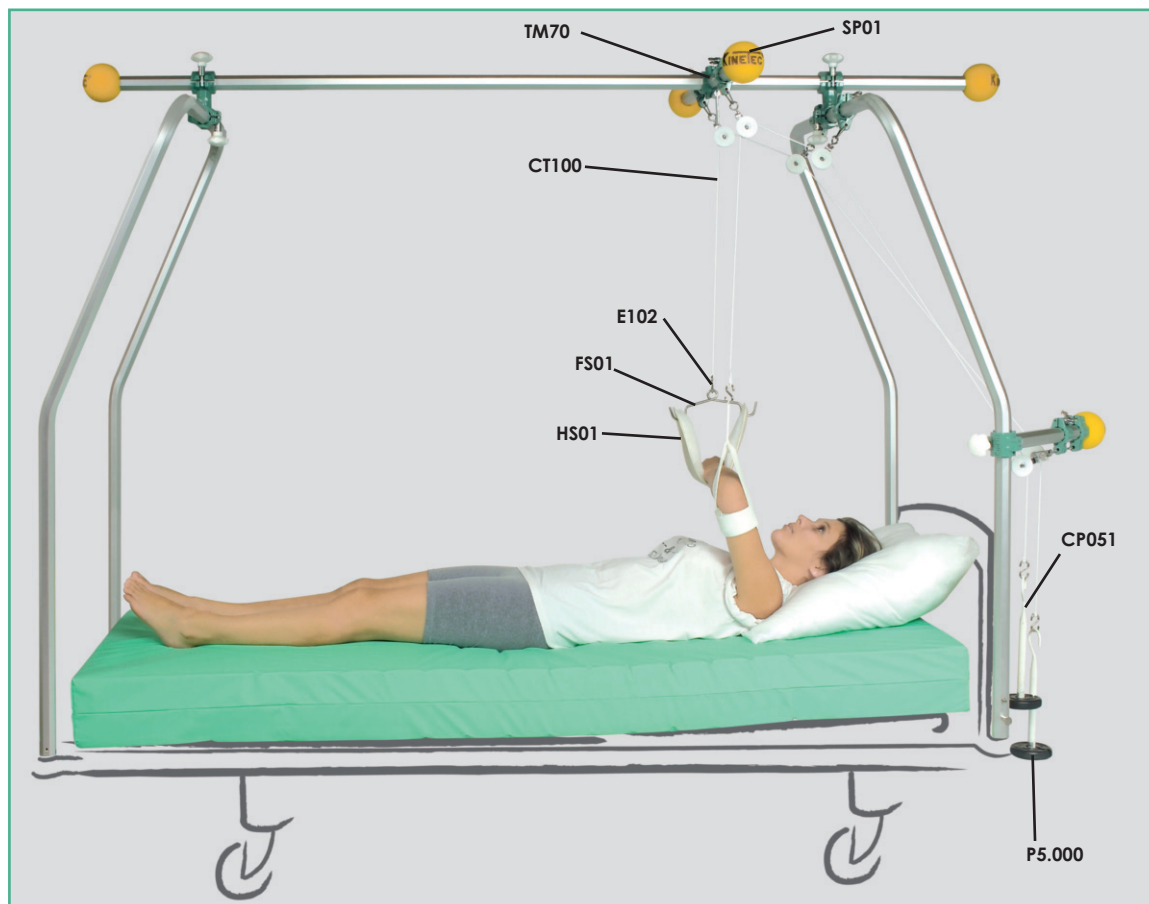

Exemple de montage.
Example of setup.

Kit 2 Equi	4655003124	Kit complet	Complete set
		Le kit est composé de :	The set consists of these parts:
HS 01	4650000042	Hamac de suspension petit modèle (x1)	Small hammock (x1)
FS 01	4655000360	Fléau de suspension petit modèle (x1)	Small spreader bar (x1)
E 102	4655000302	Lot de 10 eses moyen modèle (x1)	Set of ten medium S-hooks (x1)
CT 100	4655000211	Corde de traction (x1)	Traction cord (x1)
TM 70 Equi	4655003158	Tube de 2x35cm à mâchoire centrale (x1)	Center clamp bar of 2x35cm (14") (x1)
P 5.000	4655000542	Ensemble de poids de 5Kg (x1)	Set of weights 5Kgs (11 pounds)
CP 051	4655000188	Colonne porte poids (x1)	Weight carrier (x1)
SP 01	4635001304	Sphère de protection (x2)	Wall protection cushion (x2)

Construit à partir d'un matériau qui allie la résistance et la légèreté, le Système de Traction Kinetec est d'un emploi facile pour tout le personnel soignant.

KINETEC garantit son Système de Traction, 2 ans contre tous vices de fabrication, à partir de la date d'achat par le consommateur.

CE Dispositif médical conforme aux exigences essentielles de la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux de classe I.

Demandez notre catalogue complet d'accessoires et de kits de traction (poids, corde, attelle de positionnement, etc...)

Designed from a material which combines resistance and lightness, the KINETEC TRACTION System is easy to use for all medical staff.


KINETEC guarantees its Traction System 2 years against all defects of manufacture, starting from the date of purchase by the consumer.

CE Medical device conforms to the essential requirements of the directive 93/42/CEE relating to the medical devices of class I.

Ask for our complete catalogue of accessories and traction kits (weights, cord, positioning splints, and more...)

Kit 4 • 4655002548

Traction cervicale
Cervical traction

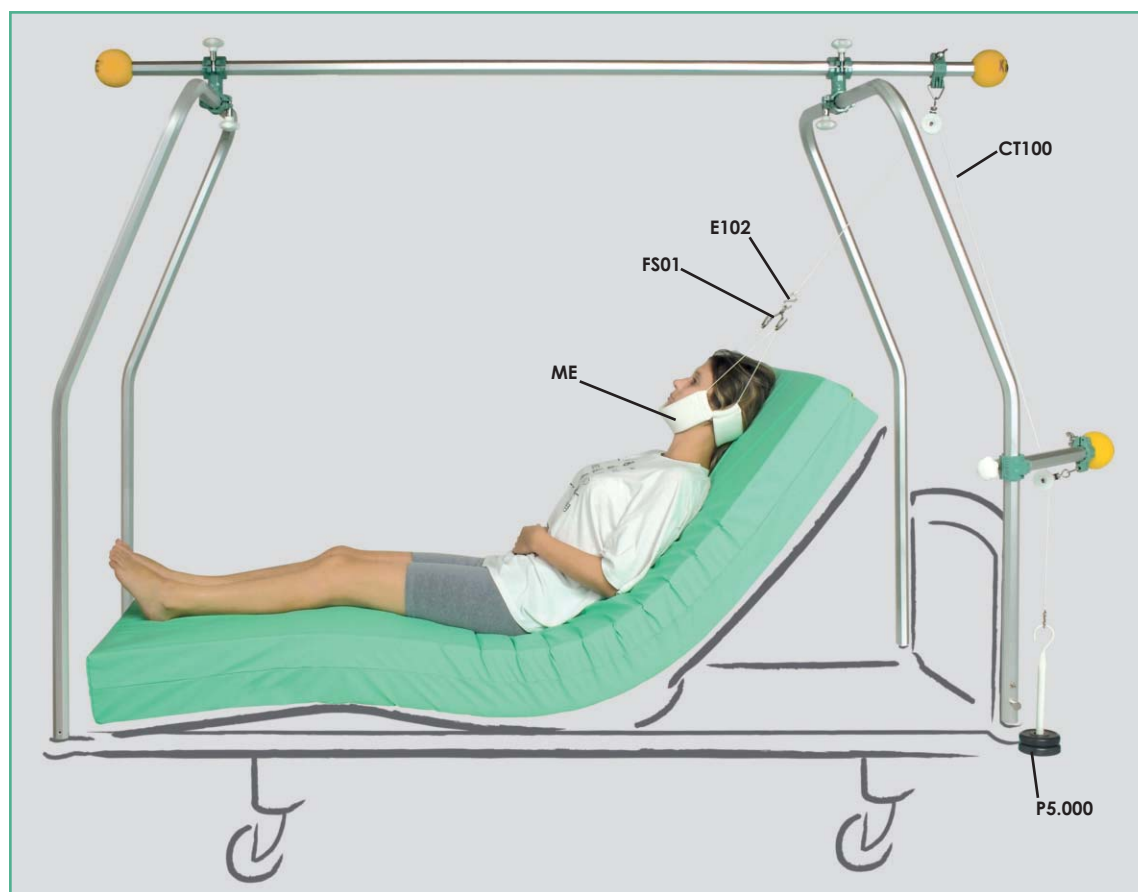

Exemple de montage.
Example of setup.

Kit 4	4655002548	Kit complet	Complete set
		Le kit est composé de :	The set consists of these parts:
ME	4650000117	Mentonnière (x1)	Cervical collar (x1)
FS 01	4655000360	Fléau de suspension petit modèle (x1)	Small spreader bar (x1)
E 102	4655000302	Lot de 10 eses moyen modèle (x1)	Set of ten medium S-hooks (x1)
CT 100	4655000211	Corde de traction (x1)	Traction cord (x1)
P 5.000	4655000542	Ensemble de poids de 5Kg (x1)	Set of weights 5Kgs (11 pounds)

Construit à partir d'un matériau qui allie la résistance et la légèreté, le Système de Traction Kinetec est d'un emploi facile pour tout le personnel soignant.

KINETEC garantit son Système de Traction, 2 ans contre tous vices de fabrication, à partir de la date d'achat par le consommateur.



Dispositif médical conforme aux exigences essentielles de la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux de classe I.

Demandez notre catalogue complet d'accessoires et de kits de traction (poids, corde, attelle de positionnement, etc...)

Designed from a material which combines resistance and lightness, the KINETEC TRACTION System is easy to use for all medical staff.

KINETEC guarantees its Traction System 2 years against all defects of manufacture, starting from the date of purchase by the consumer.



Medical device conforms to the essential requirements of the directive 93/42/CEE relating to the medical devices of class I.

Ask for our complete catalogue of accessories and traction kits (weights, cord, positioning splints, and more...)


T7 V2 • 4655004130

Montage complet sur Lit Hill-Rom 405
Compleat set on Hill-Rom 405 bed

Adaptation spéciale pour lit :
Special Adaptation for bed:

Hill-Rom

H-R 405

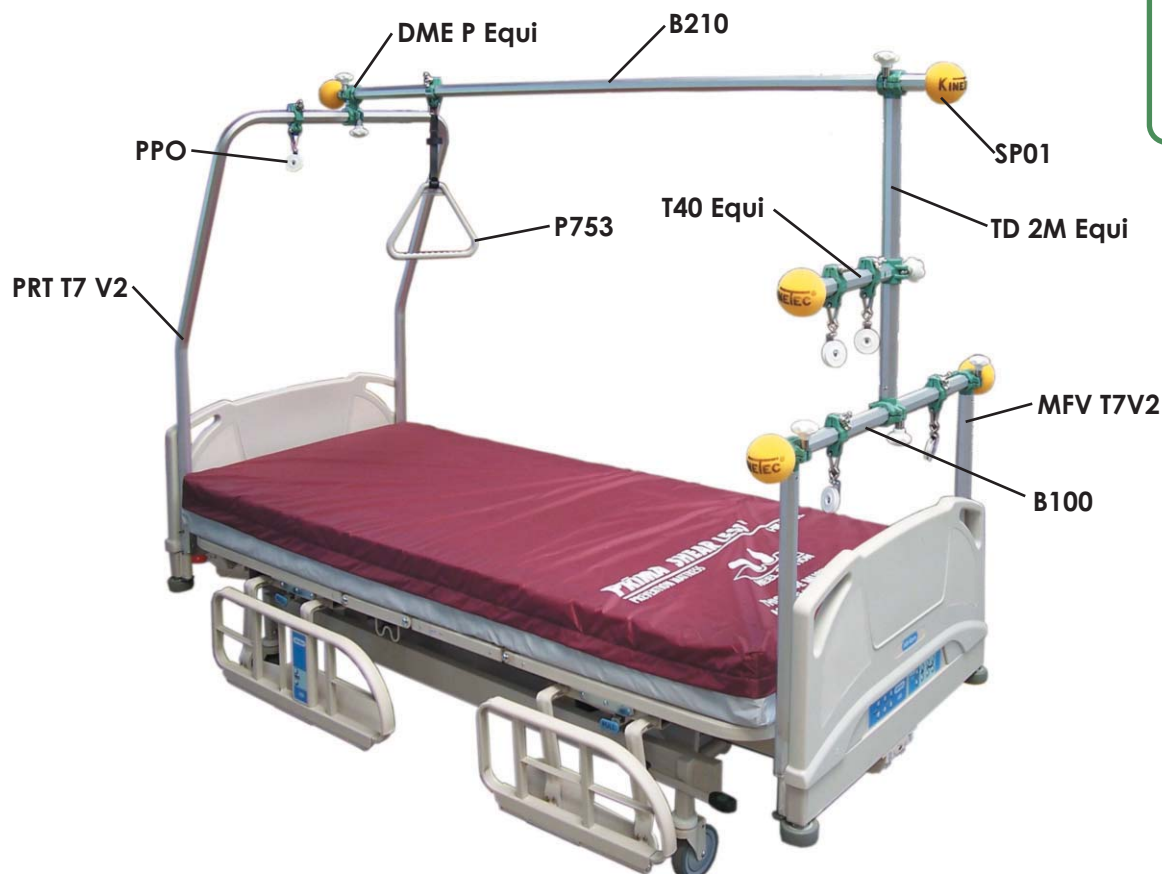

T7 V2 4655004130 Montage complet Complete set

Le cadre est composé de : The frame consists of these parts:

PRT T7 V2..... 4655004156		Portique Tête de lit Hill-Rom 405 (x1)		Head porch bar for Hill-Rom 405 (x1)
MFV T7V2 4655004148		Mâchoire à fiche lit Hill-Rom 405 (x2)		Upright bar for Hill-Rom 405 (x2)
B100..... 4655003687		Barre Octogonale de 100cm (x1)		Bar of 100cm (39") (x1)
TD 2M Equi 4670014726		Tube à deux mâchoires Hill-Rom 405 (x1)		Double clamp bar for Hill-Rom 405 (x1)
B210..... 4655000055		Barre octogonale de 210 cm (x1)		Plain bar of 210cm (71") (x1)
DME P Equi 4655003398		Double mâchoire pivotante (x1)		Swivel double clamp (x1)
T 40 Equi 4655003067		Tube à mâchoire fixe de 40cm (x1)		Fixed clamp bar of 40cm (16") (x1)
P 753 4655000948		Etrier de traction (x1)		Handgrip (x1)
SP 01 4635001304		Sphère de protection (x5)		Wall protection cushion (x5)
PPO 4655000617		Porte poulie ouverte (x5)		Open pulley with clamp (x5)

Construit à partir d'un matériau qui allie la résistance et la légèreté, le Système de Traction Kinetec est d'un emploi facile pour tout le personnel soignant.

Designed from a material which combines resistance and lightness, the KINETEC TRACTION System is easy to use for all medical staff.

KINETEC garantit son Système de Traction, 2 ans contre tous vices de fabrication, à partir de la date d'achat par le consommateur.

KINETEC guarantees its Traction System 2 years against all defects of manufacture, starting from the date of purchase by the consumer.



Dispositif médical conforme aux exigences essentielles de la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux de classe I.



Medical device conforms to the essential requirements of the directive 93/42/CEE relating to the medical devices of class I.

Demandez notre catalogue complet d'accessoires et de kits de traction (poids, corde, attelle de positionnement, etc...)

Ask for our complete catalogue of accessories and traction kits (weights, cord, positioning splints, and more...)



T46 • 4655004578

Montage complet sur Lit Hill-Rom Centuris
Complete set on Hill-Rom Centuris bed


Adaptation spéciale pour lit :
Special Adaptation for bed:

Hill-Rom

The Centuris™ bed



Dimensions en mm
(*Lit en position basse)
Sizes in mm
(*Bed in low position)

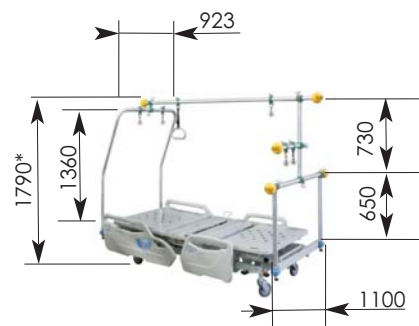

T46 4655004578 Montage complet Complete set

Le cadre est composé de : The frame consists of these parts:

PRT T46	4655004586	Portique Tête de lit Hill-Rom Centuris (x1)	Head porch bar for Hill-Rom Centuris (x1)
MFV T46	4655004635	Mâchoire à fiche lit Hill-Rom Centuris (x2)	Upright bar for Hill-Rom Centuris (x2)
B110	4655004015	Barre Octogonale de 110cm (x1)	Bar of 110cm (43") (x1)
TD 2M Equi	4670014726	Tube à deux mâchoires (x1)	Double clamp bar (x1)
B210	4655000055	Barre octogonale de 210 cm (x1)	Plain bar of 210cm (71") (x1)
DME P Equi	4655003398	Double mâchoire pivotante (x1)	Swivel double clamp (x1)
T 40 Equi	4655003067	Tube à mâchoire fixe de 40cm (x1)	Fixed clamp bar of 40cm (16") (x1)
P 753	4655000948	Etrier de traction (x1)	Handgrip (x1)
SP 01	4635001304	Sphère de protection (x5)	Wall protection cushion (x5)
PPO	4655000617	Porte poulie ouverte (x5)	Open pulley with clamp (x5)

Construit à partir d'un matériau qui allie la résistance et la légèreté, le Système de Traction Kinetec est d'un emploi facile pour tout le personnel soignant.

Designed from a material which combines resistance and lightness, the KINETEC TRACTION System is easy to use for all medical staff.

KINETEC garantit son Système de Traction, 2 ans contre tous vices de fabrication, à partir de la date d'achat par le consommateur.

KINETEC guarantees its Traction System 2 years against all defects of manufacture, starting from the date of purchase by the consumer.



Dispositif médical conforme aux exigences essentielles de la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux de classe I.



Medical device conforms to the essential requirements of the directive 93/42/CEE relating to the medical devices of class I.

Demandez notre catalogue complet d'accessoires et de kits de traction (poids, corde, attelle de positionnement, etc...)

Ask for our complete catalogue of accessories and traction kits (weights, cord, positioning splints, and more...)



T39 • 4655004289


Montage complet sur Lit Hill-Rom 900
Complet set on Hill-Rom 900 bed

Adaptation spéciale pour lit :
Special Adaptation for bed:

Hill-Rom

900

LI900Ax, LI900Bx

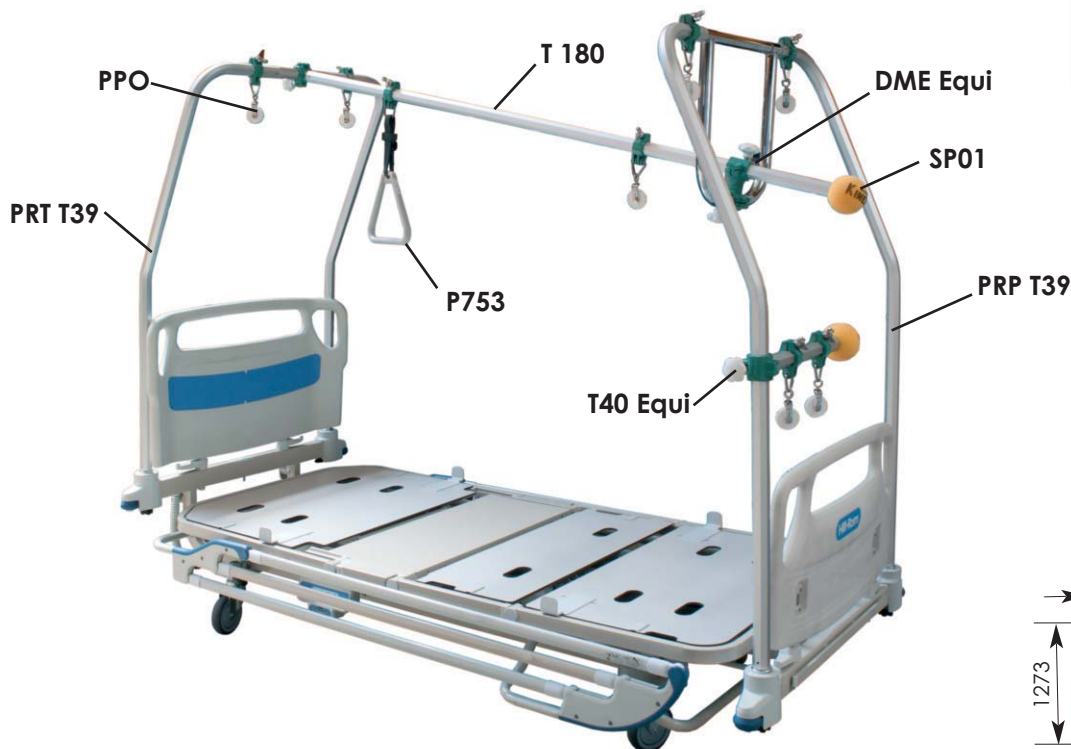

Dimensions en mm.
Sizes in mm.



T39 4655004289 Montage complet Complete set

Le cadre est composé de : The frame consists of these parts:

PRT T39	4655004297	Portique Tête de lit Hill-Rom 900 (x1)	Head porch bar for Hill-Rom 900 (x1)
PRP T39	4655004304	Portique Pied de lit Hill-Rom 900 (x1)	Foot porch bar for Hill-Rom 900 (x1)
T 180	4655002978	Barre octogonale de 180cm (x1)	Plain bar of 180cm (71") (x1)
DME Equi.	4655003059	Double mâchoire (x1)	Double clamp (x1)
T 40 Equi	4655003067	Tube à mâchoire fixe de 40cm (x1)	Fixed clamp bar of 40cm (16") (x1)
P 753	4655000948	Etrier de traction (x1)	Handgrip (x1)
SP 01	4635001304	Sphère de protection (x2)	Wall protection cushion (x2)
PPO	4655000617	Porte poulie ouverte (x7)	Open pulley with clamp (x7)

Construit à partir d'un matériau qui allie la résistance et la légèreté, le Système de Traction Kinetec est d'un emploi facile pour tout le personnel soignant.

Designed from a material which combines resistance and lightness, the KINETEC TRACTION System is easy to use for all medical staff.

KINETEC garantit son Système de Traction, 2 ans contre tous vices de fabrication, à partir de la date d'achat par le consommateur.

KINETEC guarantees its Traction System 2 years against all defects of manufacture, starting from the date of purchase by the consumer.



Dispositif médical conforme aux exigences essentielles de la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux de classe I.



Medical device conforms to the essential requirements of the directive 93/42/CEE relating to the medical devices of class I.

Demandez notre catalogue complet d'accessoires et de kits de traction (poids, corde, attelle de positionnement, etc...)

Ask for our complete catalogue of accessories and traction kits (weights, cord, positioning splints, and more...)




T26 • 4655003710

Montage complet sur Lit Hill-Rom AvantGuard 800
Complet set on Hill-Rom AvantGuard 800 bed

Adaptation spéciale pour lit :
Special Adaptation for bed:

Hill-Rom
AvantGuard 800

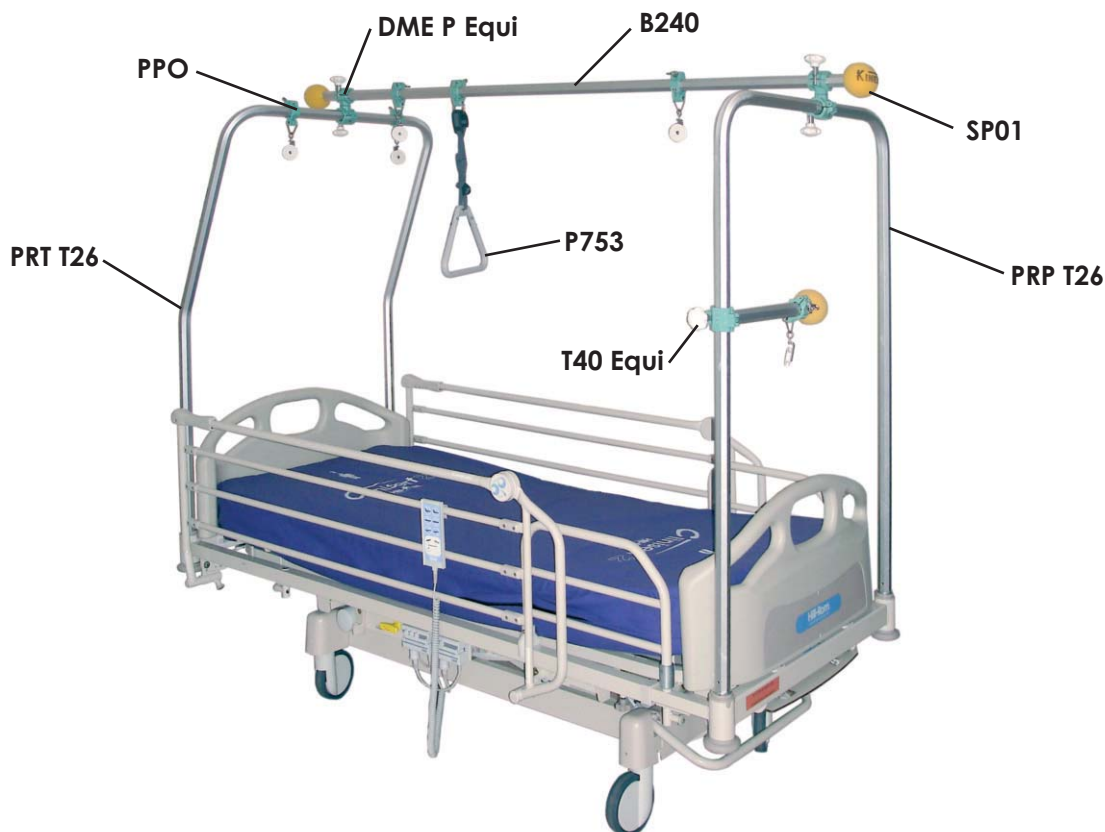

T26 4655003710 Montage complet Complete set

Le cadre est composé de : The frame consists of these parts:

PRT T26	4655003728	Portique Tête de lit AvantGuard 800 (x1)	Head porch bar for AvantGuard 800 (x1)
PRP T26	4655003736	Portique Pied de lit AvantGuard 800 (x1)	Foot porch bar for AvantGuard 800 (x1)
B240	4655000071	Barre octogonale de 240cm (x1)	Plain bar of 240cm (94") (x1)
DME P Equi	4655003398	Double mâchoire pivotante (x2)	Swivel double clamp (x2)
T 40 Equi	4655003067	Tube à mâchoire fixe de 40cm (x1)	Fixed clamp bar of 40cm (16") (x1)
P 753	4655000948	Etrier de traction (x1)	Handgrip (x1)
SP 01	4635001304	Sphère de protection (x3)	Wall protection cushion (x3)
PPO	4655000617	Porte poulie ouverte (x7)	Open pulley with clamp (x7)

Construit à partir d'un matériau qui allie la résistance et la légèreté, le Système de Traction Kinetec est d'un emploi facile pour tout le personnel soignant.

Designed from a material which combines resistance and lightness, the KINETEC TRACTION System is easy to use for all medical staff.

KINETEC garantit son Système de Traction, 2 ans contre tous vices de fabrication, à partir de la date d'achat par le consommateur.

KINETEC guarantees its Traction System 2 years against all defects of manufacture, starting from the date of purchase by the consumer.



Dispositif médical conforme aux exigences essentielles de la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux de classe I.



Medical device conforms to the essential requirements of the directive 93/42/CEE relating to the medical devices of class I.

Demandez notre catalogue complet d'accessoires et de kits de traction (poids, corde, attelle de positionnement, etc...)



Ask for our complete catalogue of accessories and traction kits (weights, cord, positioning splints, and more...)

T16 • 4655003033

Montage complet sur Lit Hill-Rom AvantGuard 1200
Compleat set on Hill-Rom AvantGuard 1200 bed

Adaptation spéciale pour lit :
Special Adaptation for bed:

Hill-Rom
AvantGuard 1200

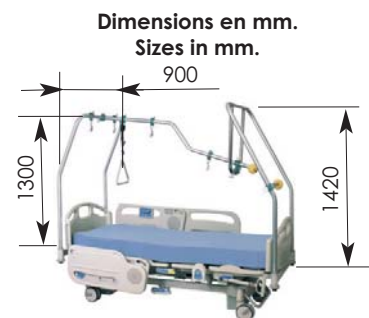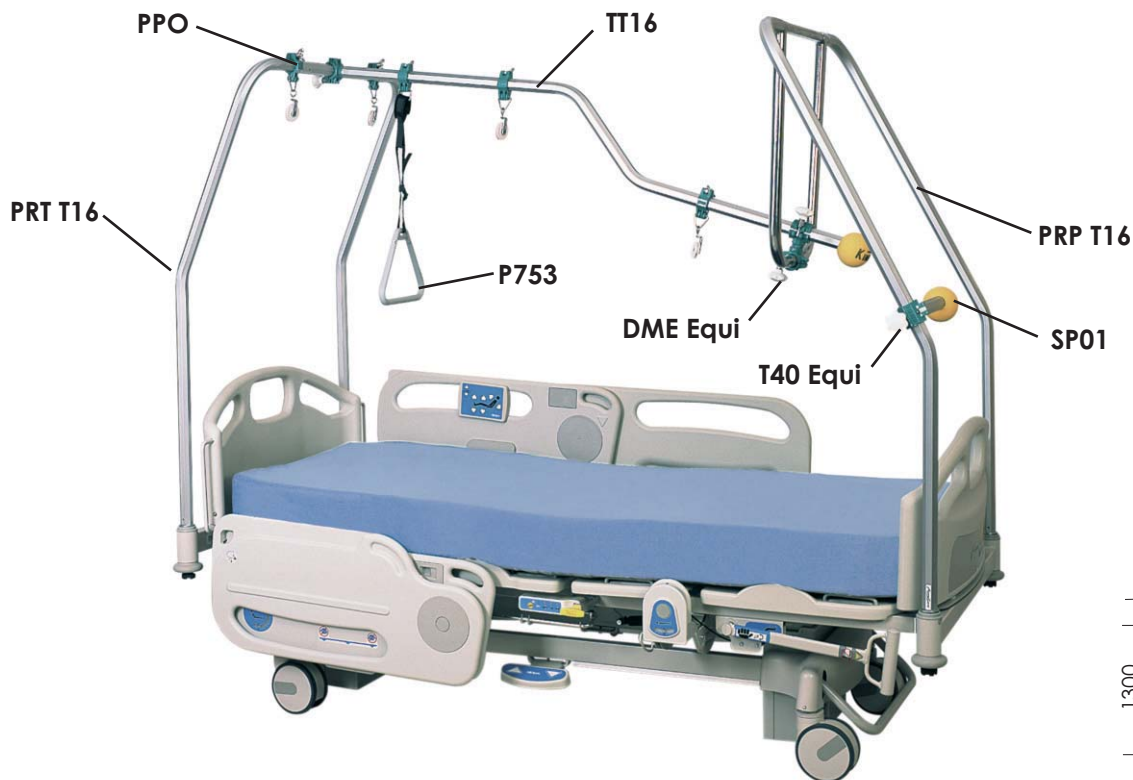

T16..... 4655003033Montage completComplete set

Le cadre est composé de :The frame consists of these parts:

PRT T16	4655003009	Portique Tête de lit AvantGuard 1200 (x1)	Head porch bar for AvantGuard 1200 (x1)
PRP T16	4655003017	Portique Pied de lit AvantGuard 1200 (x1)	Foot porch bar for AvantGuard 1200 (x1)
TT16	4655003025	Barre octogonale transversale (x1)	Plain bar (x1)
DME Equi.	4655003059	Double mâchoire (x1)	Double clamp (x1)
T 40 Equi	4655003067	Tube à mâchoire fixe de 40cm (x1)	Fixed clamp bar of 40cm (16") (x1)
P 753	4655000948	Etrier de traction (x1)	Handgrip (x1)
SP 01	4635001304	Sphère de protection (x2)	Wall protection cushion (x2)
PPO	4655000617	Porte poulie ouverte (x7)	Open pulley with clamp (x7)

Construit à partir d'un matériau qui allie la résistance et la légèreté, le Système de Traction Kinetec est d'un emploi facile pour tout le personnel soignant.

Designed from a material which combines resistance and lightness, the KINETEC TRACTION System is easy to use for all medical staff.

KINETEC garantit son Système de Traction, 2 ans contre tous vices de fabrication, à partir de la date d'achat par le consommateur.

KINETEC guarantees its Traction System 2 years against all defects of manufacture, starting from the date of purchase by the consumer.



Dispositif médical conforme aux exigences essentielles de la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux de classe I.



Medical device conforms to the essential requirements of the directive 93/42/CEE relating to the medical devices of class I.

Demandez notre catalogue complet d'accessoires et de kits de traction (poids, corde, attelle de positionnement, etc...)

Ask for our complete catalogue of accessories and traction kits (weights, cord, positioning splints, and more...)




MP AvantGuard • 4655003950

Montage parcellaire sur Lit Hill-Rom AvantGuard
Partial assembling on Hill-Rom AvantGuard bed

Adaptation spéciale pour lit :
Special Adaptation for bed:

Hill-Rom

AvantGuard

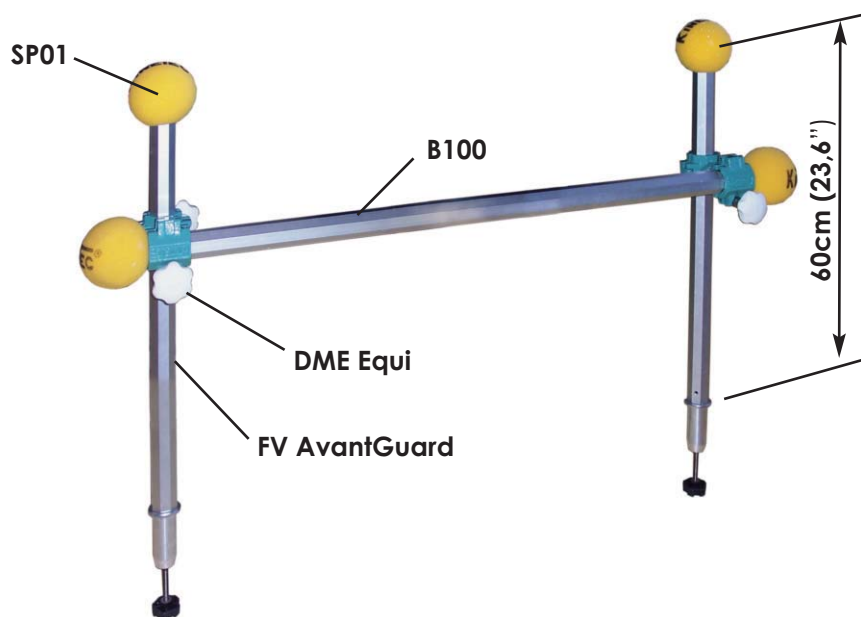

Spécialement adapté pour être installé en pied de lit, ce montage permet de réaliser différents types de tractions de courte durée du membre inférieur (traction collée), l'utilisation d'une attelle de positionnement est déconseillée.

Specially adapted for the foot end of the bed, this assembly allows different types of short time traction of the lower limb (skin traction); the using of the immobilisation splint is disadvised.

MP AvantGuard . 4655003950Montage completComplete set

Le montage est composé de :The assembling consists of these parts:

B100	4655003687	Barre de 100cm (x1)	Bar of 100cm (39") (x1)
DME Equi	4655003059	Double mâchoire (x2)	Double clamp (x2)
FV Avantguard	4655003942	Fiche verticales pour lit Avantguard (x2)	Upright bar for AvantGuard (x2)
SP 01	4635001304	Sphère de protection (x2)	Wall protection cushion (x2)

Construit à partir d'un matériau qui allie la résistance et la légèreté, le Système de Traction Kinetec est d'un emploi facile pour tout le personnel soignant.

Designed from a material which combines resistance and lightness, the KINETEC TRACTION System is easy to use for all medical staff.

KINETEC garantit son Système de Traction, 2 ans contre tous vices de fabrication, à partir de la date d'achat par le consommateur.

KINETEC guarantees its Traction System 2 years against all defects of manufacture, starting from the date of purchase by the consumer.



Dispositif médical conforme aux exigences essentielles de la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux de classe I.



Medical device conforms to the essential requirements of the directive 93/42/CEE relating to the medical devices of class I.

Demandez notre catalogue complet d'accessoires et de kits de traction (poids, corde, attelle de positionnement, etc...)

Ask for our complete catalogue of accessories and traction kits (weights, cord, positioning splints, and more...)




T14 V2 • 4655003546

Montage complet sur Lit Hill-Rom TotalCare
Compleat set on Hill-Rom TotalCare bed

Adaptation spéciale pour lit :
Special Adaptation for bed:

Hill-Rom
TotalCare

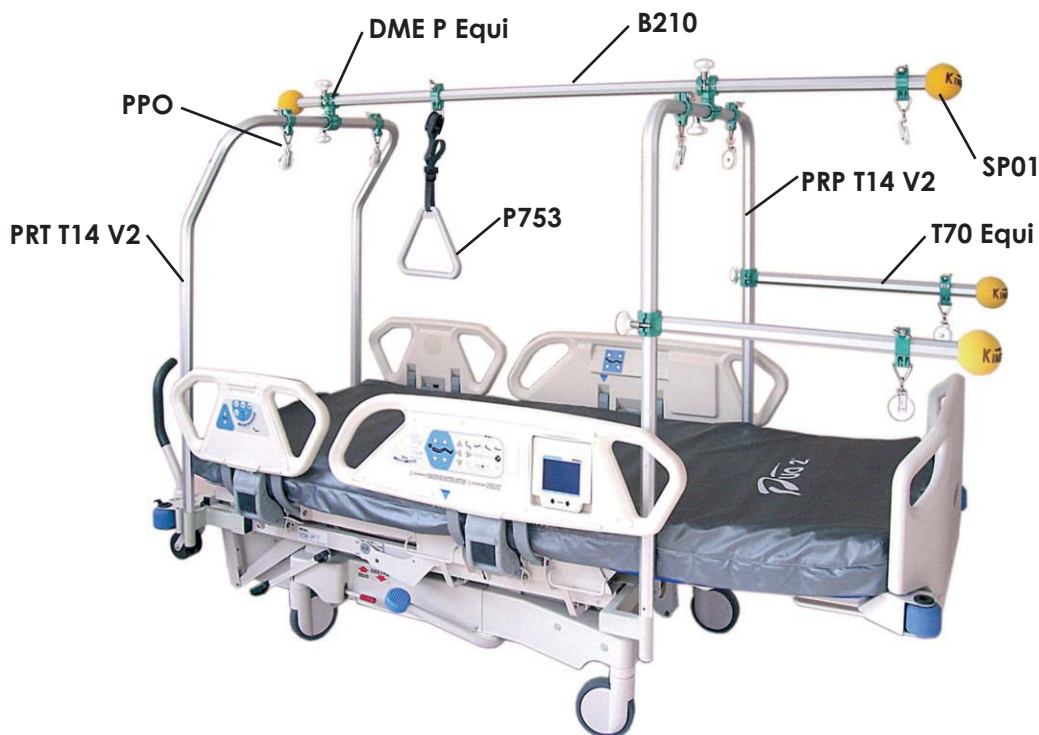

T14 V2 4655003546 Montage complet Complete set

Le cadre est composé de : The frame consists of these parts:

4670021763		Support gauche portique tête de lit (x1)		Head porch support left (x1)
4670021789		Support gauche portique pied de lit (x1)		Foot porch support left (x1)
4670021771		Support droit portique tête de lit (x1)		Head porch support right (x1)
4670021797		Support droit portique pied de lit (x1)		Foot porch support right (x1)
4620003208		Vis de serrage M8x70mm (x8)		Screw M8x70mm (x8)
4625000548		Bouton de serrage M8x40mm (x4)		Black knob M8x40mm (x4)
PRT T14V2	 4655003520		Portique Tête de lit TotalCare (x1)	 Head porch bar for TotalCare (x1)
PRP T14V2	 4655003538		Portique Pied de lit TotalCare (x1)	 Foot porch bar for TotalCare (x1)
B 210	 4655000055		Barre octogonale de 210cm (x1)	 Plain bar of 210cm (71") (x1)
DME P Equi	 4655003398		Double mâchoire pivotante (x2)	 Swivel double clamp (x2)
T 70 Equi	 4655003207		Tube à mâchoire fixe de 70cm (x2)	 Fixed clamp bar of 70cm (28") (x2)
P 753	 4655000948		Etrier de traction (x1)	 Handgrip (x1)
SP 01	 4635001304		Sphère de protection (x4)	 Wall protection cushion (x4)
PPO	 4655000617		Porte poulie ouverte (x7)	 Open pulley with clamp (x7)

Construit à partir d'un matériau qui allie la résistance et la légèreté, le Système de Traction Kinetec est d'un emploi facile pour tout le personnel soignant.

Designed from a material which combines resistance and lightness, the KINETEC TRACTION System is easy to use for all medical staff.

KINETEC garantit son Système de Traction, 2 ans contre tous vices de fabrication, à partir de la date d'achat par le consommateur.

KINETEC guarantees its Traction System 2 years against all defects of manufacture, starting from the date of purchase by the consumer.



Dispositif médical conforme aux exigences essentielles de la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux de classe I.



Medical device conforms to the essential requirements of the directive 93/42/CEE relating to the medical devices of class I.

Demandez notre catalogue complet d'accessoires et de kits de traction (poids, corde, attelle de positionnement, etc...)

Ask for our complete catalogue of accessories and traction kits (weights, cord, positioning splints, and more...)




MP TotalCare • 4655004346

Montage parcellaire sur Lit Hill-Rom TotalCare
Partial assembling on Hill-Rom TotalCare bed

Adaptation spéciale pour lit :
Special Adaptation for bed:

Hill-Rom
TotalCare

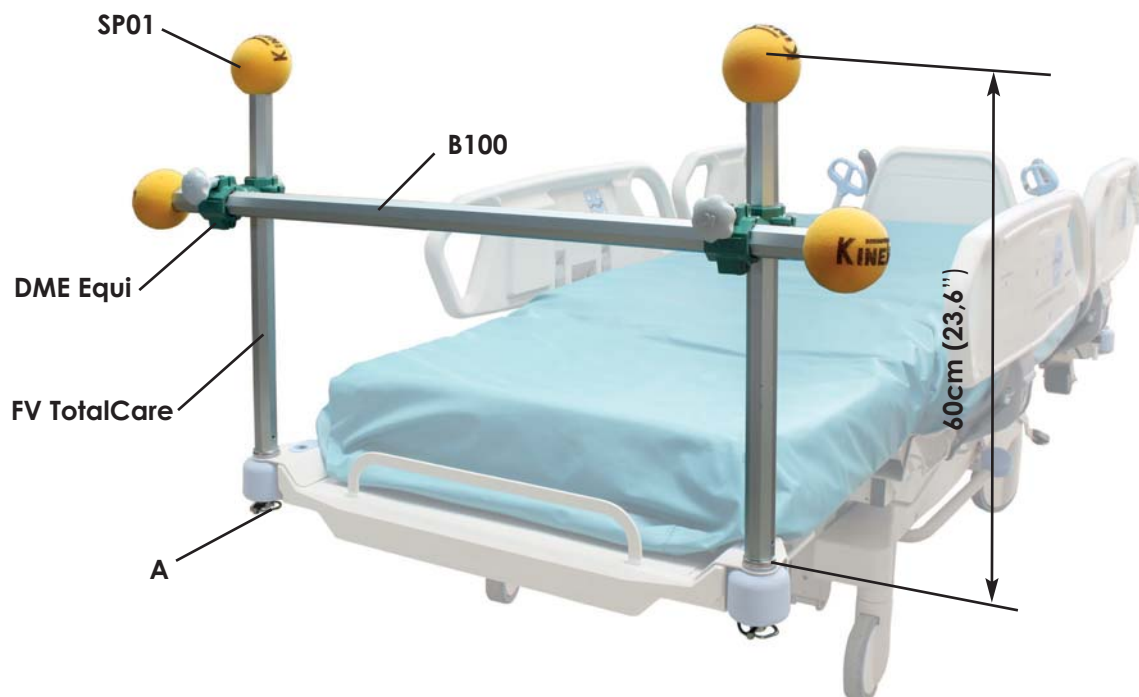

Spécialement adapté pour être installé en pied de lit, ce montage permet de réaliser différents types de tractions de courte durée du membre inférieur (traction collée), l'utilisation d'une attelle de positionnement est déconseillée.

Specially adapted for the foot end of the bed, this assembly allows different types of short time traction of the lower limb (skin traction); the using of the immobilisation splint is disadvised.

MP TotalCare ... 4655004346 ... Montage complet ... Complete set

Le montage est composé de : ... The assembling consists of these parts:

B100	4655003687	Barre de 100cm (x1)	Bar of 100cm (39") (x1)
DME Equi	4655003059	Double mâchoire (x2)	Double clamp (x2)
FV TotalCare	4655004338	Fiche verticales pour lit TotalCare (x2)	Upright bar for TotalCare (x2)
A	4626001024	Goupille à anneau (x2)	Ring pin (x2)
SP 01	4635001304	Sphère de protection (x4)	Wall protection cushion (x4)

Construit à partir d'un matériau qui allie la résistance et la légèreté, le Système de Traction Kinetec est d'un emploi facile pour tout le personnel soignant.

Designed from a material which combines resistance and lightness, the KINETEC TRACTION System is easy to use for all medical staff.

KINETEC garantit son Système de Traction, 2 ans contre tous vices de fabrication, à partir de la date d'achat par le consommateur.

KINETEC guarantees its Traction System 2 years against all defects of manufacture, starting from the date of purchase by the consumer.



Dispositif médical conforme aux exigences essentielles de la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux de classe I.



Medical device conforms to the essential requirements of the directive 93/42/CEE relating to the medical devices of class I.

Demandez notre catalogue complet d'accessoires et de kits de traction (poids, corde, attelle de positionnement, etc...)

Ask for our complete catalogue of accessories and traction kits (weights, cord, positioning splints, and more...)




T8EX • 4655003041


Montage complet sur Lit Hill-Rom Evolution
Complete set on Hill-Rom Evolution bed

Adaptation spéciale pour lit :
Special Adaptation for bed:

Hill-Rom
EVOLUTION

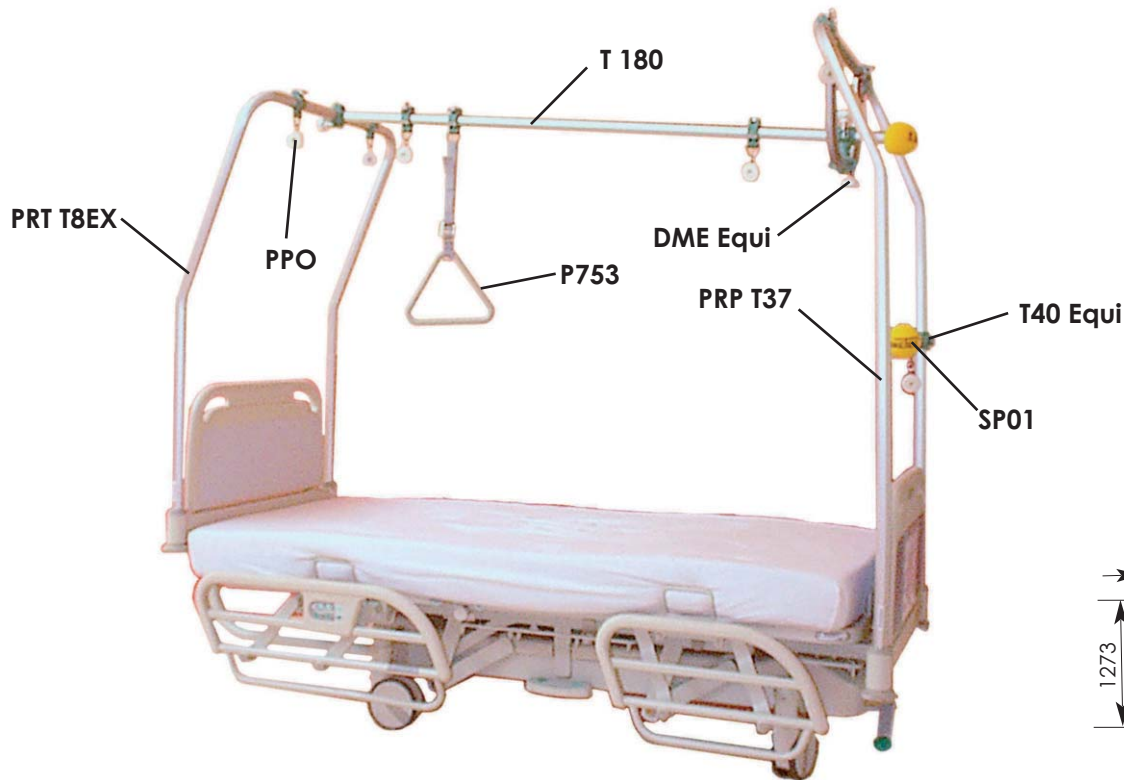

Dimensions en mm.
Sizes in mm.

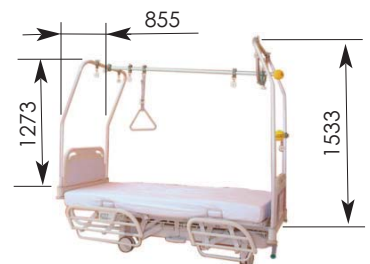

T8 EX 4655003041 Montage complet Complete set

Le cadre est composé de : The frame consists of these parts:

PRT T8EX	4655002994	Portique Tête de lit Evolution (x1)	Head porch bar for Evolution (x1)
PRP T8EX	4655002986	Portique Pied de lit Evolution (x1)	Foot porch bar for Evolution (x1)
T 180	4655002978	Barre octogonale de 180cm (x1)	Plain bar of 180cm (71") (x1)
DME Equi.	4655003059	Double mâchoire (x1)	Double clamp (x1)
T 40 Equi	4655003067	Tube à mâchoire fixe de 40cm (x1)	Fixed clamp bar of 40cm (16") (x1)
P 753	4655000948	Etrier de traction (x1)	Handgrip (x1)
SP 01	4635001304	Sphère de protection (x2)	Wall protection cushion (x2)
PPO	4655000617	Porte poulie ouverte (x7)	Open pulley with clamp (x7)

Construit à partir d'un matériau qui allie la résistance et la légèreté, le Système de Traction Kinetec est d'un emploi facile pour tout le personnel soignant.

Designed from a material which combines resistance and lightness, the KINETEC TRACTION System is easy to use for all medical staff.

KINETEC garantit son Système de Traction, 2 ans contre tous vices de fabrication, à partir de la date d'achat par le consommateur.

KINETEC guarantees its Traction System 2 years against all defects of manufacture, starting from the date of purchase by the consumer.



Dispositif médical conforme aux exigences essentielles de la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux de classe I.




Medical device conforms to the essential requirements of the directive 93/42/CEE relating to the medical devices of class I.

Demandez notre catalogue complet d'accessoires et de kits de traction (poids, corde, attelle de positionnement, etc...)

Ask for our complete catalogue of accessories and traction kits (weights, cord, positioning splints, and more...)



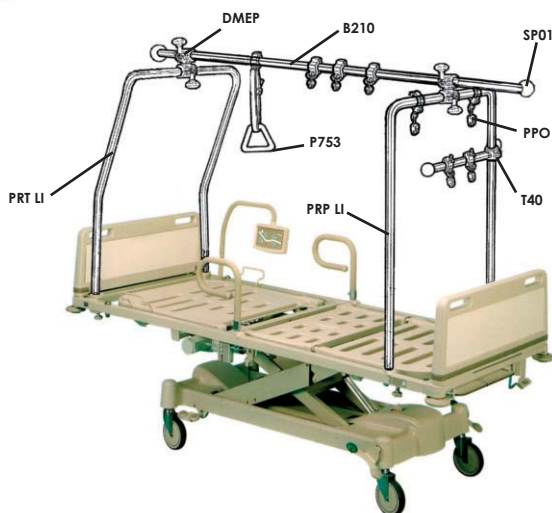

Adaptation spéciale pour lit :
Special Adaptation for bed:

Hill-Rom


Dynamis

T11 • 4655002796

Montage complet sur Lit Hill-Rom Dynamis
Équiper de Dossier Mediform en tête et en pied.

Complete set on Hill-Rom Dynamis bed
Equipped with Mediform head and footboard.

T11	4655002796	Montage complet	Complete set
		Le cadre est composé de :	The frame consists of these parts:
PRP LI	4670014792	Portique de pied de lit (x1)	Foot porch bar (x1)
PRT LI	4670014784	Portique de tête de lit (x1)	Head porch bar (x1)
DME P	4655000287	Double mâchoires pivotantes (x2)	Swivel double clamp (x2)
B 210	4655000055	Barre octogonale de 210cm (x1)	Plain bar of 210cm(83") (x1)
T 40	4655000766	Tube à mâchoire fixe de 40cm (x1)	Fixed clamp bar of 40cm (16") (x1)
P 753	4655000948	Etrier de traction (x1)	Handgrip (x1)
PPO	4655000617	Porte poulie ouverte (x7)	Open pulley with clamp (x7)
SP01	4635001304	Sphère de protection (x3)	Wall protection cushion (x3)

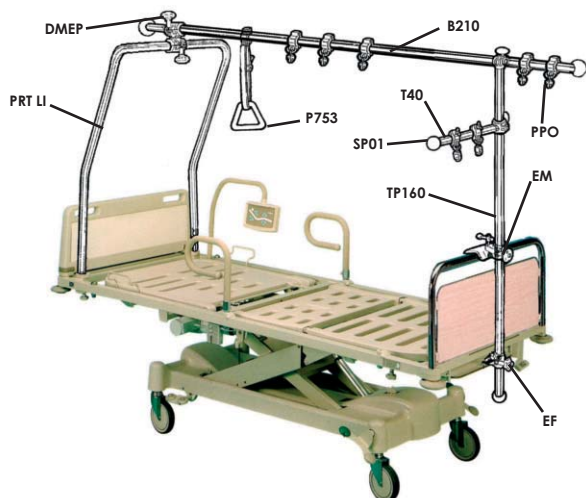

T12 • 4655002803

Montage complet sur Lit Hill-Rom Dynamis
Équiper de Dossier cintre métallique en pied.

Complete set on Hill-Rom Dynamis bed
Equipped with a metallic footboard.

T12	4655002803	Montage complet	Complete set
		Le cadre est composé de :	The frame consists of these parts:
PRT LI	4670014784	Portique de tête de lit (x1)	Head porch bar (x1)
EM	4655000344	Etau mobile (x1)	Upper clamp movable (x1)
EF	4655000328	Etau fixe (x1)	Fixed panel lower claws (x1)
TP 160	4655000857	Tube à mâchoire pivotante de 160cm (x1)	Swivel clamp bar of 160cm (63") (x1)
DME P	4655000287	Double mâchoires pivotantes (x1)	Swivel double clamp (x1)
B 210	4655000055	Barre octogonale de 210cm (x1)	Plain bar of 210cm(83") (x1)
T 40	4655000766	Tube à mâchoire fixe de 40cm (x1)	Fixed clamp bar of 40cm (16") (x1)
P 753	4655000948	Etrier de traction (x1)	Handgrip (x1)
PPO	4655000617	Porte poulie ouverte (x7)	Open pulley with clamp (x7)
SP01	4635001304	Sphère de protection (x4)	Wall protection cushion (x4)

Construit à partir d'un matériau qui allie la résistance et la légèreté, le Système de Traction Kinetec est d'un emploi facile pour tout le personnel soignant.

KINETEC garantit son Système de Traction, 2 ans contre tous vices de fabrication, à partir de la date d'achat par le consommateur.



Dispositif médical conforme aux exigences essentielles de la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux de classe I.

Demandez notre catalogue complet d'accessoires et de kits de traction (poids, corde, attelle de positionnement, etc...)

Designed from a material which combines resistance and lightness, the KINETEC TRACTION System is easy to use for all medical staff.

KINETEC guarantees its Traction System 2 years against all defects of manufacture, starting from the date of purchase by the consumer.



Medical device conforms to the essential requirements of the directive 93/42/CEE relating to the medical devices of class I.

Ask for our complete catalogue of accessories and traction kits (weights, cord, positioning splints, and more...)

kinetec

Kinetec SAS

Zone Industrielle de Tournes
Rue Maurice Périn
F-08090 Tournes
France



+33 (0)3 24 29 85 05



+33 (0)3 24 33 51 05



contact@kinetec.fr



www.kinetec.fr