



VENTILATED SAMPLE STORAGE CABINET
ARMARIO VENTILADO DE ALMACENAMIENTO DE MUESTRAS
AV-017

EN - ES



GENERAL CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS GENERALES


Stainless steel construction <i>Construcción en acero inoxidable</i>	AISI-304
Sheet thickness <i>Espesores de chapa</i>	1.2 – 1.5 mm
Watertight swing doors with safety glass <i>Puertas batientes estancas, con vidrio de seguridad</i>	✓
Adjustable height shelves <i>Estantes regulables en altura</i>	✓
LCD management screen <i>Pantalla LCD de gestión</i>	1
Acoustic alarm for system notifications <i>Alarma acústica para avisos del sistema</i>	1
Security power supply switch <i>Interruptor de seguridad (seccionador de corriente)</i>	1
Control panel <i>Panel de control</i>	1
Removable perforated shelves <i>Estantes perforados extraíbles</i>	5
Recovery tray <i>Bandeja de recogida</i>	2
Interior lighting <i>Iluminación interior</i>	✓
Open door sensor and alarm <i>Sensor y alarma de puerta abierta</i>	✓
Electric power <i>Potencia eléctrica</i>	50W

Aspiration system / Sistema de aspiración

10-50 minutes operating cycle <i>Funcionamiento en ciclos 10-50 minutos</i>	✓
Ultra-quiet centrifugal duct fan <i>Motor helico-centrífugo ultrasilencioso</i>	1
Aluminium oxide filters with potassium permanganate impregnation <i>Filtros de óxido de aluminio con impregnación de permanganato potásico</i>	✓
Filters useful life control system <i>Control vida útil de los filtros</i>	✓
First notification for filters replacement <i>Primer aviso previo a cambio de filtros</i>	800 h
End of the filters service life <i>Fin de vida útil de los filtros</i>	850 h
Maximum suction capacity <i>Capacidad máxima de aspiración</i>	140 – 240 m ³ / h




DIMENSIONS / *DIMENSIONES*

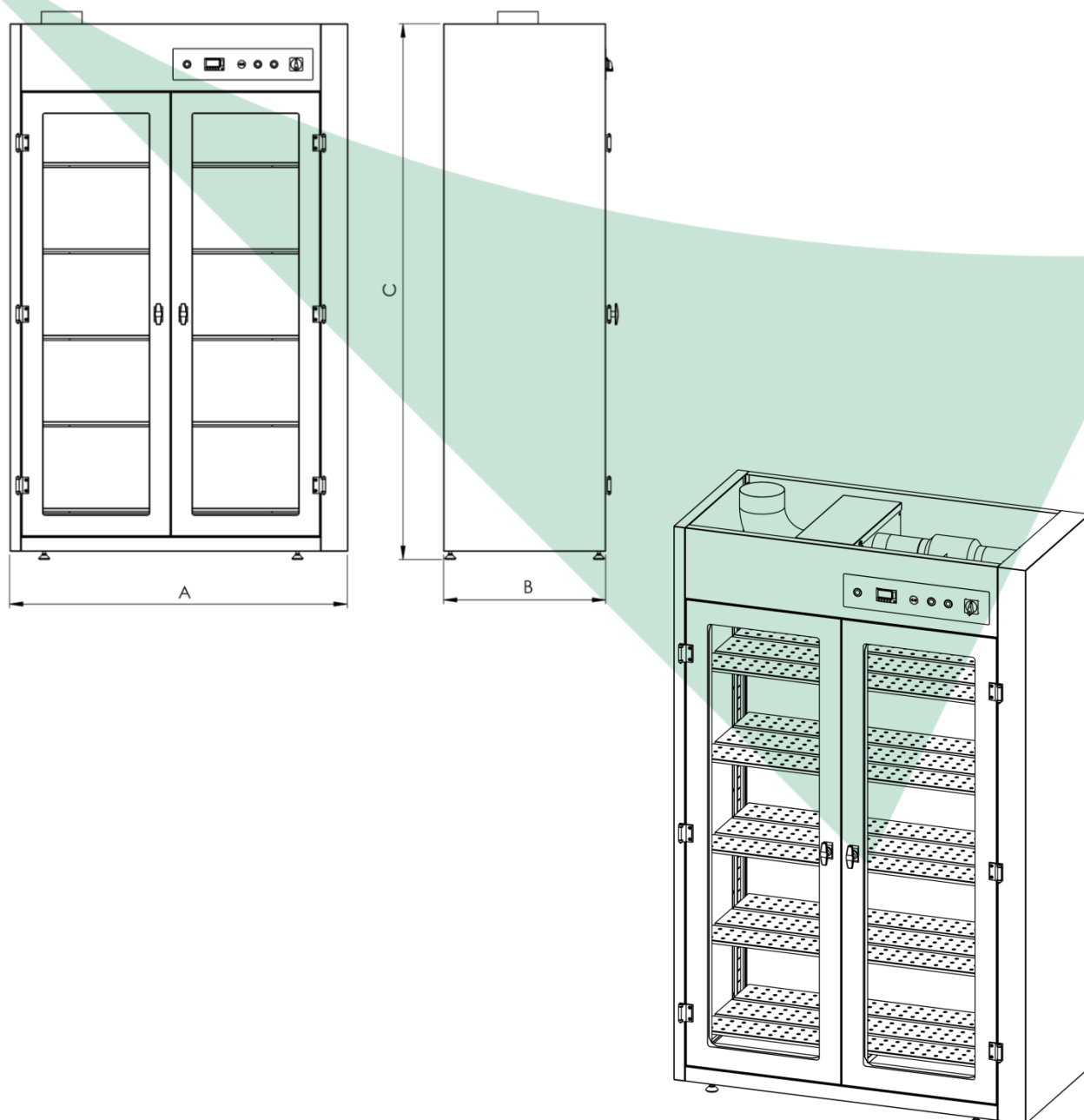

	AV-017-1000		AV-017-1250		AV-017-1500	
	in	mm	in	mm	in	mm
A	39.4	1000	39.4	1250	39.4	1500
B	23.6	600	23.6	600	23.6	600
C	78	1980	78	1980	78	1980

PACKING: WEIGHT - DIMENSIONS / EMBALAJE: PESO – MEDIDAS

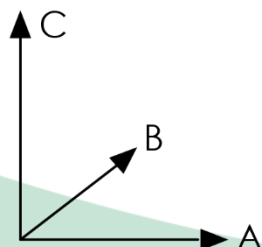

	AV-017-1000		AV-017-1250		AV-017-1500	
	in	mm	in	mm	in	mm
A	44	1120	54	1370	63,8	1620
B	35,4	900	35,4	900	35,4	900
C	86,6	2200	86,6	2200	86,6	2200
WEIGHT / PESO	573 lb	260 kg	711 lb	322,5 kg	816 lb	370 kg
Vol.	2.2 m ³		2.71 m ³		3.34 m ³	



Note: This document is for information purposes only. Any functionality, feature or specification are subject to change without notice. AnatHomic Solutions reserves the right to improve this document or the product described without the obligation to communicate such changes.

Nota: Este documento es meramente informativo, no contractual. Cualquier funcionalidad, característica o especificación están sujetas a cambio sin previo aviso. AnatHomic Solutions se reserva el derecho a mejorar este documento o el producto descrito en el mismo, sin la obligación de comunicar las modificaciones realizadas.