



Hillrom™



Superficie P290 Hillrom™

ENTORNO SAFE SKIN
PARA SUS PACIENTES

Las úlceras por presión son costosas y prevalentes. Por ese motivo, el sistema de recambio de colchón o sobrecolchón P290 de Hillrom fue diseñado para prevenir y tratar las úlceras por presión en pacientes adultos de riesgo bajo a alto. La superficie P290 proporciona unos niveles regulables de inmersión tanto en el modo de terapia de baja presión continua como alterna.


Este enfoque terapéutico reduce la compresión de tejidos vulnerables y está en consonancia con las directrices internacionales del NPUAP/EPUAP/PPPIA, que recomiendan a los facultativos que cambien de una superficie de apoyo a una superficie de apoyo especializada (es decir, colchón de aire de presión alterna, colchón con baja presión continua o cama de aire fluidizado) cuando el individuo¹:

- No se puede cambiar de posición debido la úlcera de presión existente
- Tiene una úlcera por presión en dos o más zonas que limita los cambios de postura
- Tiene una úlcera por presión que no se mejora que empeora a pesar de una atención integral adecuada
- Tiene un riesgo alto de úlceras por presión adicionales
- Se ha sometido a cirugía de colgajo o de injerto
- Está incómodo
- «Bottoms Out» (es decir, toca el somier) en la superficie de apoyo actual


Superficie P290 Hillrom™

SISTEMA TERAPÉUTICO DE RECAMBIO DE COLCHÓN O SOBRECOLCHÓN

Espuma

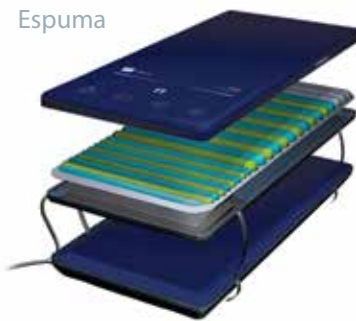

Aire

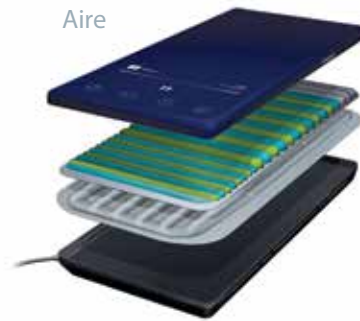

PRESTACIONES Y BENEFICIOS

Diseñado especialmente para mejorar la prevención y el tratamiento de los pacientes con riesgo de padecer úlceras por presión.

Una selección de terapias de baja presión continua o alterna que se adaptan a las necesidades del paciente y a las preferencias clínicas.

Tiempos de ciclo regulables y ajuste de la firmeza para lograr una mayor comodidad y control sobre la terapia del paciente.

Funciones de seguridad para el paciente y el cuidador que incluyen bloqueo automático del panel de control, indicadores de error y modo de transporte de 2 horas.

Tres áreas de redistribución de la presión que proporcionan más protección a las zonas vulnerables del cuerpo, incluida un área alterna con una inclinación de 5° para los talones.

Inflado P-MAX y PLUS que proporcionan más apoyo y seguridad durante la colocación y la transferencia de pacientes.

Hay disponible un recambio de colchón con una superficie de apoyo para el paciente de aire o espuma.

Funda radiográfica para facilitar la realización de radiografías en cama y mejorar la comodidad del paciente.

Asas de evacuación para facilitar el traslado de los pacientes durante una emergencia.

*Opcional

hillrom.com

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SOBRECOLCHÓN

Longitud	200 cm
Anchura	90 cm
Altura	10 cm
Peso	6,1 kg

RECAMBIO DE COLCHÓN (ESPUMA)

Longitud	200 cm
Anchura	90 cm
Altura	17 cm
Peso	12 kg

RECAMBIO DE COLCHÓN (AIRE)

Longitud	200 cm
Anchura	90 cm
Altura	17 cm
Peso	7,5 kg

UNIDAD DE CONTROL

Longitud	90 cm
Anchura	20 cm
Altura	12 cm
Peso	2,2 kg

Carga segura de trabajo	250 kg
-------------------------	--------

Peso terapéutico recomendado	De 30 a 140 kg
------------------------------	----------------

Material de la funda

Revestimiento de poliuretano sobre poliéster, cremallera de 360°, costuras selladas, baja fricción, elástico en dos direcciones, permeable a la humedad, bacteriostático, fungiestático y antimicrobiano. Se puede limpiar y lavar. Se pueden utilizar soluciones de limpieza con base de cloro (≤ 1000 ppm).

¹Directrices internacionales del EPUAP/NPIAP/PPPIA para la prevención y el tratamiento de úlceras por presión, 2019.

El colchón P290 ayuda a prevenir y a tratar úlceras por presión en pacientes adultos que presentan de bajo a alto riesgo, dentro de los límites de peso recomendados de 30 a 140 kg, con el fin de lograr un rendimiento clínico validado en todas las posiciones habituales del cabecero de la cama.

Clase IIa

Organismo notificado: GMED CE0459

Fabricante: Hill-Rom S.A.S. – BP 14 ZI du Talhouët 56330 Pluvigner (Francia)

Este equipo médico es un producto sanitario regulado que cuenta, de acuerdo con esta normativa, con la marca CE. Hill-Rom le recomienda la lectura detenida de las instrucciones detalladas de seguridad, para la correcta utilización que figuran en los documentos que acompañan a los equipos médicos. El personal de los centros sanitarios es responsable del uso y mantenimiento adecuados de estos equipos médicos. Hill-Rom se reserva el derecho a efectuar modificaciones sin previo aviso en el diseño, las especificaciones y los modelos. La única garantía ofrecida por Hill-Rom es la garantía expresa y escrita que acompaña a la factura de venta o alquiler de los productos.